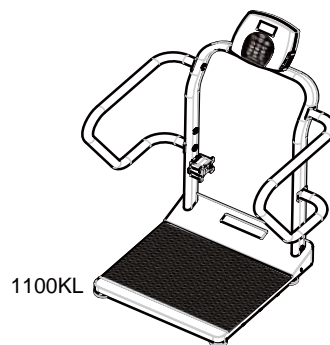





www.homscales.com

PRO PLUS™ ELECTRONIC SCALES

MODELS 1100KL, 2650KL, & 2700KL




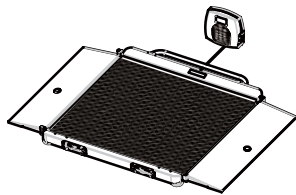HANDRAIL SCALE



2650KL

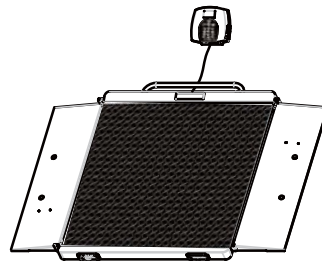WHEELCHAIR SCALE



2700KL

FOLDING WHEELCHAIR SCALE

**PLEASE REGISTER YOUR PRODUCT FOR WARRANTY AT
WWW.HOMSCALES.COM**

Patents: US: D508655, D523367, Europe:0149984/1-8, China: 200430004551.2

OPERATION MANUAL
www.homscales.com
PROPLUS™ ELECTRONIC SCALES
MODELS 1100KL, 2650KL AND 2700KL

Thank you for your purchase of this product. Please read this manual carefully and keep it handy for ready reference.

ENGLISH.....	1
FRANÇAIS	38
ESPAÑOL	77

TABLE OF CONTENTS

ASSEMBLY INSTRUCTION	2
CAUTION AND WARNING	7
SPECIFICATIONS	7
SET UP	8
OPERATION INSTRUCTIONS	9
MAINTENANCE	22
TROUBLESHOOTING	23
CALIBRATION PATH	24
EXPLODED VIEW OF DISPLAY MODULE	25
DISPLAY MODULE PARTS LIST	25
1100KL EXPLODED VIEW	26
1100KL PARTS LIST	27
2650KL EXPLODED VIEW	28
2650KL PARTS LIST	29
2700KL EXPLODED VIEW	30
2700KL PARTS LIST	31
COMMUNICATION PROTOCOL	32
WARRANTY	37


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (1100KL)

Parts List:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| (1) Platform Assembly | (1) Handle |
| (1) Display Assembly | (4) Ramp Holder |
| (4) Rubber Feet Assemblies | (1) Display Support |
| (1) AC Adapter | (4) Screws |
| (1) LC Cable Connector | (1) Power Cord |
| | (2) Wheels |

Tools required: Phillips head screwdriver (not included), Allen wrenches (included).

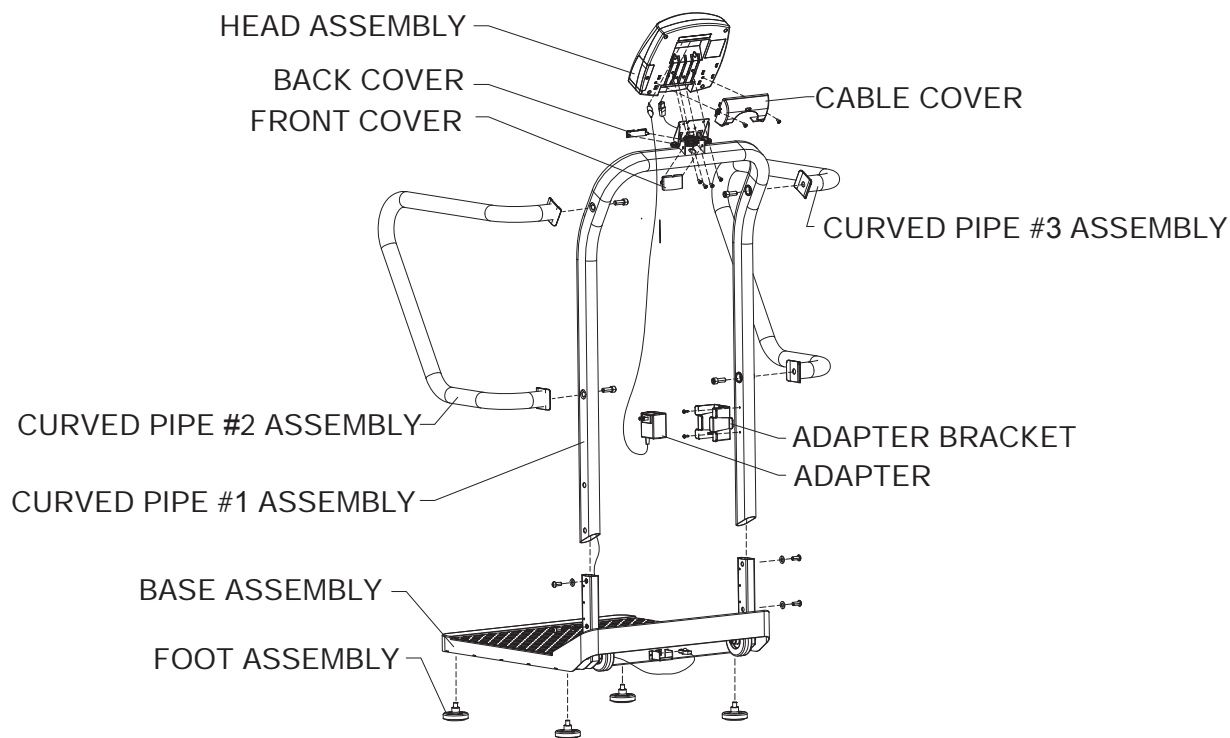Remove each piece from the carton and unwrap packing material carefully to prevent scratching the unit's parts. It is recommended that assembly is performed by two people.



Figure

(refer to the Parts List on page 27 for details on parts)

1100KL Assembly Instructions

1. Remove the base of the scale from the box and screw in the 4 Feet into the underside of the Platform.
2. Place the Platform on the floor and adjust the feet to level Platform. (DO NOT OVERTIGHTEN).
3. Locate the load cell cable and pull it out the bottom of the center handrail. Position the Handrail over the Platform and feed the cable through the Handrail Support.
4. The load cell cable should pass through the Handrail Support and exit underneath.
5. Plug the load cell cable into the base of the scale.
6. Slide the center Handrail over the Handrail Supports and insert the Handrail bolts. (2 on each side of Handrail) DO NOT OVERTIGHTEN.
7. Using the largest Allen wrench, attach the 2 Side Handrails to the center Handrail.
8. Connect the load cell cable to the Load Cell port on the back of the Display Unit and slide the Display Assembly onto the display support.

Note: Route the load cell cable through the channel on the rear of the Display Unit.
9. Insert 4 screws into the Display Support.
10. Connect the power cord to the power port.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS(2650KL & 2700KL)

Parts List:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| (1) Platform Assembly (plus 2 ramps) | (1) Handle |
| (1) Display Assembly | (4) Ramp Holder |
| (4) Rubber Feet Assemblies | (1) Display Support |
| (1) AC Adapter | (4) Screws |
| (1) LC Cable Connector | (1) Power Cord |
| | (2) Wheels |

Tools required: Phillips head screwdriver (not included).

Remove each piece from the carton and unwrap packing material carefully to prevent scratching the unit's parts. It is recommended that assembly is performed by two people.

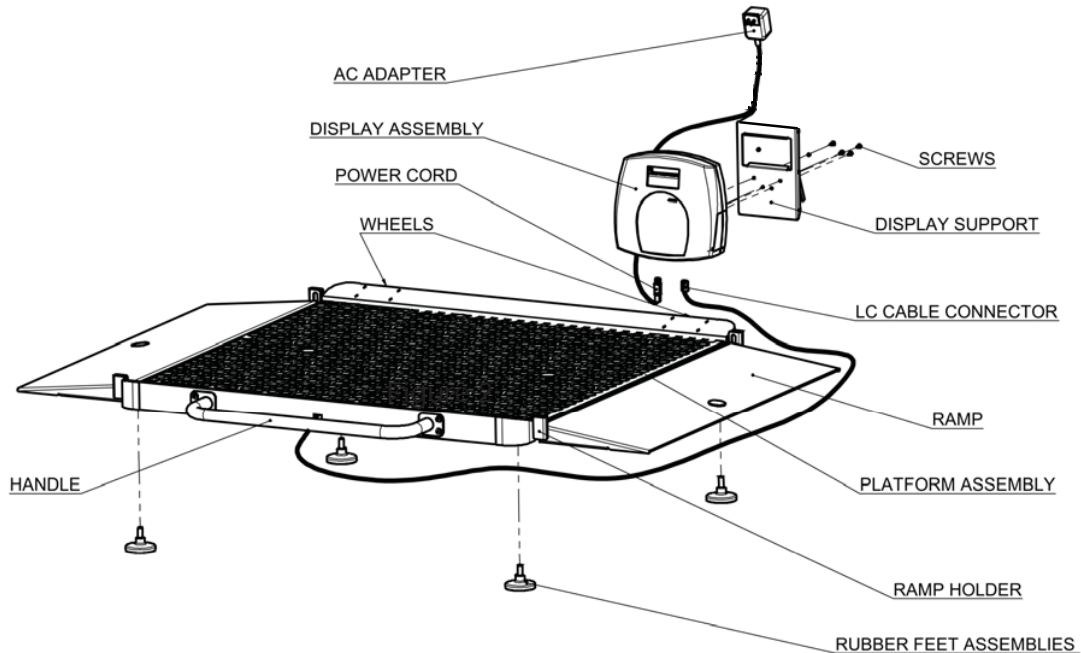


Figure 2

(refer to the Parts List on page 29 & 31 for details on parts)

1. Open the scale to operational position.
2. Connect the load cell cable connector to the load cell port on the rear of the display assembly and insert and secure the cable into the center channel in the display.
NOTE: Do not attach the Power Cord at this point.
3. Connect the load cell cable to the display unit see Figure 2.
NOTE: The load cell cable should now be secured in the channel between the display assembly and the display support.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (2650KL & 2700KL)

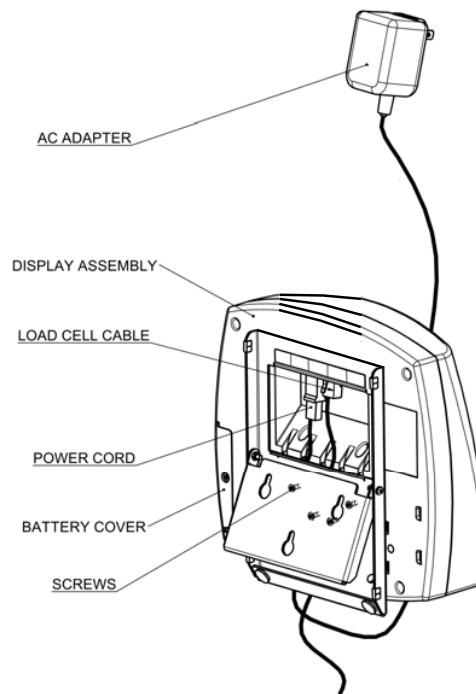


Figure 2

Re er e r Li ge 25 r e i r

4. Insert the power cord into the retaining slot. Align the rear cover tabs with the slots on the rear of the display assembly. Secure with 4 screws.
 - . ently tip the scale. Screw in 4 plastic feet. Do not tighten.
 - . ently return the scale to the upright position.

ARNIN : Do not drop the scale on its feet. This could result in load cell damage.

7. Screw unscrew the plastic feet to level the scale.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (2650KL & 2700KL)

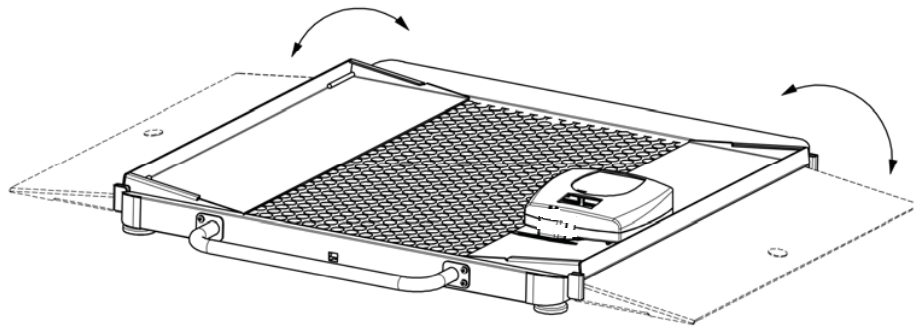


Figure 3. Folding the Ramp

1. Both ramps (left and right) can fold onto the platform.
2. The indicator is mounted onto one of the folded ramps by sliding the slots in the back of the indicator into raised pins..
3. Lift the scale platform onto its side using the handle, and it is now able to be transported on two wheels see Figure 4.

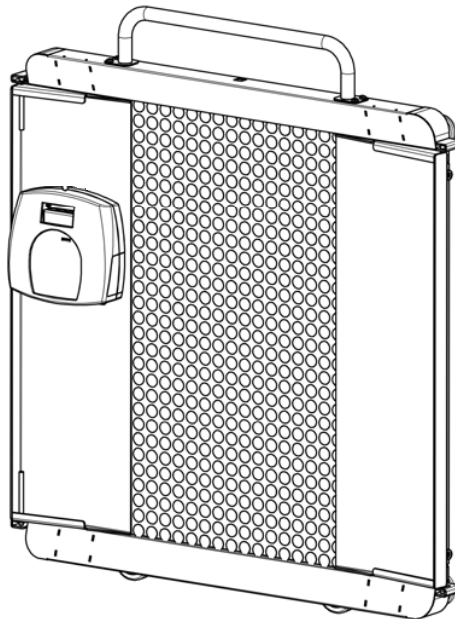


Figure 4. Folded Ramp

CAUTION AND WARNING

To prevent injury and damage to your scale, please follow these instructions very carefully.

- Do not transport the scale while the platform is loaded.
- For accurate weighing the scale must be placed on a flat, stable surface.
- For accurate weighing, verify proper operation according to the procedure described in this manual before each use.
- Do not use in the presence of flammable materials.
- Operating at other voltages and frequencies than specified could damage the equipment.
- If the LOW BAT indicator activates, for accurate weighing, replace the batteries or connect the scale to an AC power source as soon as possible.
- It is intended that this equipment be used with assistance of a health care worker.

SPECIFICATIONS

GENERAL

Health o meter's Pro Plus™ Electronic Scales Models 1100KL, 2650KL and 2700KL use highly sophisticated microprocessor technology. Each precision instrument is designed to provide accurate, reliable and repeatable weight measurements and features that make the weighing process simple, fast and convenient.

The scale is set up to use motion sensing weighing technology, to determine the actual weight of a moving patient. The scale may be changed to measure live weight see page 18 for instructions on changing the scale setting.

The weight can be displayed in pounds (decimals, fractions of a lb or lb o) or in kilograms. The 1100KL features a wrap around handrail for patient comfort and safety and a 180 degree swivel pivot head for reading from either side of the scale. Also included on the platform scales are two wheels for easy mobility.

The unit can be operated using its AC adapter or by 6 D cell batteries (not included).

SCALE SPECIFICATIONS

Capacity and Resolution	
2650KL & 2700KL	1,000 Lb x 0.2 Lb / ¼ lb / 4 oz (454 Kg x 0.1 Kg)
1100KL	700 Lb x 0.2 Lb(310 Kg x 0.1 Kg) for 1100KL
Power Requirements	Adaptor model ADPT31*(USA-CSA only) 120 VAC-9VDC 60Hz (INCLUDED) or 6 D cell batteries. Adaptor model ADPT30*(IEC)120-240 VAC-9VDC 50-60Hz (NOT INCLUDED)
Environmental	Operating temperatures: 50°F to 95°F (10°C to 35°C) Storage temperatures: 30°F to 125°F (0°C to 50°C) Humidity: 85%

SPECIFICATIONS

SCALE SPECIFICATIONS (continued)

Physical Dimensions Model 1100KL	Platform size Length: 18" (46 cm) Width: 22" (56 cm) Height: 2 ¹ / ₃ " (6cm)	Product size and weight Length: 29 ¹ / ₄ " (74cm) Width: 31" (78.7 cm) Height: 49 ¹ / ₂ " (126 cm) Weight: 53 Lb (24 Kg)
Physical Dimensions Model 2650KL	Platform size Length: 36" (91.6 cm) Width: 32 ¹ / ₂ " (82 cm) Height: 2 ¹ / ₂ " (6.2cm)	Product size and weight Length: 41 ³ / ₅ " (106 cm) Width: 56 ¹ / ₄ " (143 cm) Height: 3 ¹ / ₈ " (8 cm) Weight: 80.5 Lb (36.5 Kg)
Physical Dimensions Model 2700KL	Platform size Length: 44" (111 cm) Width: 42" (107 cm) Height: 2 ¹ / ₂ " (6.2cm)	Product size and weight Length: 51 ¹ / ₈ " (130 cm) Width: 69" (175 cm) Height: 3 ¹ / ₂ " (9 cm) Weight: 179 Lb (81 Kg)

Use only Healthometer Professional power supply, Adaptor model ADPT31*(USA-CSA only) 120 VAC-9VDC 60Hz (INCLUDED) or 6D cell batteries. Adaptor model ADPT30*(IEC)120-240 VAC-9VDC 50-60Hz (NOT INCLUDED)

SET UP

This scale is shipped with the Menu Lock function enabled. The Menu Lock function disables certain buttons on the scale's keypad, thus preventing unauthorized users from making changes to your scale settings. This Lock can be bypassed temporarily to allow you to customize your scale's functionality. Please refer to page 12 for instructions on how to bypass the Menu Lock.

1. Remove protective plastic film from keypad and display.
2. Place batteries in the battery holder (see Replacing Batteries).
3. Plug the scale's AC adapter into the power source.
4. Make sure there is no object on the weighing platform
 - Press the ON OFF button to turn the scale on. The display will show Health o Meter Pro Plus and then 000Lb00o .^(a)
 - Place a weight not to exceed the capacity on the scale. The display should read WEI HIN until the weight calculation is complete and the weight is displayed.
 - Press the K LB button to select the weight mode (Lb Kg).^(b)
 - Press the REWEI H button the scale should perform the weighing process again.
 - Remove the weight from the scale, the scale will return to zero and the display will read ERO on the left upper side of the screen along with 000Lb00o .

NOTE : If the set up procedure failed, refer to the troubleshooting instructions. If the problem is not corrected, refer to qualified service personnel.

^(a) To adjust the display backlight and or contrast, please refer to page 17.

^(b) To change the display mode in pounds to fractions or decimals, please refer to page 12.

SET UP

Replacing Batteries

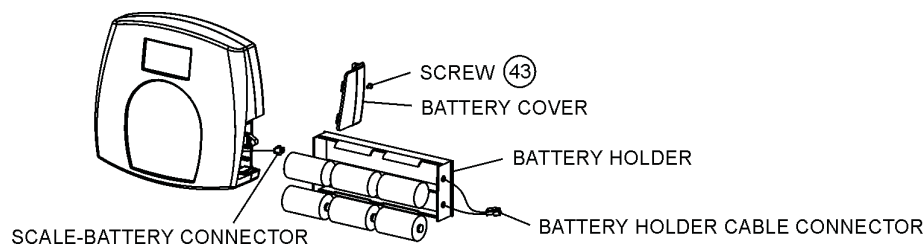


Figure 4. Replacing Batteries

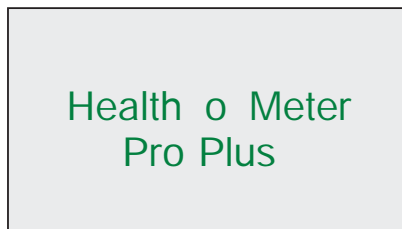
1. Unplug the scale.
2. Remove the battery cover from the display assembly.
3. Disconnect battery holder cable connector from the scale battery connector.
4. Carefully remove the battery holder by sliding it out the display assembly.
- Replace the batteries with new ones.
- Carefully position the battery holder into the display assembly.
- Connect the battery holder cable connector to the scale battery connector.
- Attach the battery cover to the display assembly and install the screw.

We recommend the use of EVEREADY Energizer e2™ batteries

OPERATION INSTRUCTIONS

WEIGHING A PATIENT

1. Make sure there is no object on the weighing platform
2. Press the ON OFF button to turn the scale on.



3. Wait until 000Lb000 and ERO on the left side of the display appear.
4. Ask the patient to step on the scale. The display should read WEI HIN until the weight calculation is complete and the weight is displayed.
- If you wish to reweigh without asking the patient to step off and to step on the scale again, press the REWEI H button.
- Ask the patient to step off the scale.

NOTE: The scale will always default to the settings and units last used.

WARNING: If the scale will not be used for a prolonged period of time, remove batteries to avoid a safety hazard.

TARE FUNCTION

When using the scale the weight of an object such as a wheelchair or shoes accompanying the patient can be subtracted from the total weight to determine the weight of the patient alone. The Tare function automatically performs this subtraction, avoiding the need for manual calculations. Pro Plus scales allow tare weight to be entered automatically or manually.

OPERATION INSTRUCTIONS

MANUAL TARE

1. Make sure there is no object on the weighing platform.
2. Press the ON/OFF button to turn the scale on.
3. Wait until "000LB00oz" and "ZERO" on the left side of the display appear.
4. Press the TARE button (9). The user will be prompted to enter the TARE value.
5. Use the keypad to enter the weight of the object desired to be tared (i.e. wheelchair) and press ENTER.
6. The value entered will be displayed as a negative value.
7. Place the patient and the tared object on the scale. The scale will automatically deduct the entered tared weight from the gross weight of the patient and tared object.
8. The weight of the patient will appear on the scale.
9. The tared value is stored in memory until changed or cleared.
10. To remove the Tare, press the TARE button (9) again. The word "TARE" will disappear from the display and the tare value will be deleted from memory. The scale will resume normal operation.

FOR ADDITIONAL INSTRUCTIONS ON AUTOMATICALLY OR MANUALLY ENTERING THE TARE VALUE PLEASE REFER TO PAGE 13.

CALCULATING BMI

1. Complete steps 1 to 4 above for "Weighing a Patient".
2. Press the BMI button (2).
3. The scale will prompt you to enter the patient's height. Use the keypad to enter the height.

Note: When weighing in lbs., height is entered in 1/4" increments. For the fractional portion of the height, press 1 for 1/4", press 2 for 1/2" and 3 for 3/4". When weighing in kg the height is entered in 1cm increments.

4. Press ENTER.
5. Display will show the patient's BMI.
6. Press ENTER to return to normal weighing operation.

Note: The scale will not calculate a BMI for a patient 24 pounds (12 kg) or less. If a height is not entered within 30 seconds of pressing the BMI key, the scale will return to normal operation















2650KL & 2700KL



1100KL

OPERATION INSTRUCTIONS

ITEM	DESCRIPTION	FUNCTION
	POWER	Turns scale ON and OFF.
	ZERO	Zeros the scale prior to weighing.
	HOLD/RELEASE	Holds the value of the weighed object on the display until the button is pressed again to clear the value. Also used to scroll down in the menu.
	REWEIGH	Allows repeated weighing of the patient without stepping off the scale.
	KG/LB	Toggles between kilograms or pounds. Also used to scroll up in the menu. To activate or deactivate the KG or LB only (Lockout) mode you must press and hold the KG/LB button for 13 seconds. See NOTE Below.
	MENU	Press and hold for 5 seconds to enter the menu of the scale.
	BMI	Prompts entry of data to calculate the patient's Body Mass Index (BMI).
	PRINT	Prints patient's data (if printer is connected to the scale).
	ID	Prompts entry of patient's identification number (ID). This ID will be stored with all the weighing made until it is cleared or a different ID is stored.
	TARE	Prompts entry of TARE value that will be deducted from the weight on the platform. Also releases tare weight (returns display to zero).
	EXIT	Reverts back one step when in the menu and data entry modes.
	ENTER	Used to enter commands and values into the scale.

NOTE: The Lockout mode prevents the scale from changing between KG and LB until it is deactivated

MENU

In the menu screen the user can set preferences and/or instruct the scale how to handle stored data. The menu can be navigated using the up and down keys (▲▼) or by entering the associated menu position number with the keypad. The menu has a “roll-over” way of working: when the user scrolls to the bottom of the menu and presses the down button, it will return to the top of the menu.

MENULOCK

OPERATION INSTRUCTIONS

NOTE: The default mode of the scale is set so the menu option is locked out. If the menu button is pushed before activating the menu option, "MenuLock" will show on the display. To temporarily reactivate the use of the MENU key, press and hold the MENU key for 5 seconds. During the menu access delay, the menu will display "MenuLock". After 5 seconds, the menu will show on the display and you may begin navigating through the menu.

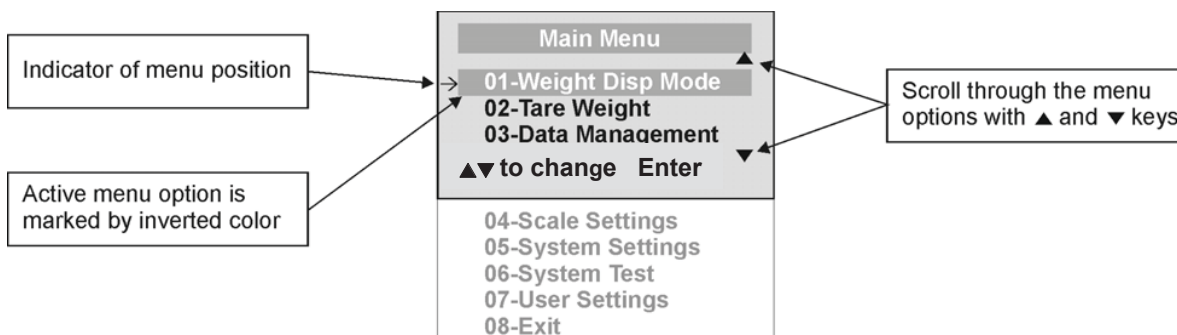


Figure 7. Main Menu

01 WEIGHT DISPLAY MODE (only applies to pound values, NOT the metric values)

Before making changes to this scale setting, please refer to "Menu" instructions above to temporarily activate the Menu key.

The user can set the screen display value in either fraction of pound ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ or $\frac{3}{4}$ lb), in pounds and ounces (resolution of 4 ounces) or in decimals (resolution of 0.2 lb). When kg is selected as the units of use, these settings have no effect. The mode that is selected is used through all the screens.

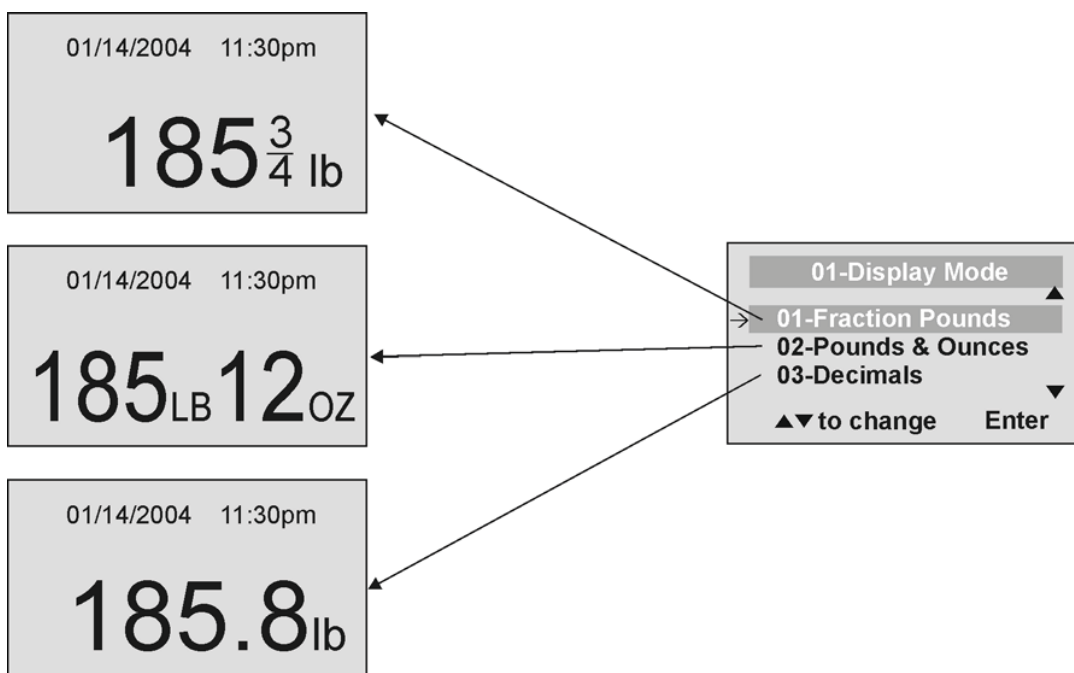


Figure 8. Weight Display Mode

OPERATION INSTRUCTIONS

02 TARE WEIGHT

Before making changes to this scale setting, please refer to page 12 “Menu” to temporarily activate the Menu key.

NOTE: Due to the scale’s sensitivity, we recommend using the REWEIGH function prior to setting the TARE weight, in order to eliminate any operator interference with the item to be tared out.

There are two ways to manually enter a tare weight (such as the weight of a wheelchair, shoes, etc): Press MENU (1), hold for 5 seconds and select option 02-Tare Weight or press TARE (9). If there is no weight on the scale platform (value displayed is zero and there is no tare) and the user presses the TARE button (9), the Tare Weight window appears and prompts the user to enter the TARE value and to press ENTER. NOTE: The tare weight must be entered using the following increments: 4oz, 0.2lb, ¼ lb. The value entered will display in minus (-). After the TARE has been entered, the scale goes back to normal operation. This TARE value is stored in memory until changed or cleared. If the tare weight is not entered in 30 seconds the scale will revert back to normal operation, and the Menu Lock will be activated.

Important: The TARE weight cannot exceed 250lb (2650KL & 2700KL)
The TARE weight cannot exceed 150lb (1100KL)

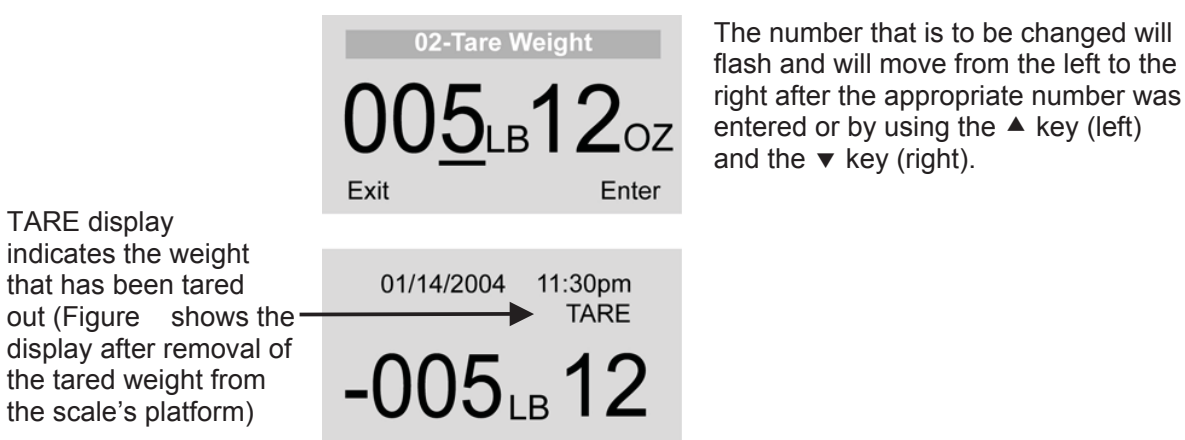


Figure 9. Tare Weight

Automatic Tare

The user can set a tare weight by pressing the TARE button (9) while there is a weight on the scale platform. The display will come to zero and the word “TARE” will be displayed to indicate there is a tare value in the memory (as displayed in Figure above).

Removing the Tare

Additional pressing of the TARE button will delete the tare value from memory, TARE will disappear from the display and the scale will resume normal operation.

OPERATION INSTRUCTIONS

03 DATA MANAGEMENT

Before making changes to this scale setting, please refer to page 12 “Menu” to temporarily activate the Menu key.

The scale manages patient data including patient ID, weight, height, tare and BMI. The value is stored in memory or transferred to PC. This function is performed by opening a new data file.

OPENING A NEW DATA FILE:

1. Press the ID button (7).
2. Using the keypad, type in the identification number.
3. Press ENTER.

This scale will also calculate Body Mass Index (BMI).

CALCULATING BMI:

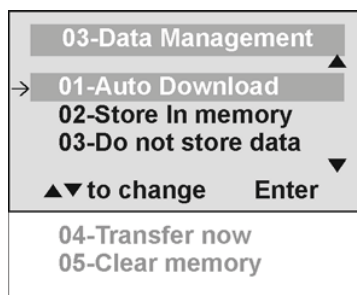
1. Place the patient on the scale platform.
2. Press the BMI button (2).
3. The scale will prompt you to enter the patient's height. Use the keypad to enter the height.

Note: When weighing in lbs., height is entered in ¼" increments. For the fractional portion of the height, press 1 for ¼", press 2 for ½" and 3 for ¾". When weighing in kg the height is entered in 1cm increments.


4. Press ENTER.
5. Display will show the patient's BMI.
6. Press ENTER to return to normal weighing operation.

Note: The scale will not calculate a BMI for a patient 24 pounds (12 kg) or less. If a height is not entered within 30 seconds of pressing the BMI key, the scale will return to normal operation

The scale offers you two options to manage your information: to transfer/download the values or to store them. The first option automatically downloads (transfers) the value to your PC. The second option stores the value in memory. The maximum capacity of the scale is 270 files of different data.




01 Auto Download

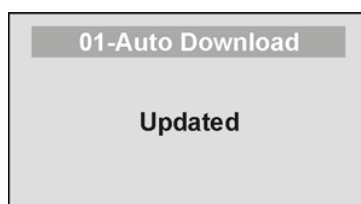


Automatic Download is the default option and will transfer the value to the PC as soon as the patient steps off the scale or when the user presses the HOLD/RELEASE button if it was kept in “HOLD”. If no PC is connected, the value is not transferred and not stored and will be lost after the load is removed from the scale.

OPERATION INSTRUCTIONS

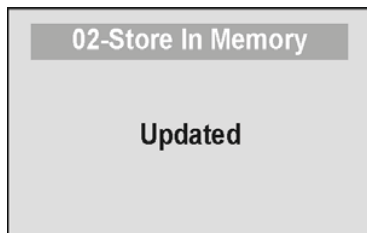
02 Store in memory



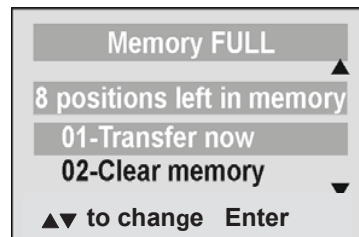The value is stored in memory for later download to PC. If the memory is close to full the user will be warned and given the option to transfer all values to the PC or to clear the memory of all values.




03 Do not store data

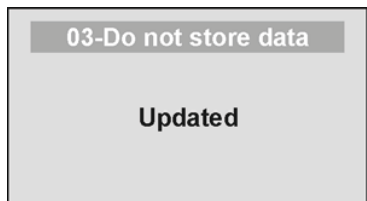


No data will be stored

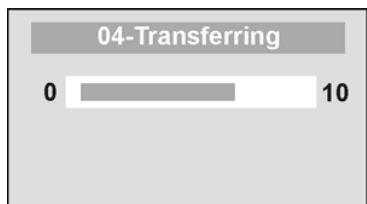04 Transfer now



All the values stored in memory are transferred to the PC and the scale memory is cleared of all values. If the transfer was unsuccessful, the values are kept in memory until successfully transferred or cleared.

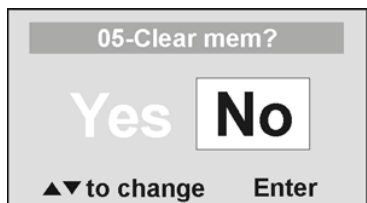05 Clear memory




If select YES, then press Enter, All the values stored in memory will be cleared. If select NO, then it will return to the last menu.


OPERATION INSTRUCTIONS

04 SCALE SETTINGS

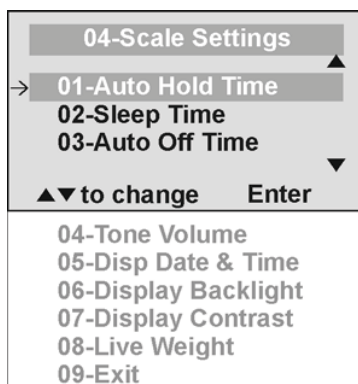Before making changes to this scale setting, please refer to page 12 “Menu” to temporarily activate the Menu key.




01 Auto Hold Time

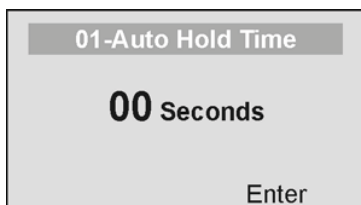

The user can determine how long to display the weight reading once it is determined, regardless of whether the patient remains on the platform. The scale defaults to no Auto Hold Time. The maximum setting is 20 seconds Hold Time.

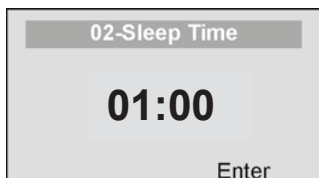
02 Sleep Time



The user can set the time elapsed before the scale goes into the sleep mode. The default is 1 minute. When the scale goes into sleep mode, STANDBY is displayed on the screen. The maximum setting is 10 minutes Sleep Time.

STANDBY

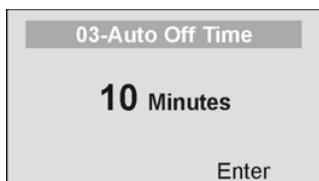03 Auto Off Time



The user can determine how long the scale will operate before turning off automatically due to inactivity. Default time is 10 minutes. If the value is set to zero, the auto off function is disabled. The maximum setting is 60 minutes Auto Off Time.

OPERATION INSTRUCTIONS

04 Tone Volume

04-Tone Volume

→ 01-Keypad Tone

02-Stable Weight

03-Alarm Tone

▲▼ to change Enter

There is an option to adjust the beeping tone of the scale. This tone should sound when the scale has determined the weight on the platform, when a key is pressed, after the scale is turned on, at the end of self-test, or in the case of fault or warning.

Set Volume

0 10

▲▼ to change Enter

Use the ▲ and ▼ keys on the keypad to adjust the volume. Whenever the user presses the key to change a volume, a beep will sound to indicate the set volume level.

05 Display Date and Time

05-Disp Date & Time

Yes No

▲▼ to change Enter

This option will turn on or turn off the date and time display.

01/14/2004 11:30pm

ZERO

000LB00OZ

ZERO

000LB00OZ

06 Display Backlight

06-Partial display only

0 10

▲▼ to change Enter

The user can set the brightness of the backlight.

07 Display Contrast

07-Display Contrast

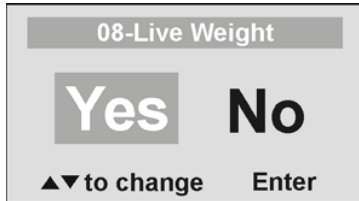
0 10

▲▼ to change Enter

The user can set the contrast of the LCD.

OPERATION INSTRUCTIONS

08 Live Weight




By selecting “Yes” the user can set the Live Weight mode to deactivate the motion-sensing mode. In the Live Weight mode the weight displayed will fluctuate with the patient’s movement; the scale will not lock on to the weight as is the case in the motion-sensing mode.

Press the REWEIGH button to operate the motion-sensing mode and to determine the correct weight on the screen. To revert back to motion-sensing mode, change the Live Weight setting to “NO”.


05 SYSTEM SETTINGS

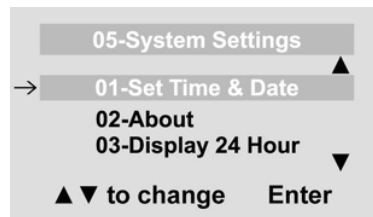Before making changes to this scale setting, please refer to page 12 “Menu” to temporarily activate the Menu key.




01 Set Time & Date

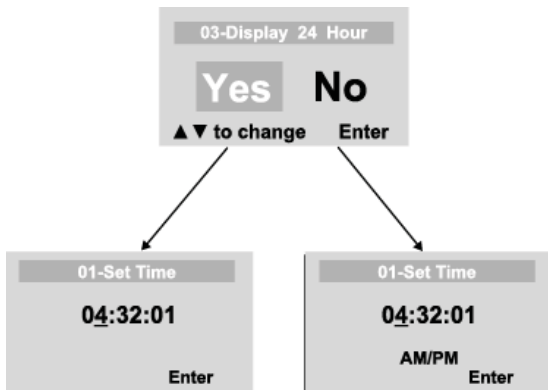The user can set the time and date using the keypad.



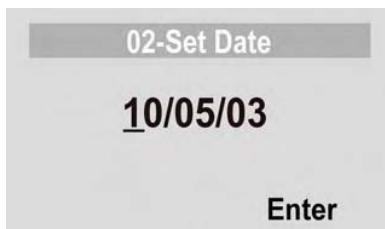To set the time move between hours, minutes and seconds using the up and down keys ▲ ▼ and enter the values on the keypad. If set Display 24 Hours to YES, do not set AM/PM (AM/PM) If set Display 24 Hours to NO, then will jump to the AM/PM line press the ENTER button once.



Set the date using the up and down keys ▲ ▼ and enter the values on the keypad.

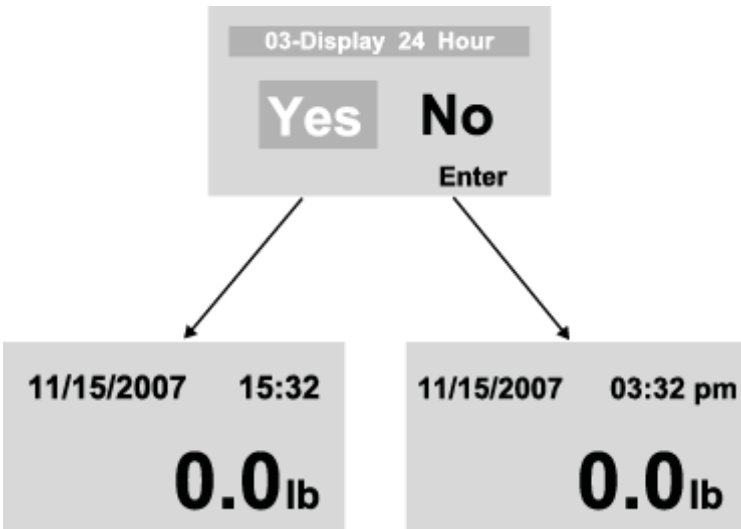
OPERATION INSTRUCTIONS

02 About

MCU Ver : Rev . 1.0
LC Ver : Rev . 1.0
Last Update : 08/12/07
Exit Enter

This screen displays the software version of the scale.


03 Display 24 Hour




There are two options display the time: 12 hour (AM/PM) or 24 hour.

06 SYSTEM TEST

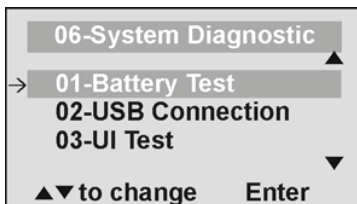Before making changes to this scale setting, please refer to page 6 “Menu” to temporarily activate the Menu key.



01 Battery Test

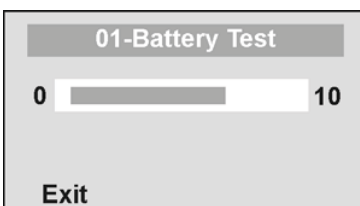

The scale will display the estimated amount of battery life remaining until the batteries will have to be replaced.

NOTE: In order to complete the battery test, the scale must be powered by batteries only. Unplug the scale from AC power source prior to battery test.

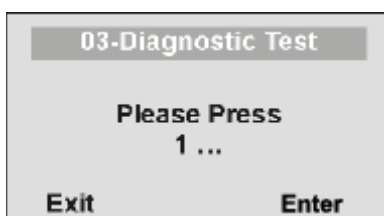
OPERATION INSTRUCTIONS

02 USB Connection




The scale will test the connection to the PC and will display a message "Connection is OK" or "NO Connection".


If "NO Connection" is displayed, check your USB connections on the scale and on your PC and retest the connection. Refer to qualified service personnel if problem persists.



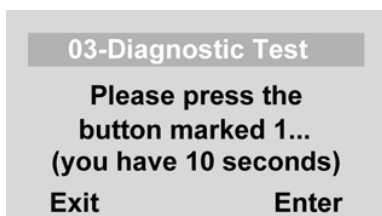The scale has a diagnostic routine where it tests the User Interface (UI) hardware functionality (LCD, keypad). In order to do this the user has to press all the keys according to the messages displayed on the screen.



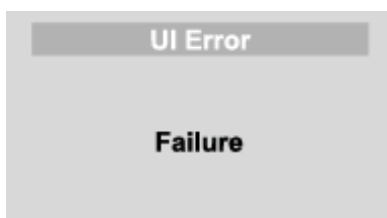
If the requested command was not received or wrong button was pressed, the following message will be displayed.



If after 10 seconds the requested command was not received, the following message will be displayed. If "UI Error Failure" is displayed, refer to qualified service personnel.

07 USER SETTINGS

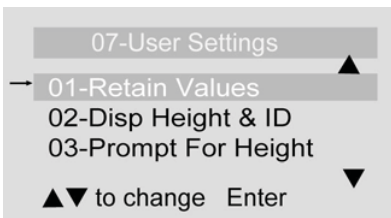Before making changes to this scale setting, please refer to page 12 "Menu" to temporarily activate the Menu key.



04-Prompt For ID
05-Exit

OPERATION INSTRUCTIONS

01 Retain Entered Values

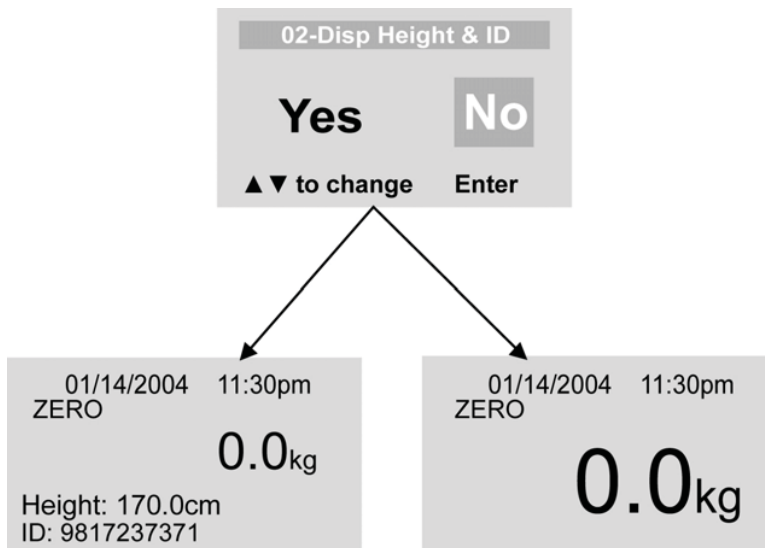
01-Retain Ent Values

Yes No

▲▼ to change Enter

This option allows the user to use the same values for ID, height and TARE between weighing. If this option is disabled, the user has to re-enter these values for each reading. If the values are not entered, only the weight is stored.
NOTE: These values cannot be retained by ID number.

02 Display Height & ID



When the user selects to display the height and ID of the user, it will be displayed at the bottom of the screen. We recommend the use of this function to ensure that the patient's correct ID and height have been entered.

03 Prompt For Height

03-Prompt For Height

Yes No

▲▼ to change Enter

When this option is activated, the user will be asked to enter the patient's height after every weighing. The operator has 30 seconds to enter height.

01/14/2004 11:30pm

153³/₄ lb

Please enter Height:
0ft00 0/0in

▲▼ to change Enter

04 Prompt For ID

04-Prompt For ID

Yes No

▲▼ to change Enter

When this option is activated, the user will be asked to enter the patient's ID number after every weighing. The operator has 30 seconds to enter ID.

01/14/2004 11:30pm

153³/₄ lb

Please enter ID:
2345872336

▲▼ to change Enter

MAINTENANCE

GENERAL

This section provides instructions for maintenance, cleaning, troubleshooting and operator replaceable parts for Pro Plus™ Electronic Scales Models 1100KL, 2650KL and 2700KL. Maintenance operations other than those described in this section should be performed by qualified service personnel.

MAINTENANCE

Before first use and after periods of non-use, check the scale for proper operation and function. If the scale does not operate correctly, refer to qualified service personnel.

1. Check overall appearance of the total scale for any obvious damage, wear and tear.
2. Inspect AC adapter for cord cracking or fraying or for broken or bent prongs.

CLEANING

Proper care and cleaning is essential to ensure a long life of accurate and effective operation.

Disconnect the scale from the AC power source.

1. Clean all external surfaces with a clean damp cloth or tissue. Anti-bacterial soap and water solution may be used. Dry with a clean soft cloth.
2. Do not immerse the scale into cleaning or other liquid solution.
3. Do not use Isopropyl Alcohol or other solutions to clean the display surface.

TROUBLESHOOTING

Refer to the following instructions to check and correct any failure before contacting service personnel.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Scale does not turn on	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dead Battery 2. Faulty electrical outlet 3. Bad power supply 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace batteries 2. Use a different outlet 3. Replace adapter
Questionable weight or the scale does not zero	<ol style="list-style-type: none"> 1. External object interfering with the scale 2. The display did not show "0.0" before weighing 3. Scale is not placed on a level floor 4. Scale is out of calibration 5. Improper Tare 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove interfering object from the scale 2. Ask the patient to get off the scale, zero the scale and begin weighing process again 3. Place the scale on a level floor and begin weighing process again 4. Check weight with known weight value 5. Place the item to be tared on the scale. Press REWEIGH. Once the weight of the item is displayed, press TARE. Place the patient and the tared item back on the scale. Press REWEIGH again.
Weighing is performed but the display shows "weigh" and "reweigh" every few seconds; the weighing process takes too long and no weight is displayed.	The patient is not standing still	Ask the patient to stand still or you can change to live weight setting
The display shows "Overload" message	The load on the scale exceeds the capacity	Remove the excess weight and use the scale according to its limits
The display shows "LOW BAT" message	The batteries are empty	Replace batteries according to instructions
The display shows "Sensor ERR " message	There is a problem with one or more load cells or the load cell cable is disconnected.	Check load cell cable connection at the display and platform assembly ports. If the problem is not corrected, refer to qualified service personnel to replace the defective load cell.
Display shows "MenuLock" when MENU button is pressed	The MENU key has not been activated	Press and hold the MENU button for 5 seconds to activate

CALIBRATION PATH

Your Pro Plus scale has been calibrated at the factory and does not require re-calibration prior to use.

Calibration is performed using kg or lb, according to the units of measure used upon entering into the calibration path.


01-Cal With One Point process below:

Operator Action	Display
1. Make sure the scale is turned off, then press and hold the HOLD/RELEASE button while you press the On/OFF button.	Enter load weight: 450.0LB(or 200.0KG)
2. Input the weight , then press ENTER button.	Enter load weight: 450.0LB(or 200.0KG)
3. Make sure there is nothing on the platform, then press ENTER button.	Zero calibration Please clear the scale
4. Wait for about 1-3 second, Zero calibration finished.	Zero calibration Please wait
5. Put the weight on the platform, then press ENTER button.	Weight calibration Put: XXX.X
6. It will calibrate after 1-3 seconds.	Weight calibration Please wait
7. If success, display shows Factor OK!. If failed, display Factor Fail.	Factor Update Factor OK! (or Factor Fail!)
8. If successful the process will clear the weight.	Rebooting... Please wait
9. The scale will reboot after wait for about 1-2 seconds.	Health o Meter Pro-Plus
10. Please wait until the scale resumes normal operation. Remove the weight from the platform.	Health o Meter Pro-Plus

EXPLODED DIAGRAMS

The 1100KL, 2650KL and 2700KL ProPlus™ scales all share the same display module. Please refer to page 20 for display module parts for these scales. Exploded diagrams and parts lists are included for the remainder of the scale parts on the pages following the display module parts list.

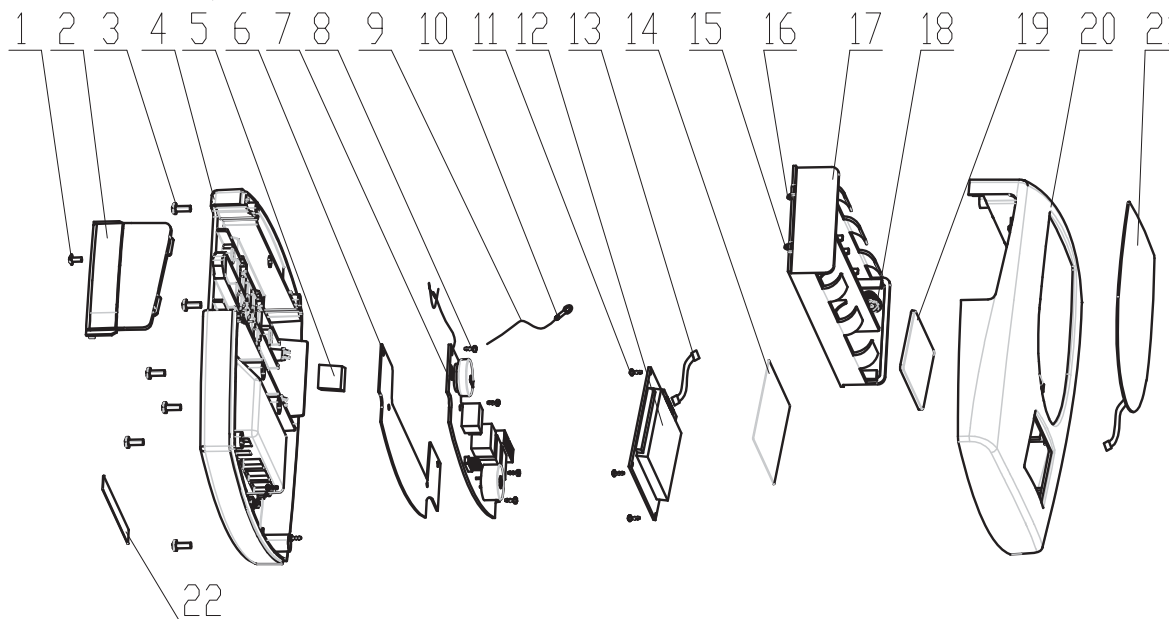
MODELS 1100KL, 2650KL & 2700KL EXPLODED VIEW OF DISPLAY MODULE



DISPLAY MODULE PARTS LIST – ALL MODELS

Key no.	Part no.	Description	Qty.	Remark
1		SCREW M3X6	2	
2	B3822801-0	BATTERY COVER, ABS (757)	1	
3		SCREW M3.5X8	6	
4		HEAD BACK, ABS+Q235A	1	
5		SINGLE-FACE GLUE FOAM	1	
6		STATIC PROTECTION MEMBRANE	1	
7		PCB ASM	1	1000LB for 2650KL & 1100KL
7		PCB ASM	1	700LB for 1100KL
8		SCREW, $\Phi 3 \times 6$	4	
9		WIRE	1	
10		TERMINAL	1	
11		SCREW, $\Phi 2.3 \times 8$	4	
12		LCD PCB ASM	1	
13		WIRE	1	
14		STATIC PROTECTION MEMBRANE	1	
15		NEGATIVE PLATE	1	
16		POSITIVE PLATE	1	
17	B2033801-0	BATTERY HOLDER, PP	1	
18		POSITIVE AND NEGATIVE PLATE	1	
19		LENS, TRANSPARENT PC	1	
20		HEAD FRONT, ABS+Q235-A	1	
21	B411192	BUTTON LABEL PCB	1	1000LB for 2650KL & 1100KL
21	B3513101-0	BUTTON LABEL PCB	1	700LB for 1100KL
22	B3245801-0	INPUT/OUTPUT POSTS LABEL	1	1100KL

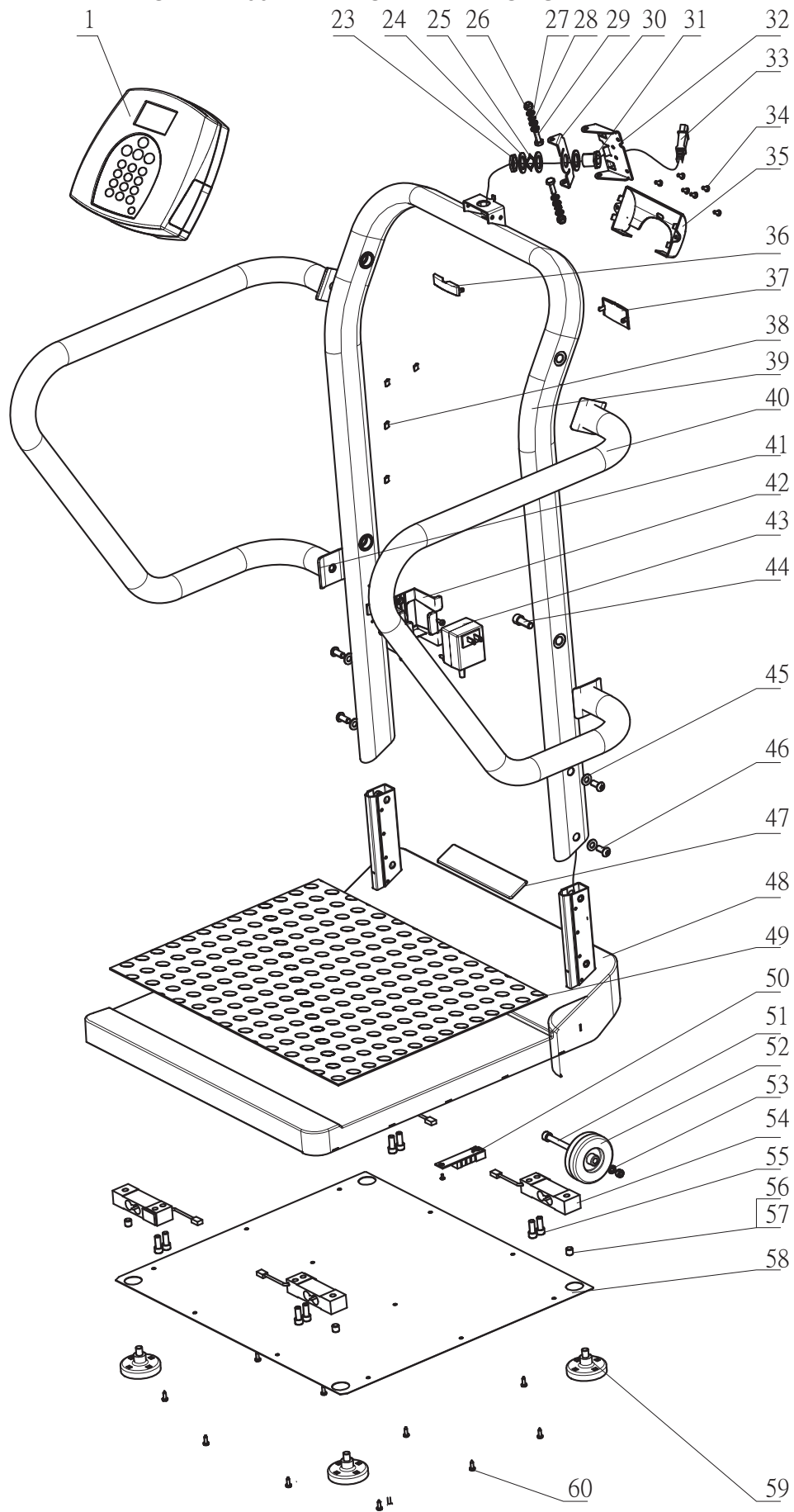
MODEL 1100KL EXPLODED VIEW OF SCALE



MO EL 1100 L PARTS LIST

Key no.	Part no.	Description	Qty.	Remark
1	B1109401-0	DISPLAY ASSEMBLY	1	
23	B2266901	PIPE NUT, 3/4"	1	
24	B2266901	PLASTIC WASHER, Φ19	3	
25	B2266901	WAVE SPRING WASHER, Φ19	1	
26	B2266901	SELF- LOCK NUT,M6	4	
27	B2266901	PLASTIC WASHER, Φ6	6	
28	B2266901	WAVE SPRING WASHER, Φ6	2	
29	B2266901	BOLT, M6X20	2	
30	B2266901	SWIVEL PLATE 1#	1	
31	B2266901	PIPE BOLT, 3/4"	1	
32	B2266901	SWIVEL PLATE 2#	1	
33	B2033701-0	NET WIRE	1	
34		SCREW, M4X10	6	
35	B3822701-0	CABLE COVER	1	
36	B3822601-0	BACK COVER	1	
37	B3822501-0	FRONT COVER	1	
38	B401305	WIRE CLIP	4	
39		CURVED PIPE 1#	1	
40		CURVED PIPE 2#	1	
41		CURVED PIPE 3#	1	
42	B3817001-0	ADAPTER BRACKET	1	
43	ADPT31	ADAPTER	1	
44		BOLT, M10X40	4	
45		WASHER, Φ8	4	
46		BOLT, M8X19mm	4	
47		TRADEMARK	1	
48	B3822001-0	BOTTOM CASE ASM	1	
49		FOOT MAT	1	
50	B2138901-0	SENSOR PCB	1	
51	B2267201-0	LOCATION BOLT	2	
52	B2267201-0	WHEEL	2	
53	B2267201-0	WASHER, Φ6	4	
54	B1304202-0	SENSOR	4	
55		BOLT, 5/16"X19mm	8	
56		SCREW,M10X10	4	
57		GLUE, LOCTITE 248	0.2g	
58	B3822401-01	BOTTOM COVER	1	
59	B2267201-0	FEET	4	
60		SCREW, Φ4.2X13	14	

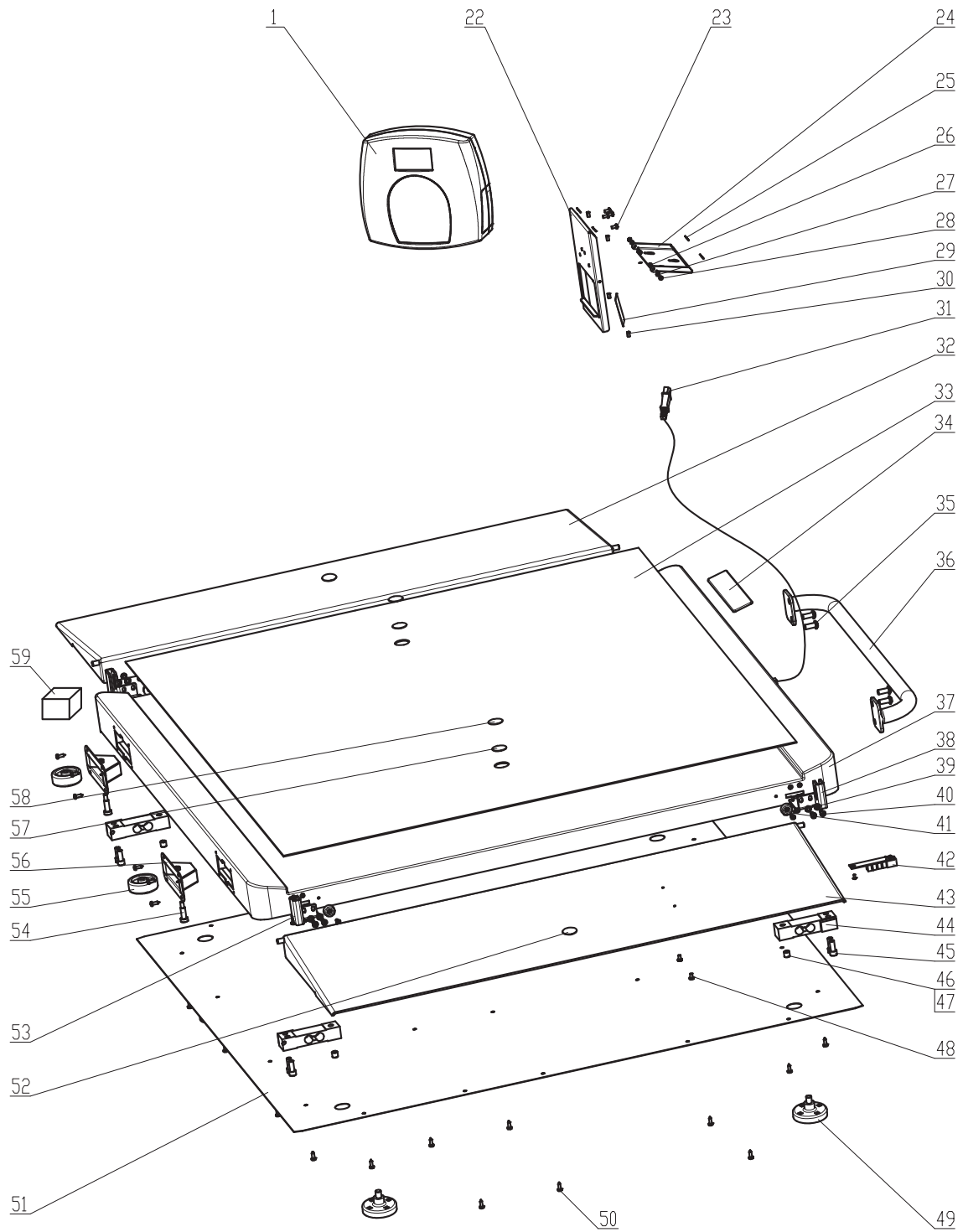
MODEL 2650KL EXPLODED VIEW OF SCALE



MO EL 2650 L PARTS LIST

Key No.	Part No.	Description	Qty.	remark
1	B1109401-0	DISPLAY ASSEMBLY	1	
22		HEAD CLIP 1# 1.5mmT SPCC	1	
23	B2266901	SCREW,M4X10	4	
24		HEAD CLIP 2# 1.5mmT SPCC	1	
25		MAT	4	
26		SELF-LOCK NUT,M3	2	
27		PLASTIC WASHER,Φ3	2	
28		SCREW,M3X10	2	
29	B3245801-0	INPUT/OUTPUT POSTS LABEL	1	
30		ANTI-SLIP BLOCK	4	
31		WIRE	1	
32	B3827401-0	RAMP 1#	1	
33	B3827101-0	FOOT MAT	1	
34		TRADEMARK	1	
35		SCREW,M8X19	4	
36		PIPE	1	
37		BOTTOM CASE ASM	1	
38	B3823601-0	RAMP CLIP 1#	2	
39		WASHER,Φ5	16	
40		SCREW,M5X10	16	
41	B401308	RAMP MAT	4	
42	B2138901-0	LOAD CELL PCB	1	
43	B3827401-0	RAMP 2#	1	
44	B1304202-0	SENSOR	4	
45		BOLT,5/16"X19mm	8	
46		SCREW,M10X10	4	
47		SCREW GLUE,LOCTITE 248	0.2g	
48	B3822001-0	SCREW,M4X6	2	
49	B2266701-0	FEET	4	
50		SCREW,Φ4.2X13	26	
51		BOTTOM COVER,0.6mmT SPCC	1	
52	B401327	FASTNER (MALE)	2	
53	B3823701-0	RAMP CLIP 2#	2	
54		BOLT	2	
55		WHEEL	2	
56		WHEEL CLIP ASM	2	
57		DOUBLE-FACE GLUE FOAM	2	
58	B401328	FASTNER (FEMALE)	2	
59	ADPT31	ADAPTER,9VDC 200mA	1	

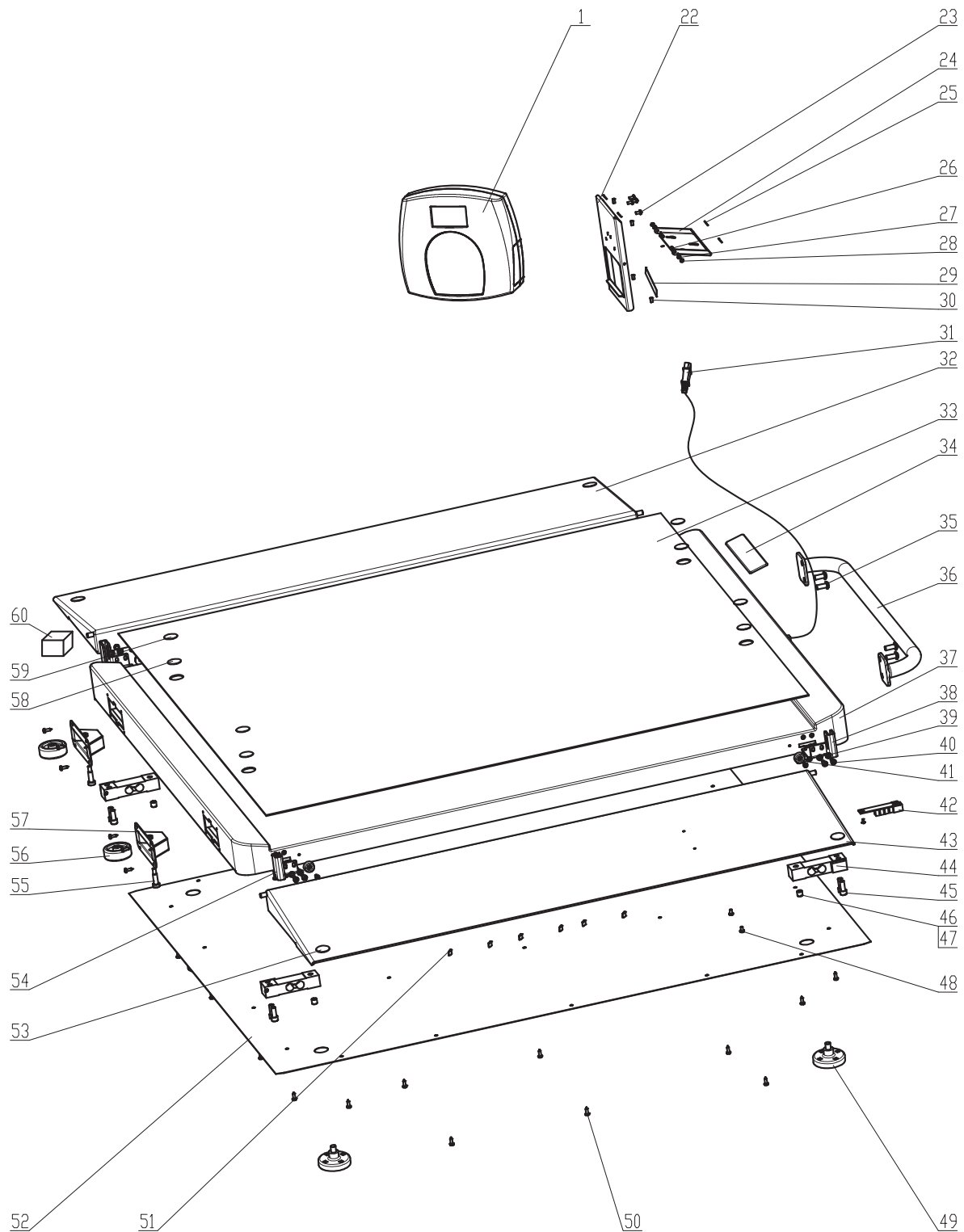MODEL 2700KL EXPLODED VIEW OF SCALE
View of Scale in Folded Position



MO EL 2700 L PARTS LIST

Key No.	Part No.	Description	Qty.	remark
1	B1109401-0	DISPLAY ASSEMBLY	1	
22		HEAD CLIP 1# 1.5mmT SPCC	1	
23	B2266901	SCREW M4X10	4	
24		HEAD CLIP 2# 1.5mmT SPCC	1	
25		MAT	4	
26		SELF-LOCK NUT,M3	2	
27		PLASTIC WASHER,Φ3	2	
28		SCREW,M3X10	2	
29	B3245801-0	INPUT/OUTPUT POSTS LABEL	1	
30		ANTI-SLIP BLOCK	4	
31		WIRE	1	
32		RAMP 1#	1	
33		FOOT MAT	1	
34		TRADEMARK	1	
35		SCREW,M8X19	4	
36		PIPE	1	
37		BOTTOM CASE ASM	1	
38	B3823601-0	RAMP CLIP 1#	2	
39		WASHER,Φ5	16	
40		SCREW,M5X10	16	
41	B401308	RAMP MAT	4	
42	B2138901-0	LOAD CELL PCB	1	
43 (32)		RAMP 2#	1	
44	B1304202-0	SENSOR	4	
45		BOLT,5/16"X19mm	8	
46		SCREW,M10X10	4	
47		SCREW GLUE,LOCTITE 248	0.2g	
48	B3822001-0	SCREW,M4X6	2	
49	B2266701-0	FEET	4	
50		SCREW,Φ4.2X13	36	
51		WIRE CLIP	6	
52		BOTTOM COVER	1	
53	B401327	FASTNER (MALE)	2	
54	B3823701-0	RAMP CLIP 2#	2	
55		BOLT	2	
56		WHEEL	2	
57		WHEEL CLIP ASM	2	
58		DOUBLE-FACE GLUE FOAM	2	
59	B401328	FASTNER (FEMALE)	2	
60	ADPT31	ADAPTER,9VDC 200mA	1	

PC Communication Protocol

This scale uses an escape protocol for communicating with a PC and over the USB and serial port 2 (serial port 1 : connecting to the printer) . In an Escape protocol, the escape (<esc> or ASCII 27) is used to indicate that there is a command, and not data, following.

Two scenarios have been defined: Scale initiated communication and PC initiated communication. The following is a table of what can be sent across the communications line.

Scale Initiated	ESC Value	PC Initiated	ESC Value
Send Single reading	R	Update Firmware	U
Send continuous reading	R	Request current values/settings	Q
Send bulk readings	R	Diagnostics	A
Send Diagnostics	A	Send scale control messages	C
		Request stored data	R
		Set stored data	S
		Delete stored data	X

The following is a complete list of ESC characters that will be used:

Name	ESC character	ESC value with parameters	Description
Reading	R	R	This will tell the PC that the scale is sending a reading. Immediately following this will be the value that is sent (i.e. <ESC>R<ESC>I1234567890<ESC>W200.00<ESC>Nm<ESC>...<ESC>E
ID	I	Iccccccc cc ¹	This is the patient ID. (10 chars)
Weight	W	Wnnn.nn	This is the patient weight (i.e. W200.05 means 200.5)
Height	H	Hnnn.nn	This is the patient height
TARE	T	Tnnn.nn	This is the TARE weight that the scale is taring out
BMI	B	Bnnn.n	This is the patient's BMI
End Of Packet(EOP)	E	E	This indicates that the end of the command/datapacket has been reached
Units	N	Nc	This indicates in which unit the values have been taken (m=metric, c=constititutional)
Power Status	J	J	Requests the power status of the scale. The response to this will be either a <ESC>O<ESC>E or <ESC>F<ESC>E or <ESC>L<ESC>E
On	O	O	When prompted for a power status, this will indicate that the scale is turned on
Off	F	F	When prompted for a power status, this will indicate that the scale is turned off (or is in low power/sleep mode) When in Low Power mode, the scale will return L
DateTime	D	Dnnnnnnn nnnnn	This is a time and date string (MMDDYYYYhhmmss)
Update	U	Uc	This command has a parameter c, which will help doing the update of the firmware. First of all the PC will initiate the update by sending an Ur (Request for update). The scale will reply with Uc (Clear to send) or Ue (error, don't send). Then the scale will send U127K or U127B (the length of the data that is following in K bytes or B ytes) and send the data.
Request	Q	Qccc	This is a request to receive scale global values such as brightness of LCD, auto hold time, keypad beep volume, etc. (See Table A) (i.e. <ESC>QAHT will return the Auto Hold Time of 10 seconds like this: <ESC>PAHT=10<ESC>E)

¹ We used descriptive characters to show the type of the parameters. These are: c=Character, n=Numeric. The number of parameters indicates the set number of placeholders for these characters and numbers (i.e. Zccc indicates that a value containing 3 characters will be given.)

Name	ESC character	ESC value with parameters	Description
Response	P	P ccc=ccc cccc	This will be the scales response to the request mentioned above
Diagnostics(1)	A	A ccc	This is the request for a diagnostic test on certain parts of the scale (such as battery life, loadcells, keypad, LCD etc.). (See Table B)
Diagnostics(2)	Z	Z ccc	This will be the response of the diagnostics done on the scale. Values will include error codes to indicate what is wrong with the scale, or all zeros to indicate that all is well.
Control (set a value)	C	C ccc=ccc ccc	his is to set the value of the scale's global settings such as backlight, auto hold time, keypad beep volume etc. (See Table A) (i.e. <ESC>CAHT=20<ESC>E will set the Auto Hold Time to 20 seconds)
Get subject record data and readings	G	G	This will return all the information from both the subject record data as well as the readings stored in the readings table.
Set subject record data	S	S	This will set the subject record data for a specific patient. Immediately following this will be the value that is set. (i.e. <ESC>S<ESC>I1234<ESC>T200<ESC>Um<ESC>E will set the TARE for patient ID1234 to 200kg)
Clear readings	X	X	This will clear all the values stored in the readings table on the scale. Only the subject record data will not be deleted.
Clear subject record data	Y	Y	This will clear the subject record data for a specific patient. The patient ID will follow the Y immediately (<ESC>Icccccccccc). If no ID is given, ALL the data will be cleared.

Name of Control	Identifier	Unit
Auto Hold Time	AHT	nn (Seconds)
Auto Off Time	AOT	nn (Minutes)
Sleep Time	STM	nn (Seconds)
Keypad Volume	VKE	nn (01..10)
Stable weight Volume	VSW	nn (01..10)
Alarm Volume	VAL	nn (01..10)
Display of Date/Time	DAT	nn (01 or 10)
Backlight	BAC	nn (01..10)
Contrast	CON	nn (01..10)
Weight Display Mode (fractions(f), decimals(d) or Pounds and ounces (p))	WDM	c (f,d,p)
Tare Weight	TAR	nnn.nn (Kg)
Unit Of Measure (Metric or constitutional)	UOM	c (m or c)
Positions left in RAM	RAM	nnnn (0..max)

Table A - Scale Global Values List and Identifiers

Name of component to test	Identifier	Error Code
Load Cell A	LCA	E3A
Load Cell B	LCB	E3B
Load Cell C	LCC	E3C
Load Cell D	LCD	E3D
Battery	BAT	E4L(Bat Low, but still usable) or E4U (Bat Low and Unstable)
PC Communication (USB)	PCC	E05
Write to RAM	WRM	E08
Read from RAM	RRM	E09

Table B - Components to test

The different tables on the scale:

There will be two data tables on the scale. The first will store the subject record data (patient related data that does not change) and the second will store the data recorded during the readings made.

Subject record data

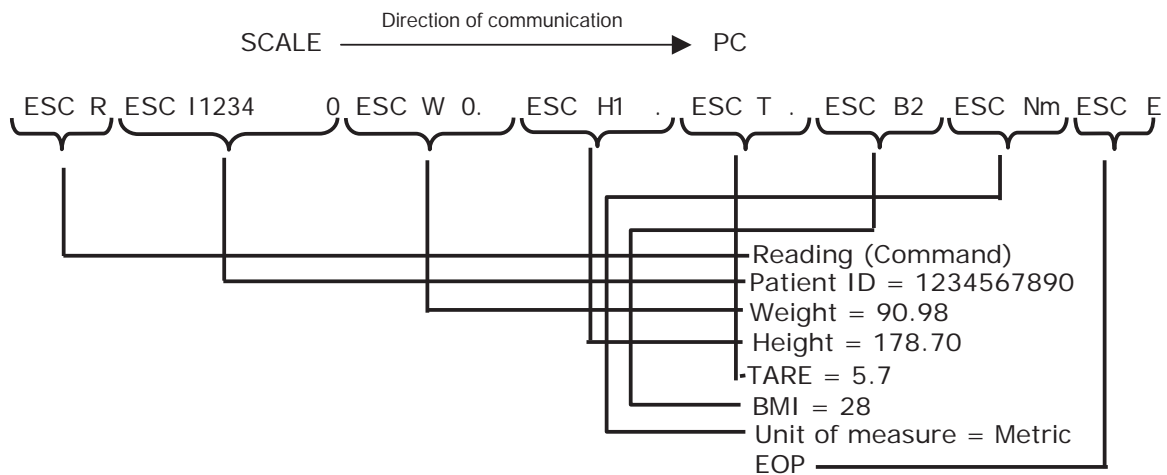
Fields: ID, TARE, HEI HT

Readings

Fields: Index (referring to the ID from the Subject Record Table), Weight, Date time


Sample and explanation of esc protocol

1. When the scale measures the weight of a patient and sends this over the communications line to the PC, it will look like this:




2. When the PC requests the values of the stored weighings, it will look like this:

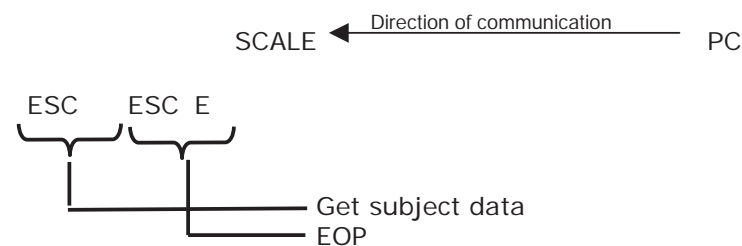First the PC will ask the scale to send the data. We do this with the Get Subject Record Data and Readings command.



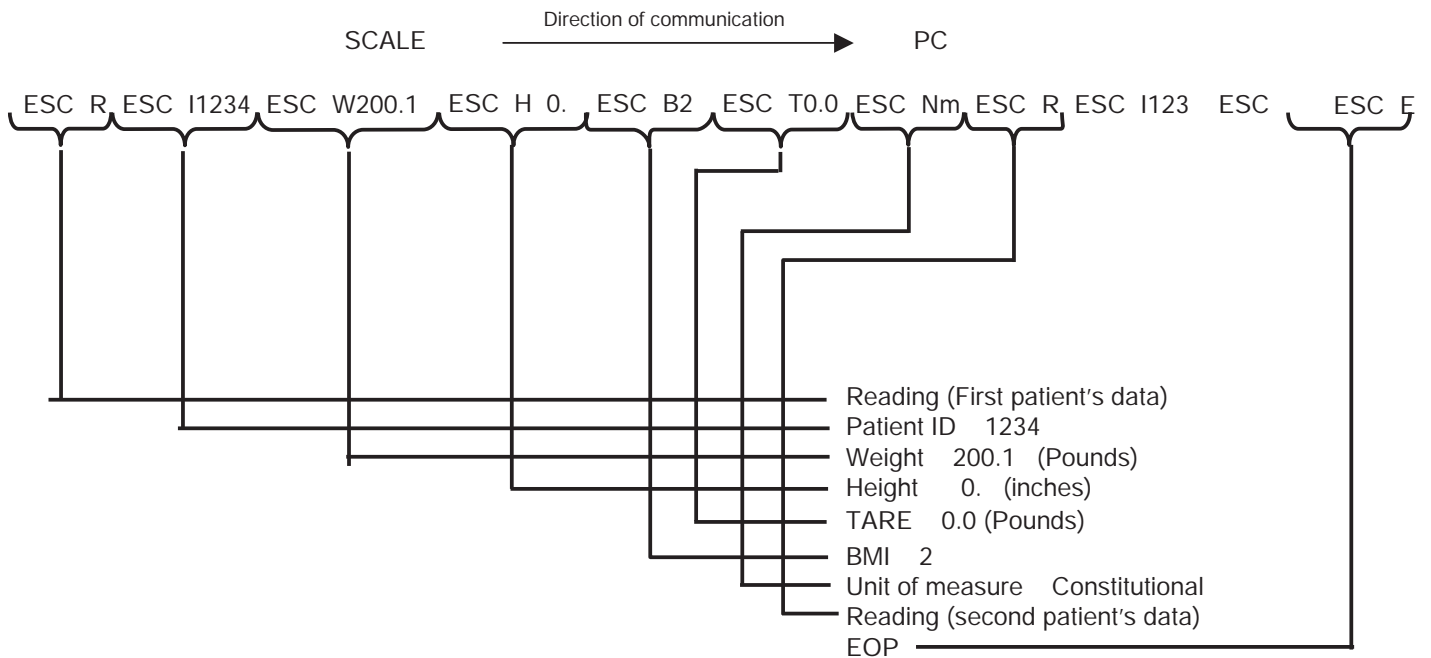Then the scale will reply with the stored data.





If no data is stored on the scale, it will simply send

ESC R ESC E

Pin Configuration for ProPlus Cables

The pins of the two connectors are connected as follows:

R 4	Function	DB
4	T	2
2	R	3
1	ND	

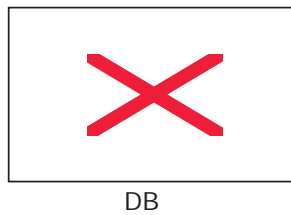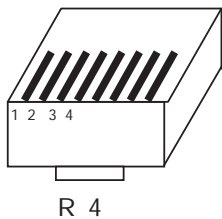


NOTE: Connect the printer cable to the PORT 2 of the scale

Transmission Parameters:NOTE

Baud Rate	00
Parity	None
Databits	bits
Stopbits	1bit
Startbits	1 bit
Hardware handshake	None

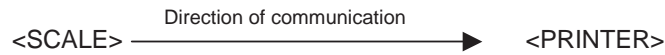Printer Parameters



Printer model: CT-S280

Working voltage: DC8.5V-2.5A


This scale is featured with printing function by connecting the printer XXXXX:

1. Connect the printer cable to the PORT 1 of the scale
2. Turn on the printer power
3. Make sure there is no object on the weighing platform
4. Turn on the scale and wait till display show ZERO and 0.0 before step on the scale
5. Step on the scale and weigh
6. Input the data of patient ID, height, weight of wheelchair and etc.
7. Press 3 (PRINT) key , printer will print out the patient's ID, weight, height, BMI and etc.




Pin Configuration for ProPlus PrinterCables

RJ45	Function	DB9
6	TX	3
7	GND	2

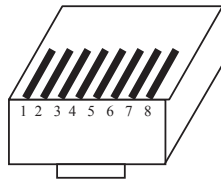

RJ45

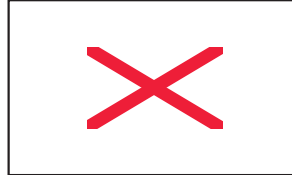

DB9

Content from printer as below:

1. ID
2. Weight
3. Height
4. BMI
5. Tare Weight

NOTE: Make sure the printer prior for the scale to print it normal

NONE: Connect the printer cable to the PORT 1 of the scale

WARRANTY

LIMITED WARRANTY

What does the Warranty Cover?

Pelstar LLC scales are warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of three (3) years. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and properly packed to Pelstar. See "To Get Warranty Service" below for instructions. If manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, customers' sole remedy will be repair or replacement of scale at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All parts including repaired and replaced parts are covered only for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instruction, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service

Make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase.

Call 1(800) 638-3722 or 1 708 377-0600 to receive a return authorization number. Attach proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar LLC
Attention R/A# _____
Repair Department
11800 South Austin Avenue
Unit B
ALSIP, IL 60803. U.S.A

If your scale is not covered by warranty, or has been damaged, an estimate of repair costs or replacement costs will be provided to you for approval prior to servicing or replacing.

Pelstar LLC

11800 South Austin Avenue Unit B ALSIP, IL 60803, U.S.A •1 800 638-3722 or +1 708 377-0600.

www.homsscales.com

Health o meter ProPlus products are manufactured, designed and owned by Pelstar LLC.

Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products Inc., Boca Raton, FL 33431.

© Pelstar LLC 2009

ProPlus® is a registered trademark of Pelstar LLC

Patents: US: D508655, D523367, Europe: 0149984/1-8, China: 200430004551.2

Rev. 20090 13

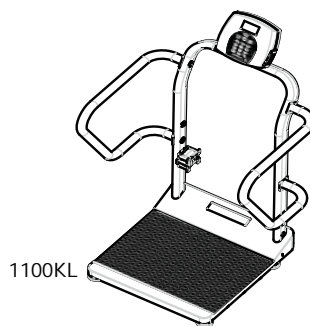
Health o meter®

P r o f e s s i o n a l

ho s ales o

BALANCES ELECTRONIQUES PRO PLUS™

MO ELES L 2 L 2 L




1100KL

BALANCE A MAINS COURANTEST



2 0KL

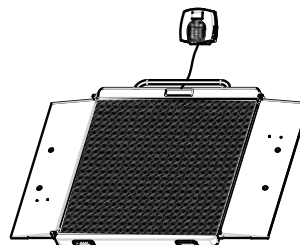BALANCE CHAISE ROULANTE



2 00KL

BALANCE CHAISE ROULANTE PLIABLE

EUILLE ENREGISTRER OTRE PRO UIT POUR BENEFICIER E LA
GARANTIE A L A RESSE WWW OMSCALES COM

Nr de re et: US:

2 Europe:

China: 2

2

GUIDE D'UTILISATION
www.homscales.com

BALANCES ELECTRONIQUES PRO PLUS™
MODELES 1100KL, 2650KL ET 2700KL

TABLE DES MATIERES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE	40
PRECAUTIONS ET PREVENTION	45
SPECIFICATIONS.....	45
INSTALLATION	46
MODE DE FONCTIONNEMENT.....	47
MAINTENANCE	61
LOCALISATION DES PANNES	62
MODE DE CALIBRAGE	63
SCHEMA DU BLOC D'AFFICHAGE EN PIECES DETACHEES	64
LISTE DES PIECES DU BLOC D'AFFICHAGE.....	64
1100 KL SCHEMA DE LA BALANCE EN PIECES DETACHEES	65
1100 KL LISTE DES PIECES	66
2650 KL - SCHEMA DE LA BALANCE EN PIECES DETACHEES	67
2650 KL - LISTE DES PIECES	68
2700KL - SCHEMA DE LA BALANCE EN PIECES DETACHEES	69
2700KL - LISTE DES PIECES.....	70
PROTOCOLE DE COMMUNICATION PC.....	71
GARANTÍA	76

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (1100KL)

Liste des pièces:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| (1) Plate forme principale | (1) Poignée |
| (1) Bloc d'affichage | (4) Support de rampes |
| (4) Pieds en caoutchouc | (1) Support de l'affichage |
| (1) Adaptateur secteur | (4) Vis |
| (1) Câble de connexion du CP | (1) Cordon secteur |
| | (2) Roues |

Outils nécessaires : tournevis à tête Philips (non fournies), clés hexagonales (fournies).

Retirez chaque composant de l'emballage et déballez le matériel en prenant soin de ne pas rayer les diverses parties de l'appareil. Il est recommandé de réaliser le montage à deux personnes.

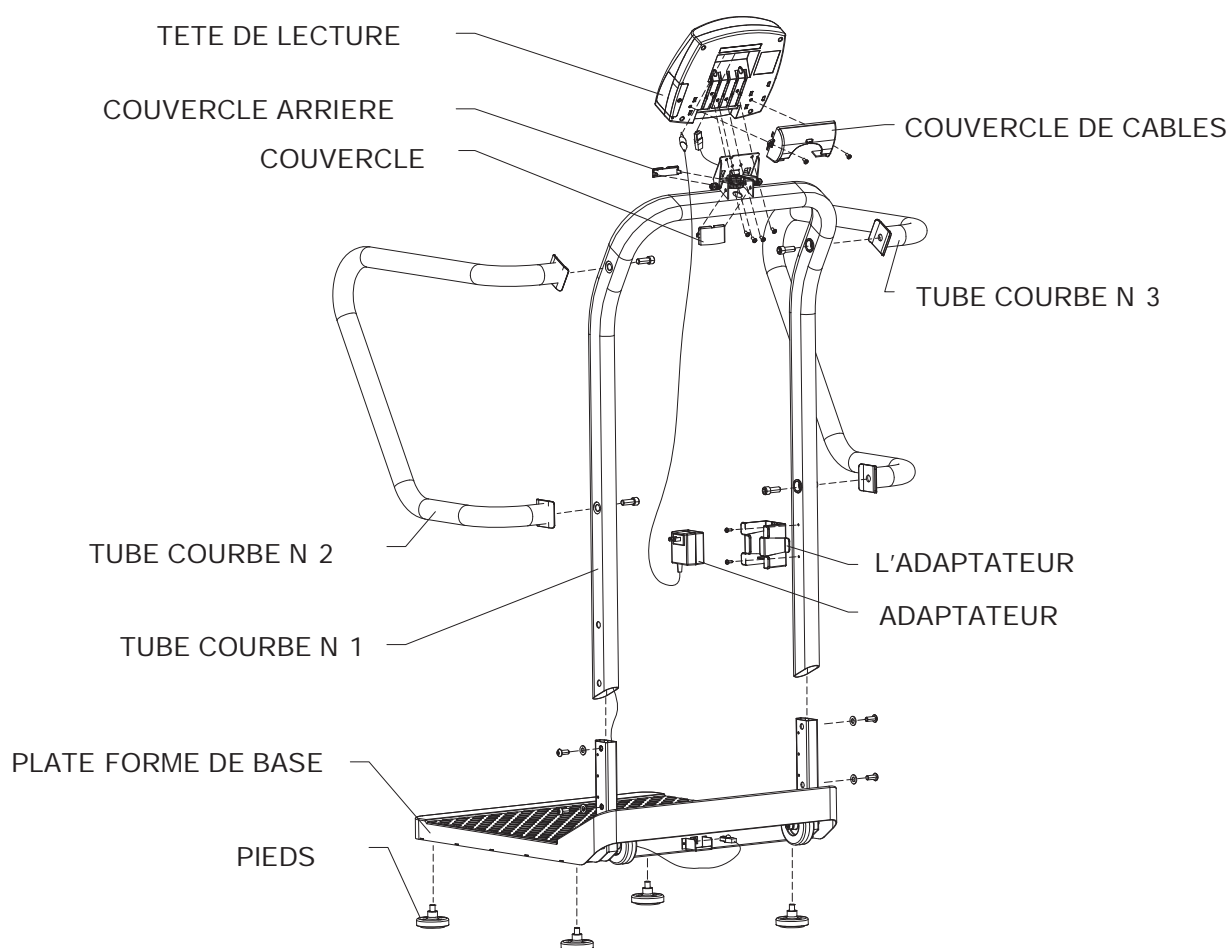


Figure 2

(cf. Liste des pièces, page , pour plus de détails sur les pièces)

Instructions de montage de 1100 KL

1. Retirer la plate-forme de base de l'emballage, puis visser les 4 pieds la partie inférieure de la plate-forme.
2. Placer la plate-forme sur le sol et régler les pieds pour niveler la plate-forme. (NE PAS SERRER TROP FORT).
3. Localiser le câble de la cellule de charge, puis tirer-le par le bas de la barre d'appui centrale. Placer la barre d'appui au-dessus de la plate-forme, puis passer le câble à travers le support de la barre d'appui.
4. Le câble de la cellule de charge doit passer à travers le support de la barre d'appui et ressortir par le bas.
5. Brancher le câble de la cellule de charge dans la plate-forme de base de la balance.
6. Coulisser la barre d'appui centrale sur ses supports, puis insérer les boulons de la barre d'appui (2 de chaque côté de la barre d'appui) SANS SERRER TROP FORT.
7. À l'aide de la plus grande clé hexagonale, fixer les 2 barres d'appui latérales sur la barre d'appui centrale.
8. Brancher la cellule de charge au port de la cellule de charge située à l'arrière du bloc d'affichage, puis coulisser l'ensemble d'affichage sur son support.

Remarque : Faire passer le câble de la cellule de charge dans le canal situé à l'arrière du bloc d'affichage.

9. Insérer 4 vis dans le support du bloc d'affichage.
10. Brancher le cordon d'alimentation au port d'alimentation.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 2 L 2 L

Liste des pièces :

- | | |
|---|----------------------------|
| (1) Ensemble plateforme (avec 2 rampes d'accès) | (1) Poignée |
| (1) Bloc d'affichage | (4) Support de rampes |
| (4) Pieds en caoutchouc | (1) Support de l'affichage |
| (1) Adaptateur secteur | (4) Vis |
| (1) Connexion du capteur de poids | (1) Cordon secteur |
| | (2) Roues |

Outils nécessaires: tournevis à tête Philips (non fournis).

Retirez chaque ensemble du carton et déballez le matériel en prenant soin de ne pas rayer les diverses parties de l'appareil. Il est recommandé de réaliser le montage à deux personnes.

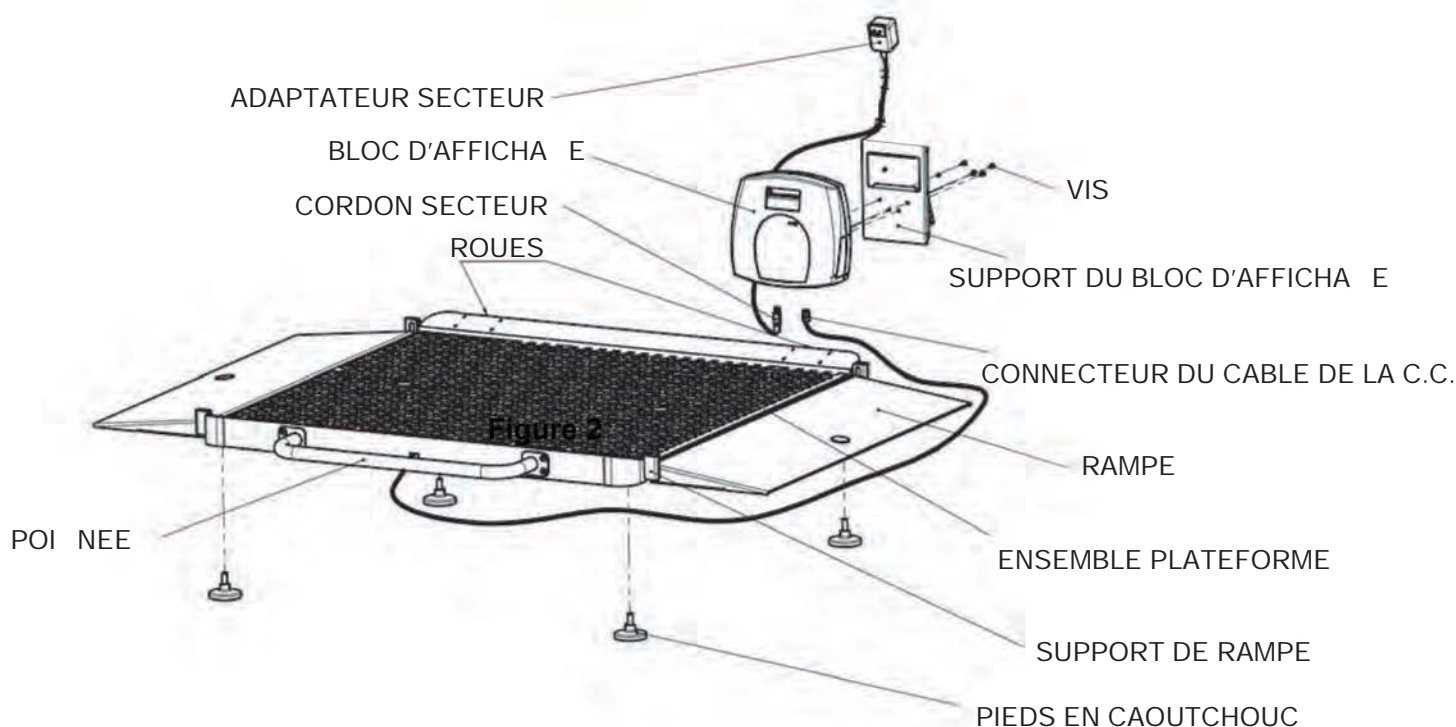


Figure 2
(cf. la liste des pièces, page 10, pour plus de détails sur les pièces)

1. Dépliez la balance pour la mettre en position opérationnelle.
2. Branchez le connecteur du câble de la cellule de charge au port de celle-ci, situé à l'arrière du bloc d'affichage, puis insérez et fixez le câble dans la rainure centrale du bloc.

REMARQUE: Ne fixez pas le câble secteur à ce stade du montage.

3. Branchez le câble de la cellule de charge au bloc d'affichage (Fig.2).

REMARQUE: Le câble de la cellule de charge doit impérativement être maintenu dans la rainure entre le bloc d'affichage et son support.

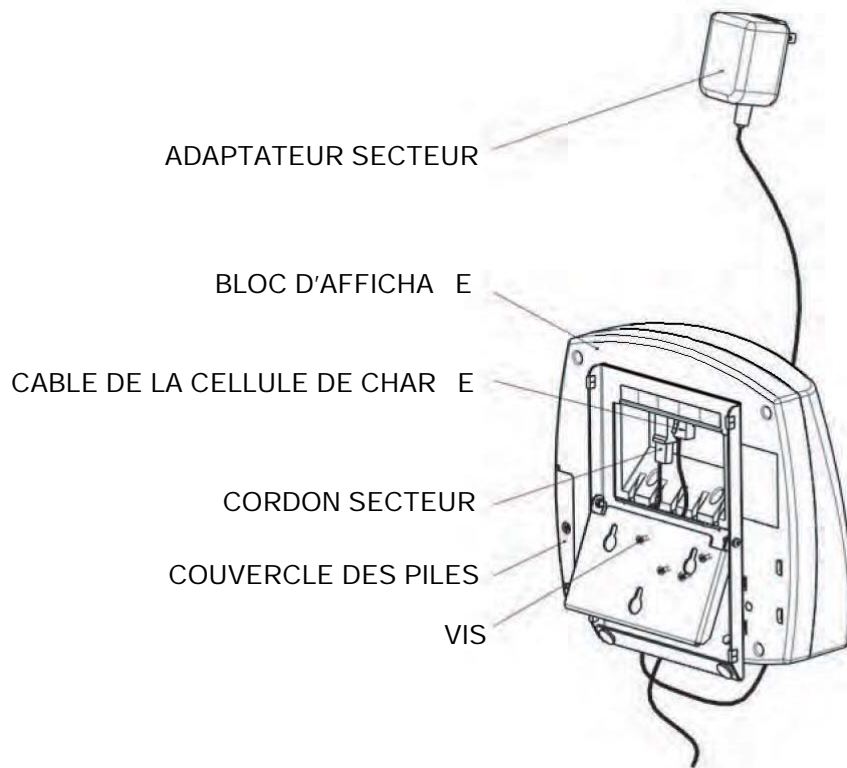


Figure 2

(cf. la liste des pièces en page 4, pour plus de détails sur les pièces)

4. Insérer le câble électrique dans la fente de fixation. Faites correspondre les languettes du couvercle arrière avec les fentes situées à l'arrière du bloc d'affichage. Fixer à l'aide de 4 vis.
- . Faites basculer la balance avec précautions. Visser les 4 pieds en caoutchouc. Ne les serrer pas.
- . Retourner doucement la balance pour la remettre à l'endroit, en position verticale.

ATTENTION : Ne laissez pas retomber la balance sur ses pieds. Le choc pourrait endommager la cellule de charge.

- . Visser et visser les pieds en caoutchouc pour mettre la balance à niveau.


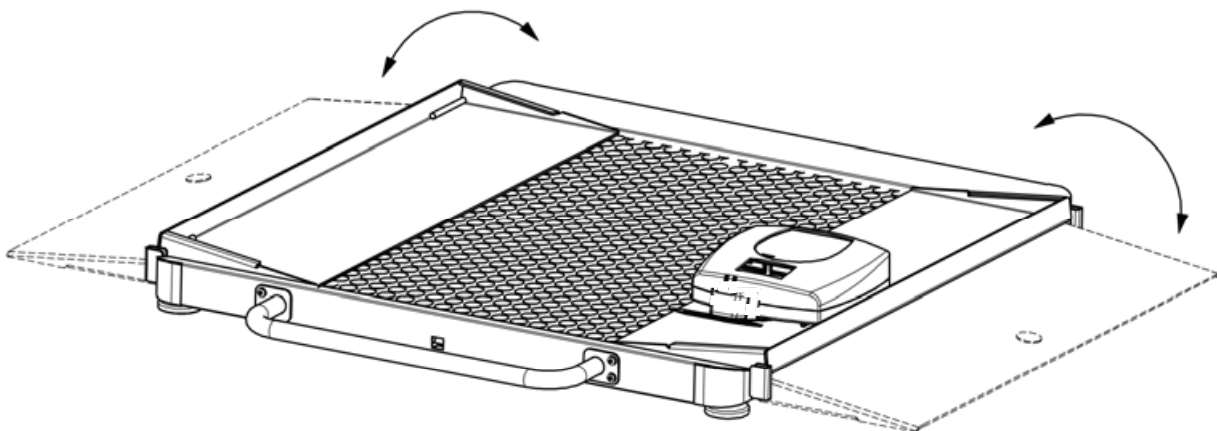


Figure Pliage de la rampe d'accès

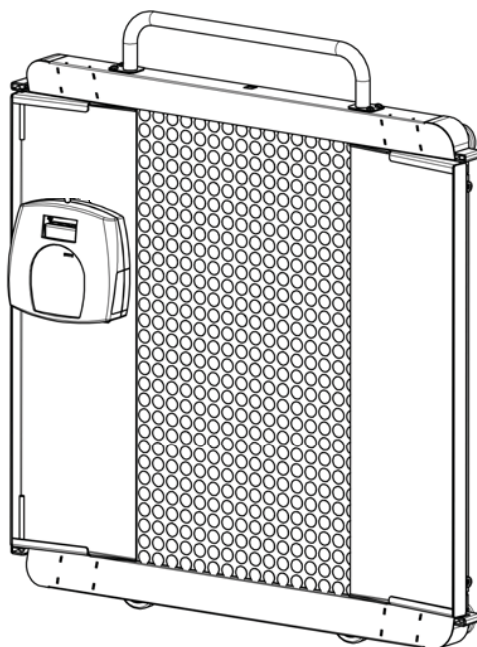1. Les 2 rampes d'accès (gauche et droite) peuvent être repliées sur la plateforme.
2. L'indicateur peut être fixé sur l'une des rampes repliées en couissant les languettes situées à l'arrière de l'indicateur dans les ergots relevés.
3. Basculez la plateforme sur le côté en vous servant de la poignée afin de pouvoir la déplacer sur ses 2 roues (voir fig. 4).



PRECAUTION ET PREVENTION

Pour prévenir toute blessure ou tout dégât accidentels, veuillez vous conformer scrupuleusement aux instructions suivantes:

- Ne déplacez pas la balance électronique lorsque son plateau est chargé.
- Pour obtenir une lecture du poids exacte, placez la balance électronique sur une surface plane et stable.
- Pour obtenir une lecture du poids exacte, vérifiez le bon fonctionnement de la balance en appliquant la procédure décrite dans ce manuel avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser en présence de substances inflammables.
- Le fonctionnement sous d'autres tensions et fréquences que celles spécifiées dans ce manuel est susceptible d'endommager l'appareil.
- Si l'indicateur « LOW BAT » est actif, remplacez les piles ou connectez dès que possible la balance à une source d'alimentation CA de façon à obtenir une lecture du poids exacte.
- Cet appareil est prévu pour être utilisé en présence d'un professionnel de la santé.

SPECIFICATIONS

GENERALITES

Les balances électroniques ProPlus™ de Healthometer, Modèles 1100KL, 2650KL, et 2700KL utilisent une technologie très sophistiquée à microprocesseur. Chaque appareil de précision est conçu pour donner la mesure exacte, fiable et répétable du poids et présente des caractéristiques qui font de la pesée un processus simple, rapide et pratique.

Cette balance est réglée pour mesurer le poids par l'application d'une technologie de pesée spéciale, sensible au mouvement, qui permet de déterminer le poids d'un patient qui n'est pas immobile. Mais elle peut aussi être réglée pour mesurer le poids vif : cf. en page 5 les instructions de modification du réglage.

Le poids peut être lu en livres (nombres décimaux, fractions de lb. ou lb/oz) ou en kilogrammes. La balance est équipée d'une barre d'appui courbe pour assurer le confort et la sécurité du patient, ainsi que d'une tête de lecture sur pivot tournant à 180 degrés et permettant de lire le poids de n'importe quel côté de l'appareil. Pour les balances à plateformes, deux roues sont incluses pour plus de mobilité.

La balance peut être utilisée avec son adaptateur électrique CA ou avec 6 piles "D" (non incluses).

SPECIFICATIONS DES BALANCES ELECTRONIQUES

Capacité et Résolution 2650KL & 27000 KL 1100KL	1.000 Lb x 0,2 Lb / $\frac{1}{4}$ oz (454 kg * 0,1 kg) 700 lb x 0,2 Lb (310 kg x 0,1 kg)
Exigences électriques	Adaptateur modèle ADPT31* (USA-CSA seulement) 120 V c.a. - 9 V c.c. 60Hz (INCLUS) ou piles D. Adaptateur Modèle ADPT30*(IEC) 120-240 V c.a. - 9 V c.c. 50-60Hz (NON INCLUS).
Environnement	Température de fonctionnement : 10°C à 35°C (50°F à 95°F) Température de fonctionnement : 0° à 50° (30°F à 125°F) Humidité : 85%

SPECIFICATIONS

Spécifications de la balance (suite)

Dimensions Modèle 1100KL	Dimensions de la plateforme Longueur : 18" (46 cm) Largeur : 22" (56cm) Hauteur : 2 1/3 " (6cm)	Dimensions et poids du produit Longueur : 29 1/4 " (74 cm) Largeur: 31 " (78,7 cm) Hauteur: 49 1/2 " (126 cm) Poids: 53 lb (24 kg)
Dimensions Modèle 2650KL	Dimensions de la plateforme Longueur : 36" (91,6 cm) Largeur : 32 1/2 " (82, cm) Hauteur : 2 1/2 " (6,2 cm)	Dimensions et poids du produit Longueur : 41 3/5 " (106 cm) Largeur: 41 " (143 cm) Hauteur: 3 1/8 " (8 cm) Poids: 80.5 lb (36.5 kg)
Dimensions Modèle 2700KL	Dimensions de la plateforme Longueur : 44" (111 cm) Largeur : 42" (107 cm) Hauteur : 2 1/2 " (6,2 cm)	Dimensions et poids du produit Longueur : 51 1/4 " (130 cm) Largeur: 69 " (175 cm) Hauteur: 3 1/2 " (9 cm) Poids: 179 lb (81 kg)

Employez seulement l'adaptateur de Healthometer Professional, Adaptateur modèle ADPT31* (USA-CSA seulement) 120 V c.a. - 9 V c.c. 60Hz (INCLUS) ou 6 piles D. Adaptateur modèle ADPT30*(IEC) 120-240 V c.a. - 9 V c.c. 50-60Hz (NON INCLUS).

INSTALLATION

Cette balance est livrée avec la fonction Menu Lock (verrouillage du menu) activée. La fonction Menu Lock désactive certains boutons du clavier de la balance, empêchant ainsi les utilisateurs non autorisés de modifier les réglages de votre balance. Ce verrouillage peut être temporairement contourné pour vous permettre de personnaliser les fonctions de votre balance. Veuillez vous référer à la page 50 pour les instructions expliquant comment contourner Menu Lock.

- Retirez le film protecteur en plastique du clavier et de l'écran.
- Placez les piles dans le logement prévu à cet effet (cf. Remplacement des piles).
- Branchez l'adaptateur CA de la balance à la source d'alimentation électrique.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet sur la plateforme à peser.
 - Appuyez sur la touche de Marche Arrêt (ON OFF) pour allumer l'appareil. L'écran affiche le Health o Meter Pro Plus suivi de 000Lb000. (a)
 - Placez un poids ne dépassant pas la capacité sur la balance. L'écran de visualisation affiche la mention WEI HIN (PESEE) jusqu'à l'écoulement complet du calcul et l'affichage du poids.
 - Appuyez sur la touche K/LB pour sélectionner l'unité de poids de votre choix (Lb Kg). (b)
 - Appuyez sur la touche REWEI H (REPESEE) pour renouveler le processus de pesée.
 - Retirez l'objet du plateau, la balance se remet alors à zéro et l'écran affiche la mention ERO sur le côté supérieur droit, accompagné de 000Lb000.

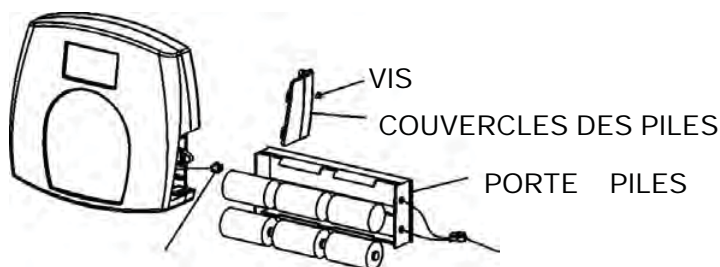
REMARQUE : Si la procédure d'installation échoue, consultez la fiche de localisation des pannes. Si le problème persiste, veuillez avoir recours au technicien qualifié.

(a) Pour régler la luminosité de fond et/ou le contraste de l'écran: cf. page 50.

(b) Pour passer du mode d'affichage en livres aux fractions ou décimales: cf. page 50.

INSTALLATION

Remplacement des piles



CONNECTOR BALANCE PILES

CONNECTEUR DU CABLE DU PORTE PILES

Figure 5. Remplacement des piles

1. Débranchez la balance.
2. Retirez le couvercle du logement des piles du bloc d'affichage.
3. Débranchez le connecteur de câble du logement des piles du connecteur piles balance.
4. Retirez le logement des piles avec précautions en le faisant glisser doucement hors du bloc d'affichage.
- Remplacez les anciennes piles par les nouvelles.
- Remplacez avec précautions le logement des piles dans le bloc d'affichage.
- Branchez le connecteur de câble du logement des piles au connecteur piles balance.
- Fixez le couvercle du logement des piles au bloc d'affichage et placez la vis.

Nous recommandons l'utilisation des piles EVEREADY Energizer e2TM.

MODE DE FONCTIONNEMENT

LE PESAGE D'UN PATIENT

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet sur la plateforme à peser.
2. Appuyez sur l'interrupteur de Marche/ Arrêt (ON/OFF) pour allumer l'appareil.

Health o Meter
Pro-Plus

3. Attendez que les mentions « 000Lb00oz » et « ZERO » apparaissent sur le côté gauche de l'écran numérique.
4. Demandez au patient de monter sur la balance. La mention « WEIGHING » (Pesée) figurera à l'écran jusqu'à ce que s'affiche le poids de la personne.
5. Si vous souhaitez effectuer une nouvelle pesée sans faire descendre et remonter le patient sur la balance, il vous suffit d'appuyer sur la touche de repesée « REWEIGH ».
6. Faites ensuite descendre le patient de la balance.

REMARQUE: La balance reviendra toujours par défaut aux derniers réglages et unités utilisés.

ATTENTION: Si la balance n'est pas utilisée pendant une période prolongée, sortez les batteries de leur compartiment afin d'éviter tout problème de sécurité.

FONCTION DE MESURE DE TARE

Lors de l'utilisation d'une balance, le poids d'un objet tel qu'une chaise roulante ou qu'une paire de chaussures qui accompagnent le patient peut être soustrait au poids total pour déterminer le poids du patient seul. La fonction de mesure de la Tare effectuée automatiquement cette soustraction, permettant ainsi d'éviter les calculs manuels. Les balances Pro Plus permettent d'entrer la tare automatiquement ou manuellement.

MODE DE FONCTIONNEMENT

MESURE MANUELLE DE TARE

1. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun objet sur la plateforme de pesage.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre la balance en marche.
3. Attendez que "000LB00oz" et "ZERO" sur le côté gauche de l'affichage apparaisse.
4. Appuyez sur le bouton TARE (9). L'utilisateur sera invité à entrer la valeur de la TARE.
5. Utilisez le clavier numérique pour entrer le poids de l'objet que vous souhaitez peser (ex. chaise roulante) puis appuyez sur ENTER (ENTREE).
6. La valeur entrée sera affichée comme étant une valeur négative.
7. Placez le patient et l'objet pesé sur la balance. La balance déduira automatiquement la tare du poids brut du patient et de l'objet pesé.
8. Le poids du patient apparaîtra sur la balance.
9. La valeur pesée est stockée dans la mémoire jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou effacée.
10. Pour supprimer la Tare, appuyez à nouveau sur le bouton TARE (9). Le mot "TARE" disparaîtra de l'affichage et la valeur de la tare sera effacée de la mémoire. La balance reprendra son mode d'opérations normal.

POUR OBTENIR DES INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENTRÉE AUTOMATIQUE OU MANUELLE DES VALEURS DE LA TARE VEUILLEZ VOUS REPORTER A LA PAGE 1.

CALCULER L'IMC

1. Complétez les étapes de 1 à 4 comme ci-dessus concernant "Le pesage d'un patient".
2. Appuyez sur le bouton IMC (2).
3. La balance vous invitera à entrer la taille du patient. Utilisez le clavier numérique pour entrer la taille.

Note: Lorsque vous pesez en livres, la taille est entrée en incréments de ¼". Pour obtenir une portion fractionnelle de la taille, appuyez sur 1 pour ¼", appuyez sur 2 pour ½" et 3 pour ¾". Quand vous pesez en kg, la taille est entrée en incréments de 1cm.

4. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE).
5. L'affichage indiquera l'IMC du patient.
6. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour retourner au mode d'opération de pesage normal.















2650KL & 2700KL



1100KL

Figure 6 : Clavier numérique

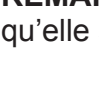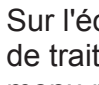MODE DE FONCTIONNEMENT

TOUCHE	DESCRIPTION	FONCTION
	POWER	Allume (ON) et éteint (OFF) l'appareil.
	ZERO	Met la balance à zéro avant la pesée.
	HOLD/RELEASE	Permet de maintenir le poids de l'objet pesé affiché à l'écran. Pour effacer cette valeur, appuyez à nouveau sur cette touche. Permet également de faire défiler le menu vers le bas.
	REWEIGH	Permet de renouveler la pesée du patient sans le faire descendre de la balance.
	KG/LB	Alternance entre kilogrammes et livres. Permet également de faire défiler le menu vers le haut. Pour activer ou désactiver uniquement le mode KG ou LB (verrouillage) vous devez appuyer et maintenir la touche KG/LB enfoncée pendant 13 secondes. Voir la REMARQUE.
	MENU	Appuyez sur ce bouton pendant 10 secondes pour entrer dans le menu de la balance.
	BMI	Guide la saisie de données pour calculer l'Indice de Masse Corporelle (IMC) du patient (BMI = Body Mass Index).
	PRINT	Imprime les données relatives au patient (à condition que l'imprimante soit reliée à la balance).
	ID	Permet d'entrer le numéro d'identification (ID) du patient. Cet ID sera conservé avec toutes les pesées effectuées jusqu'à ce qu'ils soient effacés ou qu'un ID différent soit entré.
	TARE	Guide la saisie de la valeur de la TARE qui sera déduite du poids sur la plateforme. Cette même touche sert à annuler le poids de la tare (remet l'affichage à zéro).
	EXIT	Revient un pas en arrière dans le menu et les modes de saisie de données.
	ENTER	Permet de valider les commandes et d'introduire des données dans la balance.

REMARQUE : Le mode Lockout évite à la balance d'alternier entre KG et LB jusqu'à ce qu'elle soit désactivée.

MENU

Sur l'écran du menu, l'utilisateur peut régler ses préférences et/ou déterminer le mode de traitement des données enregistrées à appliquer par la balance. On peut parcourir le menu par le biais des touches indiquant les flèches ascendante et descendante (▲▼) ou en tapant à l'aide du clavier le numéro de position du menu correspondant. Le menu dispose d'un mode d'opération par « déroulement continu » : une pression sur la flèche descendante lorsque le menu a été déroulé jusqu'au bout ramène celui-ci à son début.

MENULOCK

MODE DE FONCTIONNEMENT

REMARQUE : Le mode par défaut de la balance est réglé de manière que le menu des options soit verrouillé. Si le bouton du menu est pressé avant l'activation du menu des options, MenuLock s'affiche sur l'écran. Pour réactiver temporairement l'utilisation des touches du MENU, pressez et maintenez le bouton MENU pendant 5 secondes. Pendant le temps d'accès au menu, l'écran affichera menuLock. Après cinq secondes, le menu apparaîtra sur l'écran et vous pouvez commencer à naviguer dans le menu.

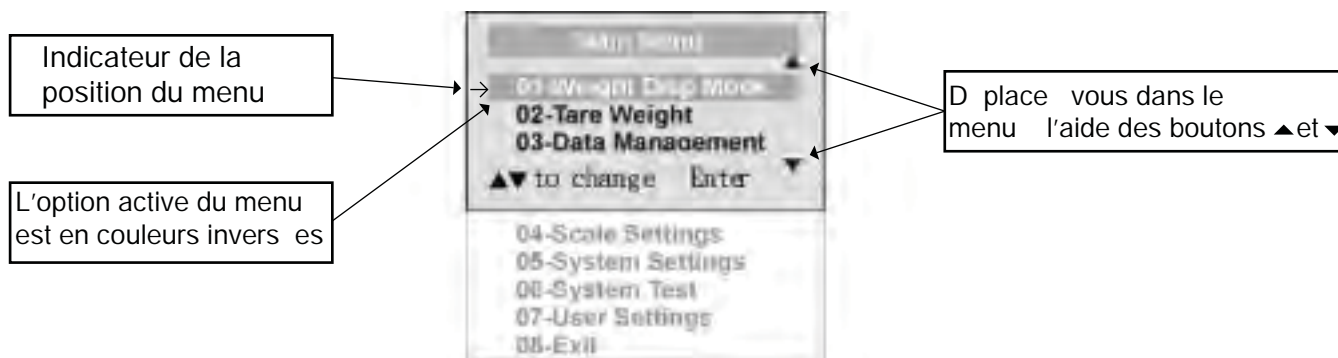


Figure 1. Menu Principal

01. MODE D'AFFICHAGE DU POIDS

(Ne s'applique que pour les valeurs en livres, et NON pour les valeurs en kilogrammes)

Avant d'effectuer des modifications aux réglages de cette balance, veuillez vous référer au Menu ci-dessus afin d'activer temporairement la touche Menu.

L'utilisateur peut régler l'affichage de l'écran soit en fractions de livres (en lb), en livres ou en onces (résolution de 4 onces) ou en décimales (résolution de 0.2 lb). Lorsque les kilogrammes (K) sont utilisés comme unité de mesure, ces réglages sont sans effets. Le mode sélectionné est utilisé pour tous les écrans.

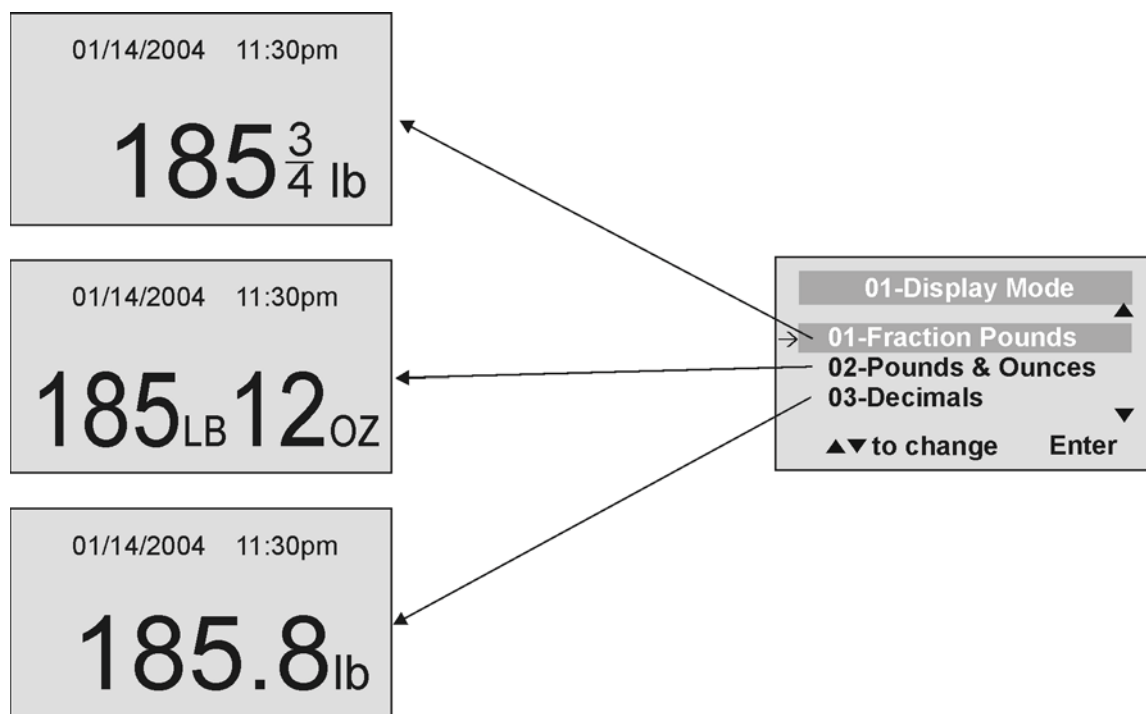


Figure 2. Mode d'affichage du poids

MODE DE FONCTIONNEMENT

02 POIDS DE LA TARE

Avant de modifier les réglages de cette balance, veuillez vous référer au «Menu » de la page 50 afin d'activer temporairement la touche Menu.

REMARQUE: Etant donné le degré de sensibilité de la balance, nous recommandons d'utiliser fonction de repesée (REWEIGH) avant de régler le poids de la TARE, afin toute interférence éventuelle de l'opérateur avec l'objet à tarer.

Il existe deux manières d'introduire manuellement le poids de la tare (par ex. le poids d'un fauteuil roulant, de chaussures, etc.) : appuyez sur MENU (1), maintenez pendant 5 secondes et sélectionnez l'option 02-«Tare Weight » ou appuyez sur TARE (9). En l'absence d'objet sur la plateforme (la valeur affichée est zéro, il n'y a pas de tare) et si l'utilisateur appuie sur la touche de la TARE (9), la fenêtre du Poids de la Tare s'ouvre et le guide pour introduire et valider la valeur de la TARE. REMARQUE : le poids de la tare est introduit par paliers de : 4oz, 0.2lb, 1/4lb. La valeur introduite apparaît avec le signe moins (-). Ensuite, la balance revient en position normale. Cette valeur de TARE est mémorisée jusqu'au prochain changement ou effacement. Si le poids à tarer n'est pas entré en dedans de 30 secondes, la balance retournera à l'opération initiale et le MenuLock sera activé.

Important : Le poids de la TARE ne peut pas dépasser 250 lb (2650KL & 2700KL).
Le poids de la TARE ne peut pas dépasser 150 lb (1100KL).

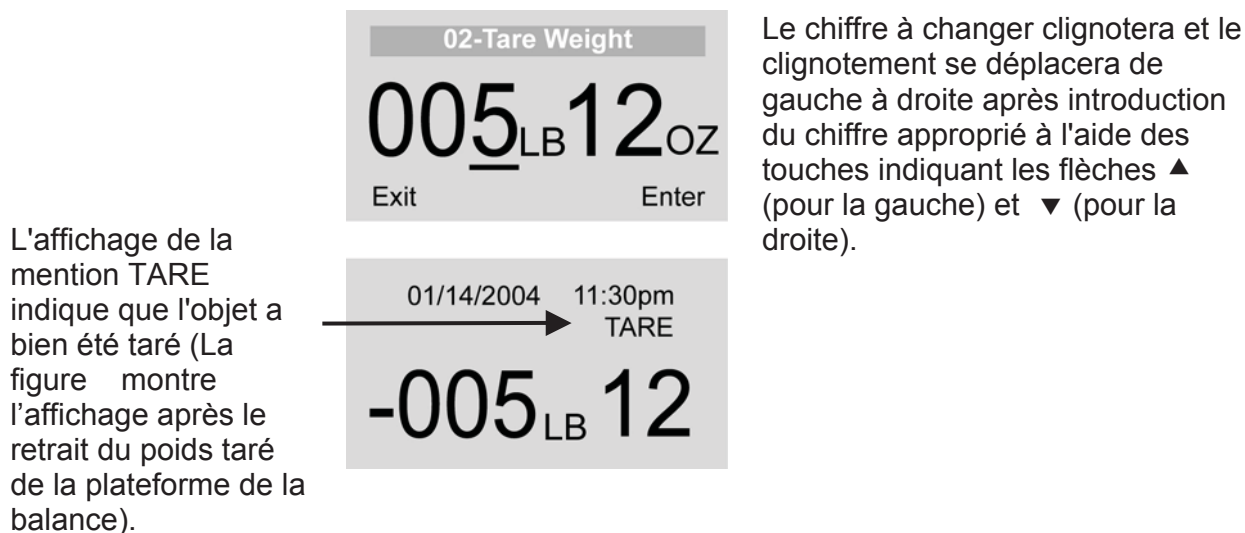


Figure 9. Poids de la tare

Tarage Automatique

L'utilisateur peut régler le poids d'une tare grâce à la touche correspondante (TARE) (9) tandis qu'un objet se trouve posé sur la plateforme de la balance. L'affichage se mettra à zéro et la mention TARE sera affichée pour indiquer qu'une valeur de tare est mémorisée (comme le montre la Figure ci-dessus).

MODE DE FONCTIONNEMENT

Effacement de la Tare

Une pression supplémentaire sur la touche TARE effacera la valeur de la tare qui se trouve actuellement en mémoire, la mention TARE disparaîtra de l'écran et la balance reprendra son fonctionnement normal.

03 GESTION DES DONNEES

Avant de modifier les réglages de cette balance, veuillez vous référer au «Menu » de la page 50 afin d'activer temporairement la touche Menu.

La balance gère les données du patient, y compris son numéro d'identification (ID), son poids, sa taille, la tare qui lui est attribuée et son IMC. La valeur est mémorisée ou transférée au PC. Cette fonction s'effectue en ouvrant un nouveau fichier de données.

OUVERTURE D'UN NOUVEAU FICHIER DE DONNEES:

1. Appuyez sur la touche ID (7).
2. Tapez le numéro d'identification sur le clavier.
3. Appuyez sur ENTER.

Cette balance calcule également l'Indice de Masse Corporelle (IMC) (BMI = Body Mass Index). CALCUL de l'IMC :

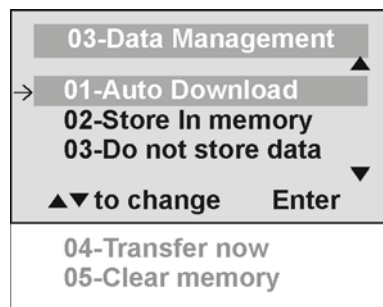
1. Installez le patient sur la plateforme de la balance.
2. Appuyez sur la touche IMC (BMI) (2).
3. La balance vous invitera à entrer la taille du patient. Utilisez le clavier numérique pour entrer la taille.

Note: Lorsque vous pesez en livres, la taille est entrée en incréments de ¼". Pour obtenir une portion fractionnelle de la taille, appuyez sur 1 pour ¼", appuyez sur 2 pour ½" et 3 pour ¾". Quand vous pesez en kg, la taille est entrée en incréments de 1cm.

4. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE).
5. L'affichage indiquera l'IMC du patient.
6. Appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour retourner au mode d'opération de pesage normal.


Note: La balance ne calcule pas L'IMC d'un patient de 24 livres (12 kg) ou moins. Si la taille n'est pas entrée sous 30 secondes en appuyant sur la touche IMC, la balance retournera au mode d'opération normal.

La balance offre deux options pour gérer vos informations : transférer/ télécharger les valeurs ou les stocker. La première option télécharge (transfère) automatiquement la valeur sur votre ordinateur personnel. La seconde option met la valeur en mémoire. La capacité maximale de la balance est de 270 fichiers de différentes données.




MODE DE FONCTIONNEMENT

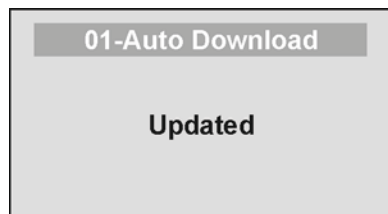01 Téléchargement automatique




Le téléchargement automatique est l'option par défaut, il transfère la valeur au PC dès que le patient descend de la balance ou quand l'utilisateur appuie sur la touche HOLD/RELEASE (Maintien/ Libération) si celle-ci était en position « HOLD ». En l'absence de connexion PC , la valeur n'est ni transférée ni stockée et sera perdue après avoir enlever la charge de la balance.

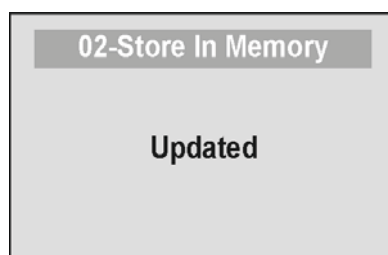
02 Mémorisation



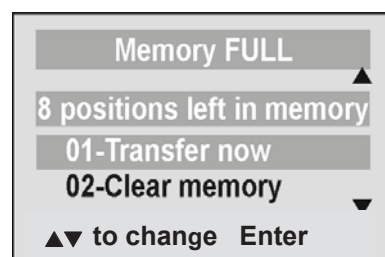La valeur est mémorisée pour téléchargement ultérieur au PC. Si la mémoire est presque pleine, l'utilisateur en sera averti et l'option de transfert de toutes les valeurs au PC ou de libération de la mémoire lui sera proposée.




03 Ne pas mémoriser

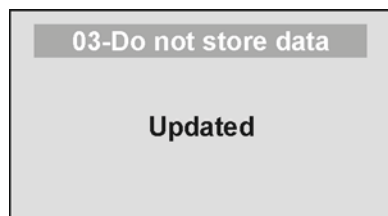


Toutes les informations ne seront pas conservées.

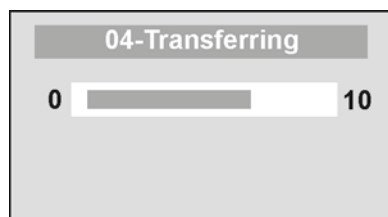04 Transfert immédiat



Toutes les valeurs mémorisées sont transférées au PC et la mémoire de la balance est ainsi complètement dégagée. Si le transfert échoue, les valeurs sont maintenues en mémoire jusqu'au succès du transfert ou jusqu'à l'ordre d'effacement.

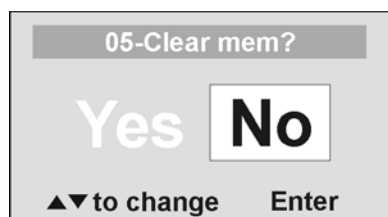05 Effacement de la mémoire




Si vous sélectionnez YES (OUI) et vous appuyez sur Entrée, toutes les valeurs enregistrées dans la mémoire seront effacées. Si vous sélectionnez NON, le dernier menu utilisé s'affichera.


MODE DE FONCTIONNEMENT

04 REGLAGES DE LA BALANCE

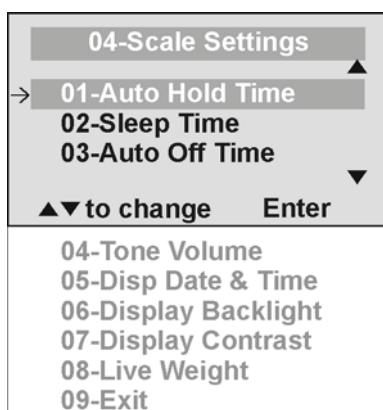Avant de modifier les réglages de cette balance, veuillez vous référer au «Menu » de la page 50 afin d'activer temporairement la touche Menu.




01 Temps de Maintien Automatique

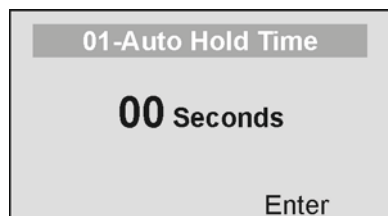

L'utilisateur peut déterminer la durée d'affichage du poids une fois que celui-ci est défini, et ce, que le patient reste ou non sur la plateforme. La durée définie par défaut est l'absence de temps de maintien. Le réglage maximum de cette option est de 30 secondes.

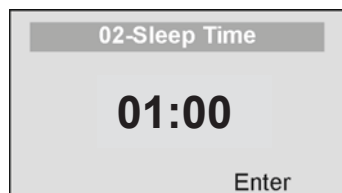
02 Mise en veille



L'utilisateur peut régler le temps à écouler avant que la balance ne se mette en mode de veille. Le réglage par défaut de cette option est de 1 minute. Quand la balance se met en veille, la mention STANDBY (en attente) s'affiche à l'écran. Le réglage maximum est une durée de veille de 10 minutes.

STANDBY

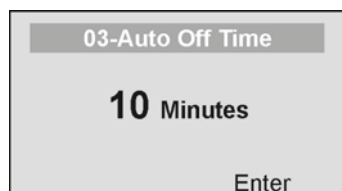
03 Arrêt automatique




L'utilisateur peut définir le temps d'attente de la balance avant que celle-ci ne s'éteigne automatiquement suite à son inutilisation prolongée. Le temps réglé par défaut est de 10 minutes. Le réglage de cette valeur sur zéro désactive la fonction d'arrêt automatique. La durée maximum avant l'arrêt automatique est de 60 minutes.

MODE DE FONCTIONNEMENT

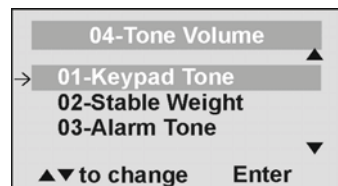04 Volume du son




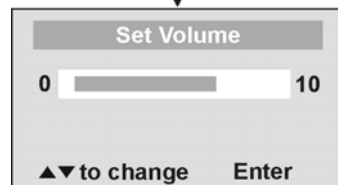Il existe une option permettant de régler le bip de la balance. Ce son se déclenche quand la balance a déterminé le poids se trouvant sur la plateforme, quand une touche est appuyée, lors de l'allumage de l'appareil, à la fin de l'autotest, ou en cas d'erreur ou d'avertissement.



Utilisez les touches ▼ ▲ du clavier pour régler le volume du son. Chaque fois que l'utilisateur appuie sur une touche pour modifier le volume, un bip retentit pour indiquer le volume du son réglée.

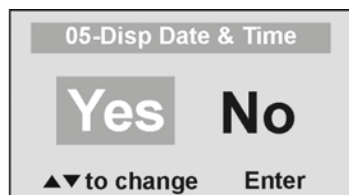
05 Affichage de la Date et de l'Heure



Cette option permet d'activer ou de désactiver l'affichage de la date et de l'heure.




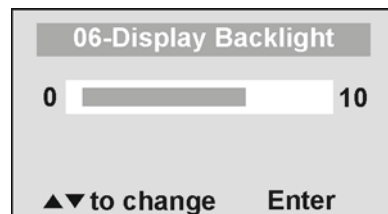06 Rétroéclairage de l'écran



L'utilisateur peut régler la luminosité du rétroéclairage.

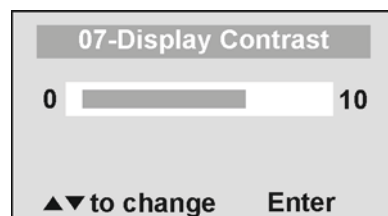
07 Contraste



L'utilisateur peut régler le contraste de l'écran LCD.

MODE DE FONCTIONNEMENT

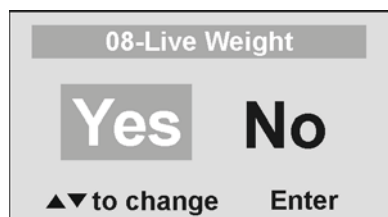
08 Poids Vif



En appuyant sur « Yes » (Oui), l'utilisateur sélectionne le mode Poids Vif et désactive le mode de lecture du poids par sensibilité au mouvement. En mode Poids Vif, le poids affiché variera avec les mouvements du patient; la balance n'appliquera pas le blocage rapide pour fixer la lecture du poids comme elle le fait en mode sensible au mouvement. Appuyez sur la touche REWEIGH (Repesée) pour activer le mode de sensibilité au mouvement et déterminer ainsi la lecture correcte du poids à l'écran. Pour revenir au mode sensible au mouvement, désélectionnez le Poids Vif en appuyant sur l'option " NO (NON)".


05 REGLAGES DU SYSTEME

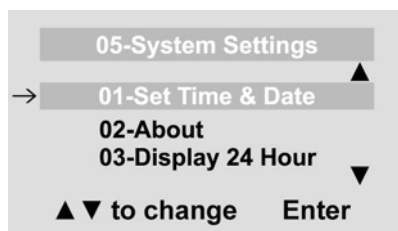Avant de modifier les réglages de cette balance, veuillez vous référer au «Menu » de la page de la page 50 afin d'activer temporairement la touche Menu.



01 Réglage de l'Heure et de la Date

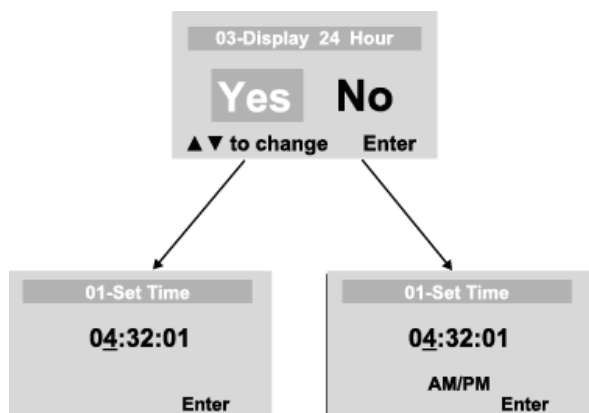L'utilisateur peut régler l'heure et la date par l'intermédiaire du clavier.




Pour régler l'heure, alternez entre heure, minutes et secondes en utilisant les touches ▲ ▼ et entrez les valeurs à l'aide du clavier. Si vous réglez "Display 24 Hours" (Affichage 24 heures) sur YES (OUI), ne choisissez pas le réglage AM/PM). Si vous réglez « Display 24 Hours » (affichage 24 heures) sur NO (NON), il passera à la ligne AM/PM ; appuyez sur le bouton ENTER (ENTÉE) une fois.

MODE DE FONCTIONNEMENT




Réglez la date en utilisant les touches fléchées ▲ ▼ et tapez les valeurs sur le clavier.

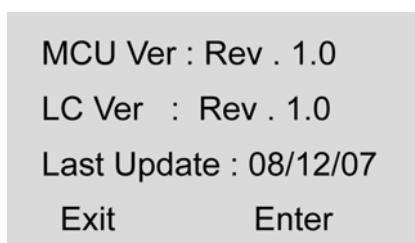02 Version



Cet écran affiche la version du logiciel installé sur la balance.

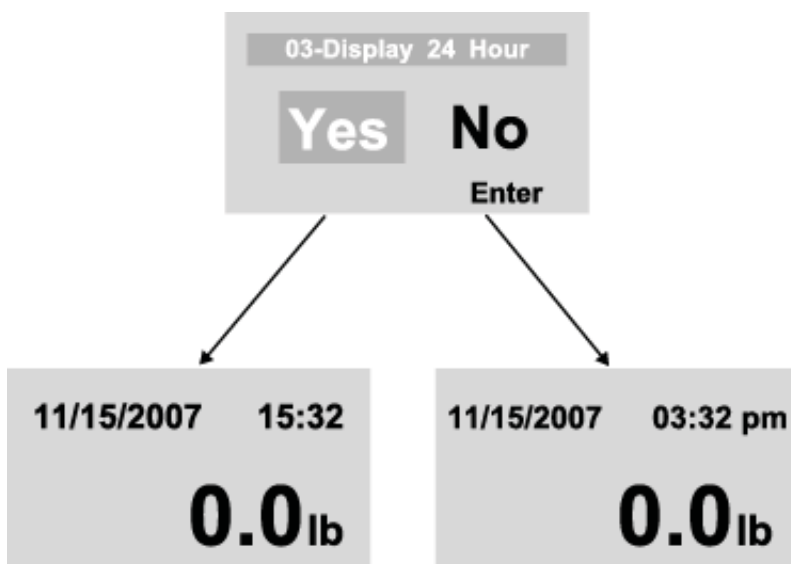
03 Affichage 24 heures



Il existe deux options d'affichage horaire : 12 heures (AM/PM) ou 24 heures.


06 TEST DE SYSTEME

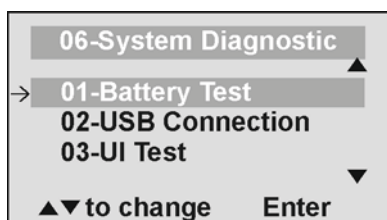Avant de modifier les réglages de cette balance, veuillez vous référer au «Menu » de la page 34 afin d'activer temporairement la touche Menu.



MODE DE FONCTIONNEMENT

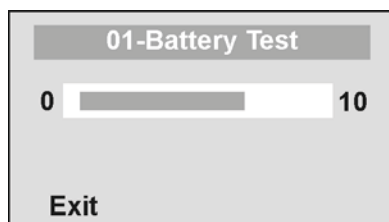01 Test des Piles



La balance affiche la durée de vie estimée restante avant que les piles actuelles n'aient besoin d'être remplacées.

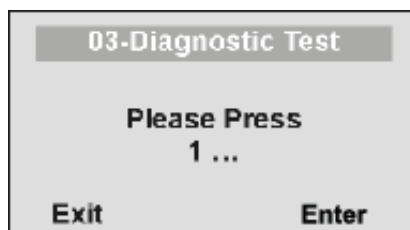
REMARQUE : pour tester les piles, la balance ne doit être alimentée que sur piles. Débranchez le cordon secteur avant d'effectuer ce test.

02 Connexion USB




La balance teste la connexion avec le PC et affiche le message « Connection is OK » (connexion correcte) ou « NO Connection » (pas de connexion). Si le message « NO Connection » est visualisé, vérifiez vos connexions USB sur la balance et sur votre PC, puis renouvelez le test. Si le problème persiste, veuillez consulter un technicien qualifié.


03 Test UI



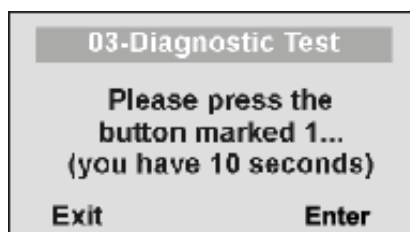La balance dispose d'une routine de diagnostic où elle teste la fonctionnalité du matériel (LCD, clavier) de l'Interface de l'Utilisateur (UI). Pour mettre cette routine en marche, l'utilisateur doit appuyer sur les touches indiquées au fur et à mesure par les divers messages affichés à l'écran.



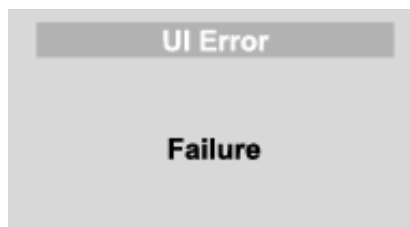Ce message s'affiche si la commande requise n'a pas été reçue ou en cas d'erreur de touche.




Ce message s'affiche si, après 10 secondes, la commande requise n'a pas été transmise. En cas d'apparition du message « UI Error Failure » (Echec d'interface), veuillez consulter un technicien qualifié.


MODE DE FONCTIONNEMENT

07 REGLAGES UTILISATEUR

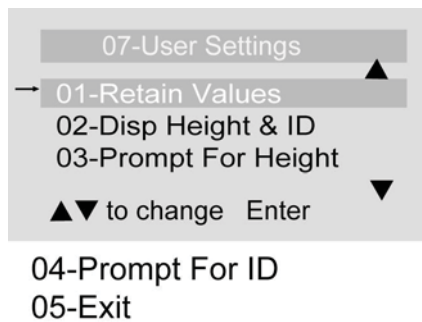Avant de modifier les réglages de cette balance, veuillez vous référer au «Menu » de la page 50 afin d'activer temporairement la touche Menu.




01 Conservation des Valeurs introduites

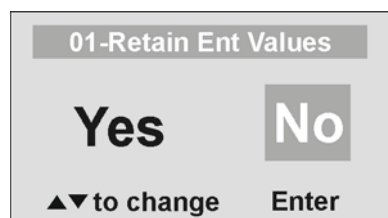

Cette option permet à l'utilisateur de retrouver les mêmes valeurs ID, hauteur et TARE d'une pesée à l'autre. Si cette option est désactivée, l'utilisateur doit réintroduire ces valeurs à chaque lecture. Si les valeurs ne sont pas introduites, seul le poids sera mémorisé.

REMARQUE : ces valeurs ne peuvent pas être retenues par le biais du numéro ID.

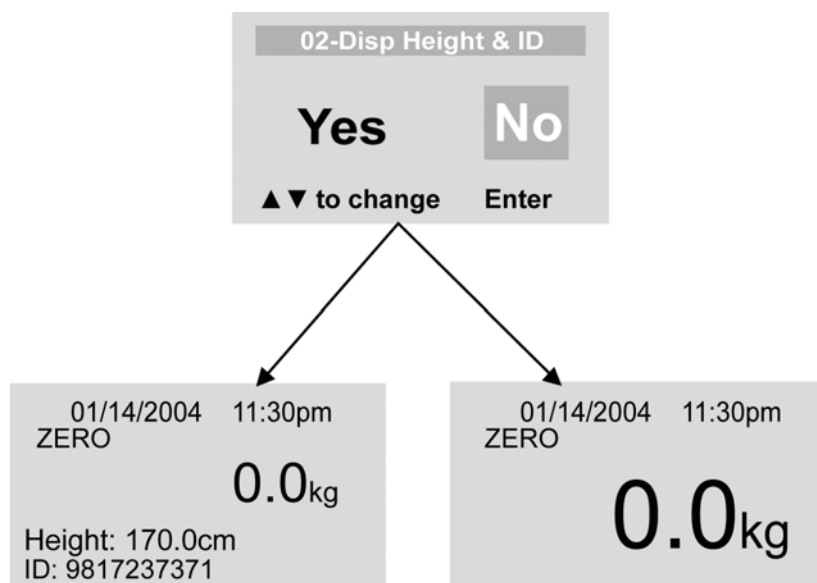
02 Affichage de la taille et de ID



Quand l'utilisateur choisit d'afficher la taille et le numéro d'identification ID du patient, ces données s'affichent au bas de l'écran. Nous recommandons l'application de cette fonction pour vérifier l'exactitude du numéro ID et de la taille enregistrés pour le patient.

MODE DE FONCTIONNEMENT

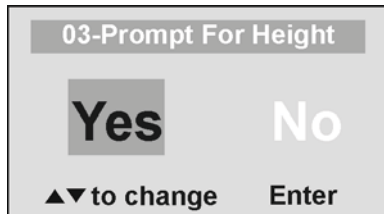03 Message guide pour la taille



03-Prompt For Height

Yes No

▲▼ to change Enter

Quand cette option est activée, un message guide demandera à l'utilisateur d'introduire la hauteur du patient après chaque pesée. L'opérateur dispose de 30 secondes pour entrer la taille.



01/14/2004 11:30pm

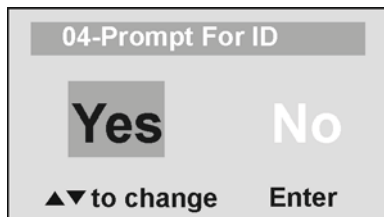
153 $\frac{3}{4}$ lb

Please enter Height:

0ft00 0/0in

▲▼ to change Enter

04 Message guide pour le numéro d'identification (ID)




04-Prompt For ID

Yes No

▲▼ to change Enter

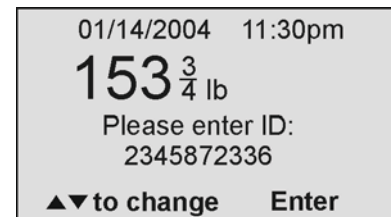Quand cette option est activée, un message guide demandera à l'utilisateur d'introduire le numéro d'identification du patient après chaque pesée. L'opérateur dispose de 30 secondes pour entrer le numéro d'identification.



01/14/2004 11:30pm

153 $\frac{3}{4}$ lb

Please enter ID:

2345872336

▲▼ to change Enter

MAINTENANCE

GENERALITES

Ce chapitre fournit les instructions pour la maintenance, le nettoyage, la localisation des pannes et indique les pièces remplaçables par l'opérateur, pour les balances électroniques Pro Plus™. Toutes opérations de maintenance autres que celles décrites dans ce chapitre doivent être exécutées par un technicien qualifié.

MAINTENANCE

Avant la première utilisation et après de longues périodes d'inutilisation, vérifiez le bon état de marche de la balance. Si la balance ne fonctionne pas correctement, veuillez vous adresser à un technicien qualifié.

1. Vérifiez l'aspect général de la balance pour y détecter tous éventuels dégâts ou usure apparents.
2. Vérifiez que l'adaptateur CA ne présente aucune craquelure ni usure de son câble, ni de broches cassées ou tordues.

NETTOYAGE

Des soins et un entretien corrects sont essentiels pour assurer une longue durée de vie à la balance avec un fonctionnement précis et efficace.

Déconnectez la balance du secteur CA.

1. Nettoyez toutes les surfaces externes avec un chiffon doux et humide. Il est possible d'utiliser un savon antibactérien doux et une solution aqueuse. Séchez avec un chiffon doux et propre.
2. Ne trempez pas la balance dans une solution de nettoyage ni autre substance.
3. N'utilisez pas d'alcool isopropylique pour nettoyer l'écran.

LOCALISATION DES PANNES

Reportez-vous aux instructions suivantes pour vérifier et rectifier une panne avant de contacter un technicien qualifié.

SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
La balance ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les piles sont mortes 2. Prise électrique défectueuse 3. Mauvaise alimentation 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacez les piles. 2. Utilisez une autre prise. 3. Remplacez l'adaptateur
Le poids affiché est contestable ou la balance ne se met pas à zéro.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un corps étranger est en contact avec la balance 2. L'affichage n'a pas indiqué la mention « 0.0 » avant d'effectuer la pesée 3. La balance n'est pas placée sur sol plat 4. La balance n'est pas calibrée 5. Tare incorrecte 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eloignez le corps étranger de la balance.. 2. Demandez au patient de descendre de la balance, mettez-la ensuite à zéro et renouvelez la pesée. 3. Placez la balance sur sol plat et recommencez le processus de pesée. 4. Vérifiez le poids à l'aide d'un objet dont le poids est connu. 5. Placez l'objet à tarer sur la balance Appuyez sur REWEIGH. Quand le poids de l'objet s'affiche, appuyez sur TARE. Réinstallez le patient et l'objet taré sur la balance. Appuyez à nouveau sur REWEIGH.
La pesée s'effectue mais l'écran affiche les mentions «weigh» et «reweigh» (pesée et repesée) à intervalles réguliers; le processus de pesée est trop long et aucun poids ne s'affiche.	Le patient n'est pas immobile	Demandez au patient de ne pas bouger, ou bien réglez l'appareil sur l'option Poids vif.
L'écran affiche un message de surcharge « Overload »	La charge sur la bascule dépasse la capacité de l'appareil	Retirez tout objet superflu et utilisez la balance en tenant compte de ses limites.
L'écran affiche le message « LOW BAT »	Les piles sont faibles	Remplacez les piles suivant les instructions.
L'écran affiche le message « Load Cell Error » (erreur de cellule de charge).	Il y a un problème dans l'une ou plusieurs des cellules de charge, ou bien le câble de la cellule de charge est déconnecté.	Vérifiez le branchement du câble de la cellule de charge aux ports du bloc d'affichage et de la plateforme. Si cela ne suffit pas à résoudre le problème, veuillez vous adresser à un technicien qualifié pour remplacer le capteur de poids défectueux.
L'écran affiche [MenuLock] lorsque la touche MENU	La touche MENU n'a pas été activée.	Appuyez sur la touche MENU et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour l'activer.

MODE DE CALIBRAGE

Cette balance été calibrée à l'usine et ne nécessite pas de avant utilisation.

Le calibrage s'effectue en mode kg ou lb, selon les unités de mesure utilisées au début de l'opération de calibrage.


01-Cal avec les processus One Point ci-dessous:

Action effectuée par l'opérateur	Affichage
1. Maintenez la touche HOLD/RELEASE (Maintenir/Effacer) enfoncée pendant 1-2 secondes et appuyez sur la touche ON/OFF (Marche/Arrêt)	Enter load weight: (Saisissez le poids de la charge) 450.0LB(ou 200,0KG)
2. Entrez le poids, ensuite appuyez sur ENTER (Entrée).	Enter load weight: (Saisissez le poids de la charge) 450.0LB(ou 200,0KG)
3. Assurez-vous qu'il n'y ait rien sur la plateforme, puis appuyez sur ENTER (Entrée).	Zero calibration (Calibrage zéro) Please clear the scale (Veuillez libérer la balance)
4. Patientez environ 1-3 secondes, le calibrage zéro est terminé	Zero calibration (Calibrage zéro) Please wait (Veuillez patienter)
5. Placez le poids sur la plateforme, ensuite appuyez sur ENTER (Entrée).	Weight calibration (Calibrage du poids) Put (Placez) XXX,X
6. Le calibrage sera effectué après 1-3 secondes	Weight calibration (Calibrage du poids) Please wait (Veuillez patienter)
7. Si l'opération s'est bien déroulée, l'écran affichera le message « Factor Fail » ! En cas d'échec, il affichera le message « Factor Fail ».	Factor Update (Mise à jour du numérateur) Factor OK! ((Dénominateur réussi)ou Factor Fail!) (Dénominateur échoué)
8. Si le processus de calibrage réussit, le poids sera effacé.	Rebooting...(Réinitialisation) Please wait (Veuillez patienter)
9. La balance se réinitialisera après environ 1-2 secondes.	Health o Meter (Compteur santé) Pro-Plus (Compteur Pro-Plus)
10. Veuillez patienter pendant que la balance retourne à son mode de fonctionnement normal. Retirez le poids de la plateforme.	Health o Meter (Compteur santé) Pro-Plus (Compteur Pro-Plus)

SCHEMAS EN PIECES DETACHEES

Les balances 1100KL, 2650KL et 2700KL ProPlus™ partagent toutes le même module d'affichage. Veuillez vous référer à cette page pour les pièces des blocs d'affichage de ces balances. Des schémas en pièces détachées et les listes des pièces sont inclus pour le reste des pièces des balances, dans les pages faisant suite à la liste des pièces du bloc d'affichage.

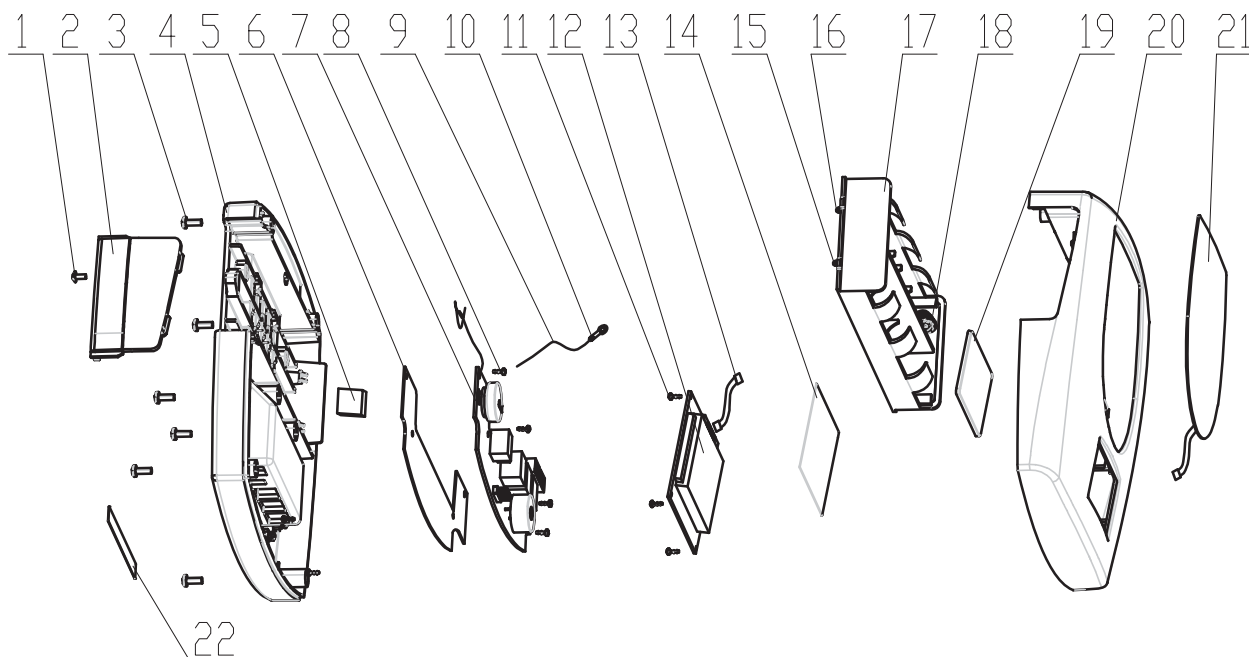
MODELES 1100KL, 2650KL & 2700KL SCHEMA DU BLOC D'AFFICHAGE DE LA BALANCE EN PIECES DETACHEES



LISTE D'AFFCHAGE DES PARTIES DU MODULE-TOUT MODÈLE

Clé n°	Pièce n°	Description	Qté	Remarque
1		VIS M3X6	2	
2	B3822801-0	COUVERCLE DE LA BATTERIE, ABS (757)	1	
3		VIS M3.5X8	6	
4		ARRIÈRE DE LA TÊTE, ABS+Q235A	1	
5		COLLE EN MOUSSE À FACE UNIQUE	1	
6		MEMBRANE DE PROTECTION STATIQUE	1	
7		PCB ASM	1	1 000 LB pour 2 560 KL et 1 100 KL
7		PCB ASM	1	700 LB pour 1 100 KL
8		VIS , Φ 3X6	4	
9		CÂBLE	1	
10		TERMINAL	1	
11		VIS, Φ 2,3 X 8	4	
12		LCD PCB ASM	1	
13		CÂBLE	1	
14		MEMBRANE DE PROTECTION STATIQUE	1	
15		PLAQUE NÉGATIVE	1	
16		PLAQUE POSITIVE	1	
17	B2033801-0	SUPPORT DE BATTERIE, PP	1	
18		PLAQUE POSITIVE ET NÉGATIVE	1	
19		OBJECTIF, PC TRANSPARENT	1	
20		AVANT DE LA TÊTE, ABS+Q235-A	1	
21	B411192	ÉTIQUETTE DU BOUTON PCB	1	1 000 LB pour 2 560 KL et 1 100 KL
21	B3513101-0	ÉTIQUETTE DU BOUTON PCB	1	700 LB pour 1 100 KL
22	B3245801-0	ÉTIQUETTE DES MONTANTS D'ENTRÉE/DE SORTI	1	1 100 KL

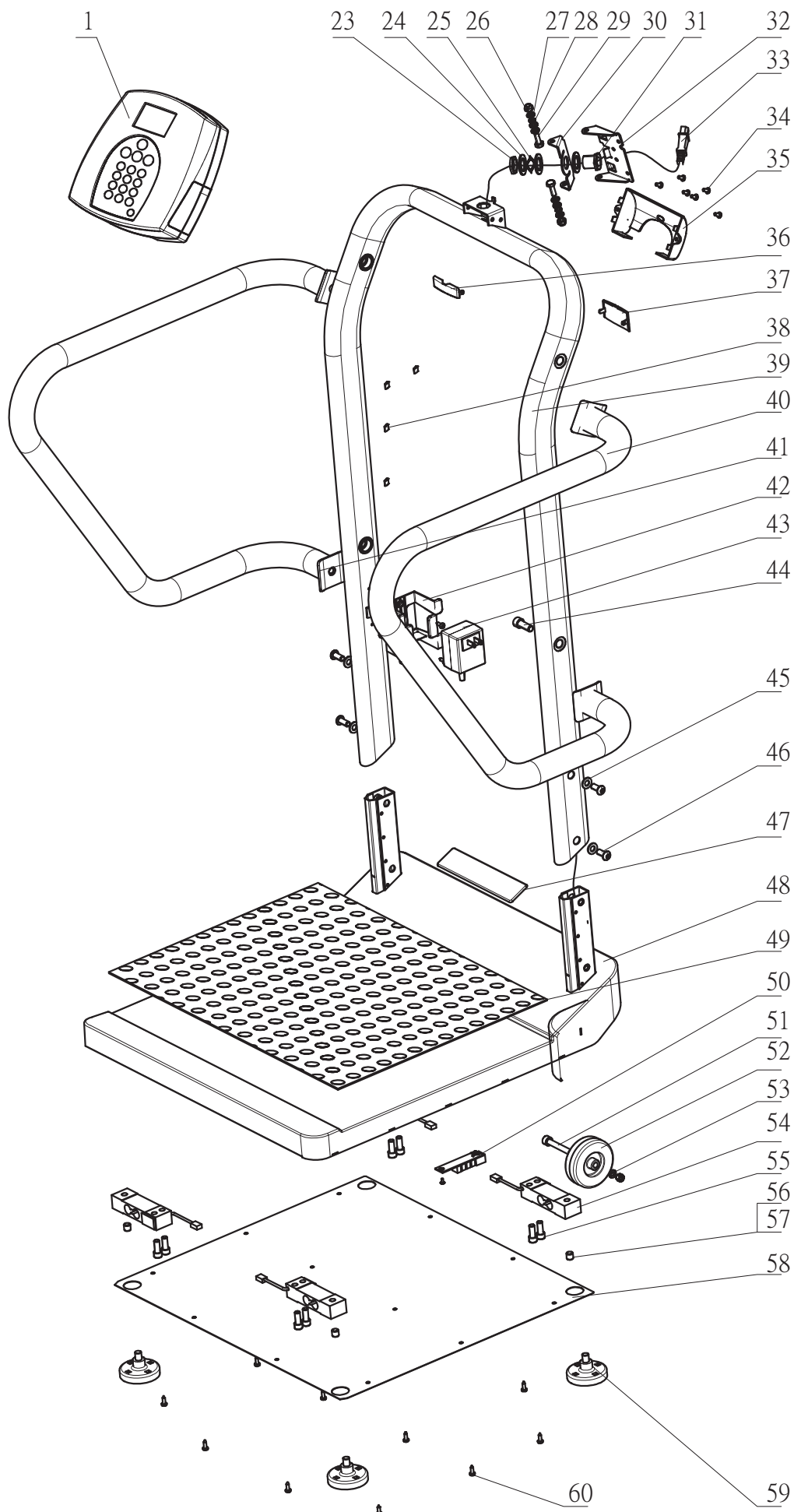
MODELE 1100KL SCHEMA DE LA BALANCE EN PIECES DETACHEES



MODELE 1100KL LISTE DES PIECES

Clé n°	Pièce n°	Description	Qté	Remarque
1	B1109401-0	ÉCRAN	1	
23	B2266901	ÉCROU DE TUYAU, 3/4 po.	1	
24	B2266901	RONDELLE EN PLASTIQUE, Φ 19	3	
25	B2266901	RONDELLE-FREIN ONDULÉE, Φ 19	1	
26	B2266901	ÉCROU À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE, M6	4	
27	B2266901	RONDELLE EN PLASTIQUE, Φ 6	6	
28	B2266901	RONDELLE-FREIN ONDULÉE, Φ 6	2	
29	B2266901	BOULON, M6X20	2	
30	B2266901	PLAQUE PIVOTANTE N° 1	1	
31	B2266901	BOULON DE TUYAU, 3/4 po.	1	
32	B2266901	PLAQUE PIVOTANTE N° 2	1	
33	B2033701-0	CÂBLE DE FILET	1	
34		VIS, M4X10	6	
35	B3822701-0	COUVERCLE DU CÂBLE	1	
36	B3822601-0	COUVERCLE ARRIÈRE	1	
37	B3822501-0	COUVERCLE AVANT	1	
38	B401305	ATTACHE DE CÂBLE	4	
39		TUYAU COURBÉ N°1	1	
40		TUYAU COURBÉ N°2	1	
41		TUYAU COURBÉ N°3	1	
42	B3817001-0	SUPPORT D'ADAPTATEUR	1	
43	ADPT31	ADAPTATEUR	1	
44		BOULON, M10X40	4	
45		RONDELLE, Φ 8	4	
46		BOULON, M8X19 mm	4	
47		MARQUE DE COMMERCE	1	
48	B3822001-0	FOND DU BOÎTIER ASM	1	
49		MAT DU PIED	1	
50	B2138901-0	CAPTEUR PCB	1	
51	B2267201-0	BOULON DE LOCALISATION	2	
52	B2267201-0	ROUE	2	
53	B2267201-0	RONDELLE, Φ 6	4	
54	B1304202-0	CAPTEUR	4	
55		BOULON, 5/16 po.X19 mm	8	
56		VIS, M10X10	4	
57		COLLE, LOCTITE 248	0,2 g	
58	B3822401-01	COUVERCLE DU FOND	1	
59	B2267201-0	PIEDS	4	
60		VIS, Φ 4,2X13	14	

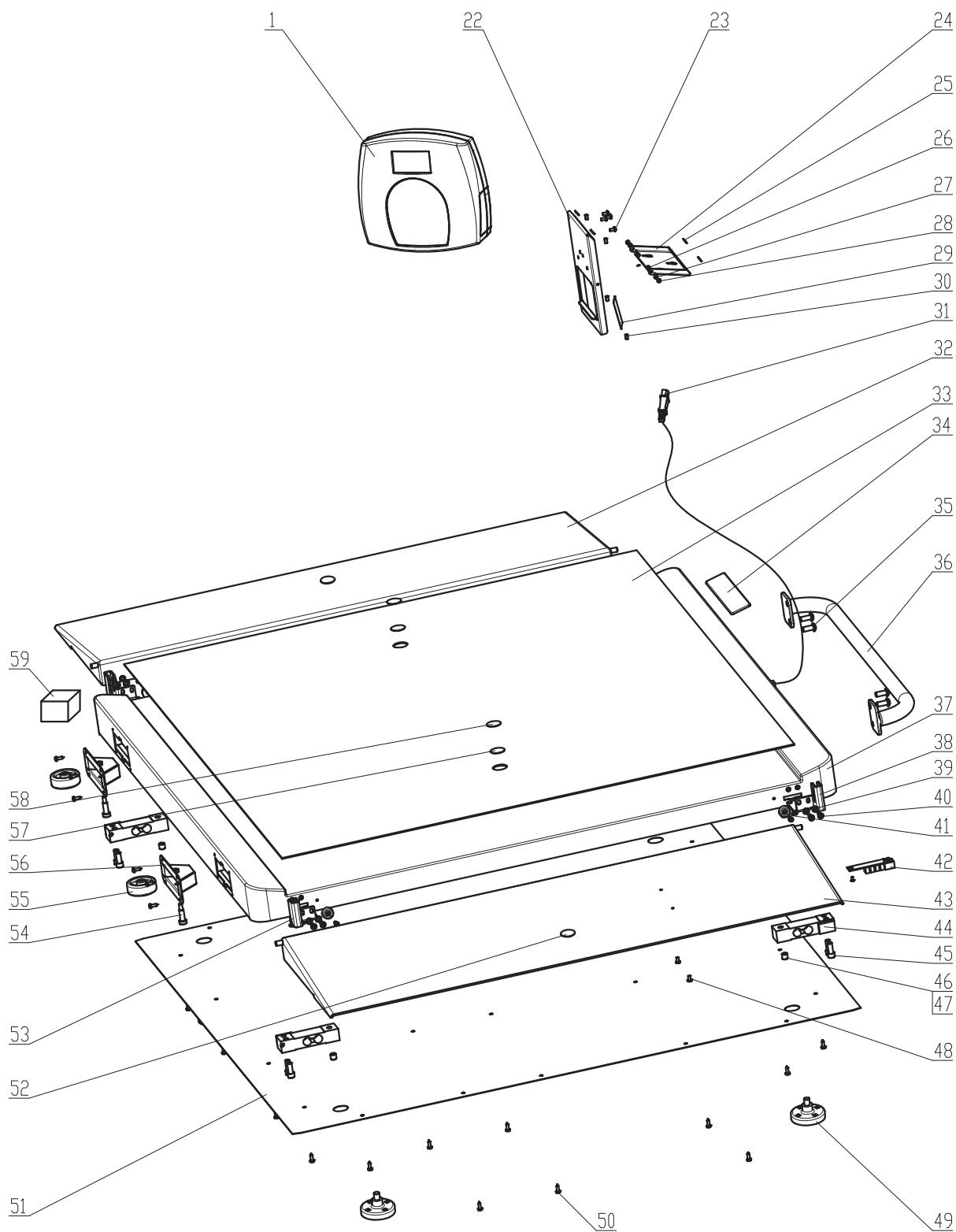
MODELE 2650KL SCHEMA DE LA BALANCE EN PIECES DETACHEES



MODELE 2650KL LISTE DES PIECES

Clé n°	Pièce n°	Description	Qté
1	B1109401-0	ÉCRAN	1
22		ATTACHE DE TÊTE N° 1 1,5 mmT SPCC	1
23	B2266901	VIS, M4X10	4
24		ATTACHE DE TÊTE N° 2 1,5 mmT SPCC	1
25		MAT	4
26		ÉCROU À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE, M3	2
27		RONDELLE EN PLASTIQUE, $\Phi 3$	2
28		VIS, M3X10	2
29	B3245801-0	ÉTIQUETTE DES MONTANTS D'ENTRÉE/DE SORTIE	1
30		BLOC ANTIDÉRAPANT	4
31		CÂBLE	1
32	B3827401-0	RAMPE N° 1	1
33	B3827101-0	MAT DU PIED	1
34		MARQUE DE COMMERCE	1
35		VIS, M8X19	4
36		TUYAU	1
37		FOND DU BOÎTIER ASM	1
38	B3823601-0	ATTACHE DE RAMPE N° 1	2
39		RONDELLE, $\Phi 5$	16
40		VIS, M5X10	16
41	B401308	MAT DE RAMPE	4
42	B2138901-0	CAPTEUR À JAUGE PCB	1
43	B3827401-0	RAMPE N° 2	1
44	B1304202-0	CAPTEUR	4
45		BOULON, 5/16 po.X19 mm	8
46		VIS, M10X10	4
47		COLLE POUR VIS, LOCTITE 248	0,2 g
48	B3822001-0	VIS, M4X6	2
49	B2266701-0	PIEDS	4
50		VIS, $\Phi 4,2 \times 13$	26
51		COUVERCLE DU FOND, 0,6 mmT SPCC	1
52	B401327	ATTACHE (MÂLE)	2
53	B3823701-0	ATTACHE DE RAMPE N° 2	2
54		BOULON	2
55		ROUE	2
56		ATTACHE DE ROUE ASM	2
57		COLLE EN MOUSSE À DOUBLE FACE	2
58	B401328	ATTACHE (FEMELLE)	2
59	ADPT31	ADAPTATEUR, 9 VDC 200 mA	1

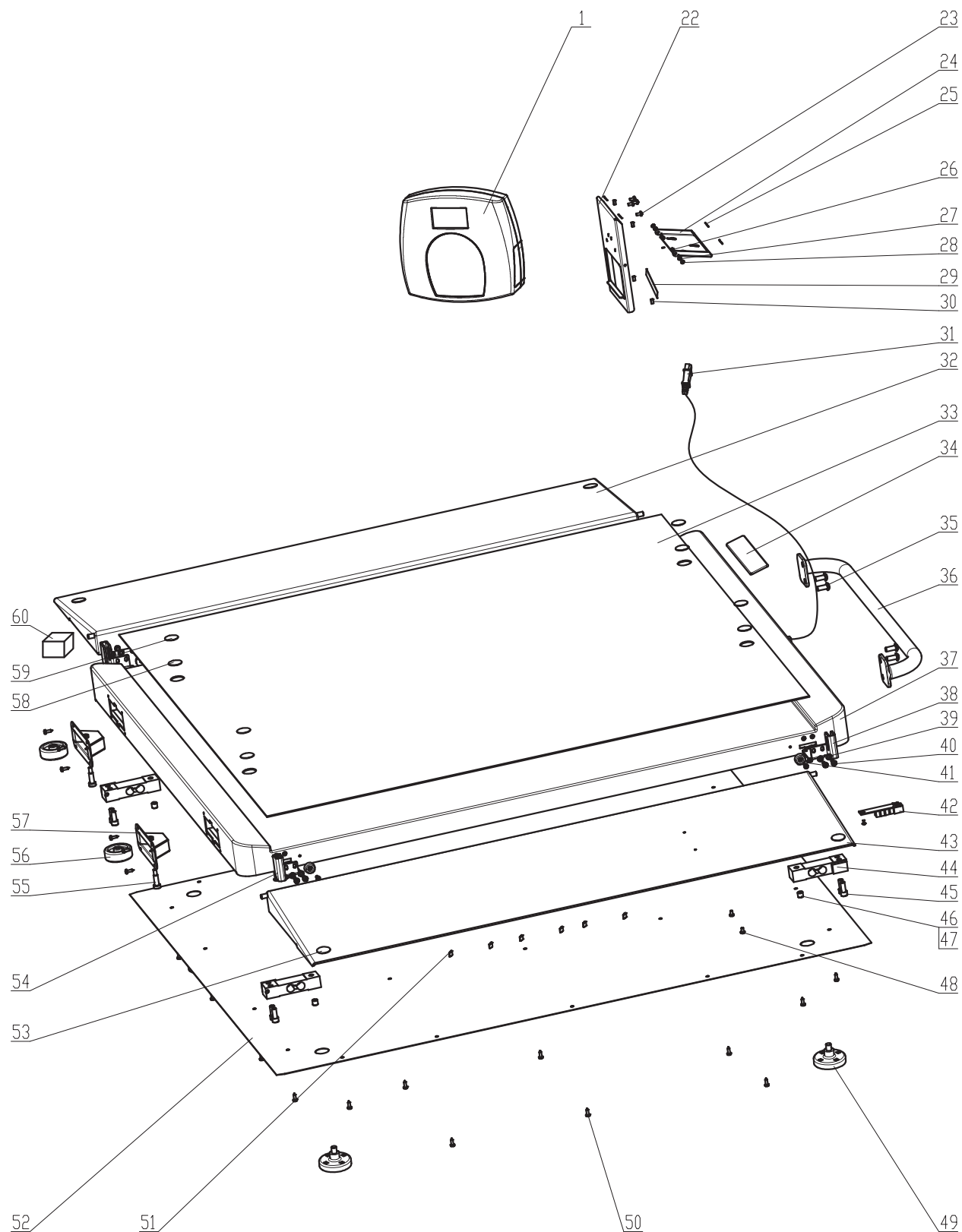MODELE 2700KL SCHEMA DE LA BALANCE EN PIECES DETACHEES



MODELE 2700KL LISTE DES PIECES

Clé n°	Pièce n°	Description	Qté
1	B1109401-0	ÉCRAN	1
22		ATTACHE DE TÊTE N° 1 1,5 mmT SPCC	1
23	B2266901	VIS, M4X10	4
24		ATTACHE DE TÊTE N° 2 1,5 mmT SPCC	1
25		MAT	4
26		ÉCROU À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE,M3	2
27		RONDELLE EN PLASTIQUE, Φ3	2
28		VIS, M3X10	2
29	B3245801-0	ÉTIQUETTE DES MONTANTS D'ENTRÉE/DE SORTIE	1
30		BLOC ANTIDÉRAPANT	4
31		CÂBLE	1
32		RAMPE N° 1	1
33		MAT DU PIED	1
34		MARQUE DE COMMERCE	1
35		VIS, M8X19	4
36		TUYAU	1
37		FOND DU BOÎTIER ASM	1
38	B3823601-0	ATTACHE DE RAMPE N° 1	2
39		RONDELLE, Φ5	16
40		VIS, M5X10	16
41	B401308	MAT DE RAMPE	4
42	B2138901-0	CAPTEUR À JAUGE PCB	1
43 (32)		RAMPE N° 2	1
44	B1304202-0	CAPTEUR	4
45		BOULON, 5/16 po.X19 mm	8
46		VIS, M10X10	4
47		COLLE POUR VIS, LOCTITE 248	0,2 g
48	B3822001-0	VIS, M4X6	2
49	B2266701-0	PIEDS	4
50		VIS, Φ4,2X13	36
51		ATTACHE DE CÂBLE	6
52		COUVERCLE DU FOND	1
53	B401327	ATTACHE (MÂLE)	2
54	B3823701-0	ATTACHE DE RAMPE N° 2	2
55		BOULON	2
56		ROUE	2
57		ATTACHE DE ROUE ASM	2
58		COLLE EN MOUSSE À DOUBLE FACE	2
59	B401328	ATTACHE (FEMELLE)	2
60	ADPT31	ADAPTATEUR, 9 VDC 200 mA	1

Protocole de communication

Cette balance utilise un protocole de sortie pour communiquer avec un PC via un câble USB et le port série 2 (le port série 1 est utilisé pour le raccord à une imprimante). Dans un protocole de sortie, la touche Echap (<esc> ou ASCII 27) est utilisée pour indiquer la présence d'une commande et non des données. Deux scénarios ont été définis: Communication initiée par la balance et communication initiée par le PC. Ce qui suit est un tableau de ce qui peut être transmis avec la ligne de communication.

Initié par la balance	Valeur ESC	Initié par le PC	Valeur ESC
Lecture envoi unique	R	Mise à jour du micrologiciel	U
Lecture envoi continu	R	Demande des valeurs/paramètres actuels	Q
Lecture envoi groupé	R	Diagnostics	A
Envoi des diagnostics	A	Envoi de messages de contrôle de la	C
		Demande des données conservées	R
		Paramétrage des données conservées	S
		Effacement des données conservées	X

Ce qui suit est une liste complète des caractères ESC qui seront utilisés :

Nom	Caractère ESC	Valeur ESC avec des paramètres	Description
Lecture	R	R	Permet de communiquer au PC que la balance envoie une lecture. Suivi immédiatement par la valeur envoyée <ESC>R<ESC>I1234567890<ESC>W200.00<ESC>Nm<ESC>...<ESC>E
ID	I	Icccccccccc1	Il s'agit de l'ID du patient (10 caractères)
Poids	W	Wnnn.nn	Il s'agit du poids du patient (W200.05 signifie 200,5)
Taille	H	Hnnn.nn	Il s'agit de la taille du patient
TARE	T	Tnnn.nn	Il s'agit du poids TARE enregistré par la balance
BMI	B	Bnnn.n	Il s'agit de l'IMC du patient
Fin du lot(EOP)	E	E	Indique la fin de la commande/du lot des données
Unités	N	Nc	Indique les unités de valeur des données (m= système métrique, c= système impérial)
Etat de la puissance	J	J	Exige l'état de l'alimentation de la balance. La réponse sera <ESC>O<ESC>E or <ESC>F<ESC>E or <ESC>L<ESC>E
Allumé	O	O	Lors de la demande d'un état d'alimentation, cela indique que la balance est sous tension
Éteint	F	F	Lors de la demande d'un état d'alimentation, cela indique que la balance est hors tension (ou en mode veille/basse puissance). En mode basse puissance, la balance retourne à L
Date Heure	D	Dnnnnnnnnnnnn	La ligne heure et date (MMDDYYYYhhmmss)
Mise à jour	U	Uc	Cette commande a un paramètre c, permettant de faire la mise à jour du micrologiciel. Le PC exécute une mise à jour en envoyant d'une demande de mise à jour (Ur). La balance répond avec Uc (permission d'envoi) ou Ue (erreur, ne pas envoyer). La balance envoie ensuite U127K ou U127B (la taille des données qui suivent est exprimée en kilo-octets (K=Kbytes) ou en octets (B=bytes)) et envoie les données.
Demande	Q	Qccc	Ceci est une demande pour recevoir les valeurs globales de la balance, telles que la luminosité de l'écran, le temps de maintien auto, le volume sonore des touches, etc (Voir Tableau A) (Par exemple, <ESC>QAHT remet la valeur du temps de maintien automatique sur 10 secondes comme suit: <ESC>PAHT=10<ESC>E)

¹ (Nous avons utilisé des caractères descriptifs pour montrer le type de paramètres. Ce sont : c=Caractère,n=Numérique. Le nombre de paramètres indique le nombre de paramètres fictifs pour ces caractères et ces numéros (ex. : Zccc indique qu'une valeur contenant 3 caractères sera donnée).

Nom	Caractère ESC	Valeur ESC avec des paramètres	Description
Réponse	P	P ccc=cccccc c	Ceci est la réponse de la balance à la demande mentionnée ci- dessus
Diagnostics(1)	A	A ccc	I Il s'agit de la demande pour un test de diagnostique sur certaines parties de la balance (telles que la durée de vie de la batterie, les capteurs de poids, le clavier, l'écran LCD, etc.) (Voir Tableau B)
Diagnostics(2)	Z	Z ccc	Il s'agit de la réponse des diagnostics effectués sur la balance. Les valeurs comprennent des codes d'erreur indiquant ce qui ne va pas avec la balance ou bien ne comportent que des zéros lorsque que tout va bien.
Contrôle (régler une valeur)	C	C ccc=cccccc	Cela permet de régler la valeur des paramètres globaux de la balance, le retro éclairage, le temps de maintien automatique, le volume sonore des touches, etc.(<ESC>CAHT=20<ESC>E règle l'Auto Hold Time à 20 secondes)
Obtient les données du sujet et les valeurs	G	G	Cela permet d'accéder aux informations enregistrées pour un sujet et aux lectures enregistrées dans le tableau des lectures.
Régler les dates d'enregistrement des données	S	S	Cela permet de régler les données d'enregistrement pour un patient Suivi immédiatement par la valeur réglée(<ESC>S<ESC>I1234<ESC>T200<ESC>Um<ESC>E règle la valeur TARE pour le patient ID1234 à 200kg)
Effacer les lectures	X	X	Cela permet d'effacer toutes les valeurs enregistrées dans le tableau de la balance. Seules les données enregistrées pour le sujet conservées.
Effacer les dates d'enregistrement des données	Y	Y	Cela permet d'effacer les données d'enregistrement pour un patient. L'ID du patient suivra le Y (<ESC>Icccccccccc). Si aucun ID n'est saisi TOUTES les données seront effacées.

Nom de commande	identifiant	Unité
Temps de automatique	AHT	nn (Secondes)
Arrêt de automatique	AOT	nn (Minutes)
Temps de veille	STM	(Secondes)nn
Volume des touches	VKE	nn (01..10)
Volume de poids stable	VSW	nn (01..10)
Volume d'alarme	VAL	nn (01..10)
Affichage date/heure	DAT	nn (01 or 10)
Rétroéclairage	BAC	nn (01..10)
Contraste	CON	nn (01..10)
Mode d'affichage de poids (fractions (f), décimales (d) ou livres et onces (p))	WDM	c (f,d,p)
Poids taré	TAR	nnn.nn (Kg)
Unités de mesure (système métrique ou impérial)	UOM	c (m or c)
Positions restantes dans la RAM	RAM	nnnn (0..max)

Tableau A liste des valeurs globales de la balance et identifiants

Nom des composants tester	identifiant	Code d'erreur
Capteur de poids A	LCA	E3A
Capteur de poids B	LCB	E3B
Capteur de poids C	LCC	E3C
Capteur de poids D	LCD	E3D
Batterie	BAT	E4L (Batterie faible (L Low), mais encore utilisable) ou E4U (Batterie faible (L Low) et E4U (Batterie faible (L Low) et instable (U unstable)) E4U (Bat Low et Instable)
Communication avec le PC (USB)	PCC	E0
Ecrire dans la RAM	WRM	E0
Lire la RAM	RRM	E0

Tableau B Composants tester

Les différents tableaux sur la balance :

Il existe deux tableaux de données sur la balance. Le premier enregistre les données du sujet (informations liées au patient, qui ne changent pas) et le deuxième les données enregistrées durant les lectures.

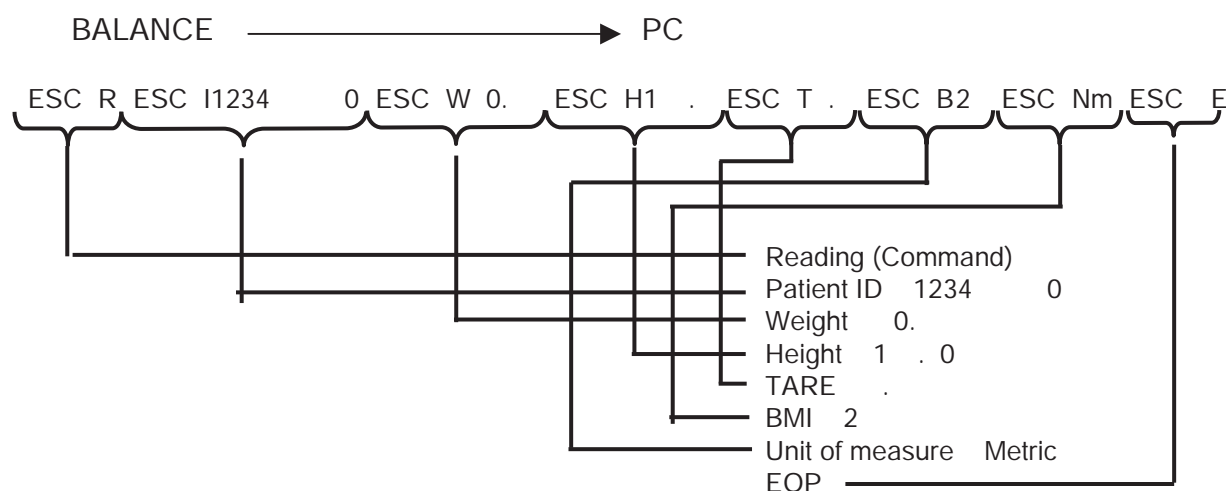
Dates d'enregistrement du sujet

Champs : ID, TARE, TAILLE


Lectures

Champ : index (concernant l'ID du tableau d'enregistrement des données du sujet), poids, date et heure

Modèle et explication du protocole ESC




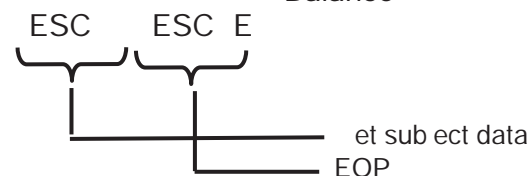2. La balance répond avec les données, à l'aide de la commande Obtenir les données du sujet et les lectures
Balance ← PC



La balance répond avec les données conservées

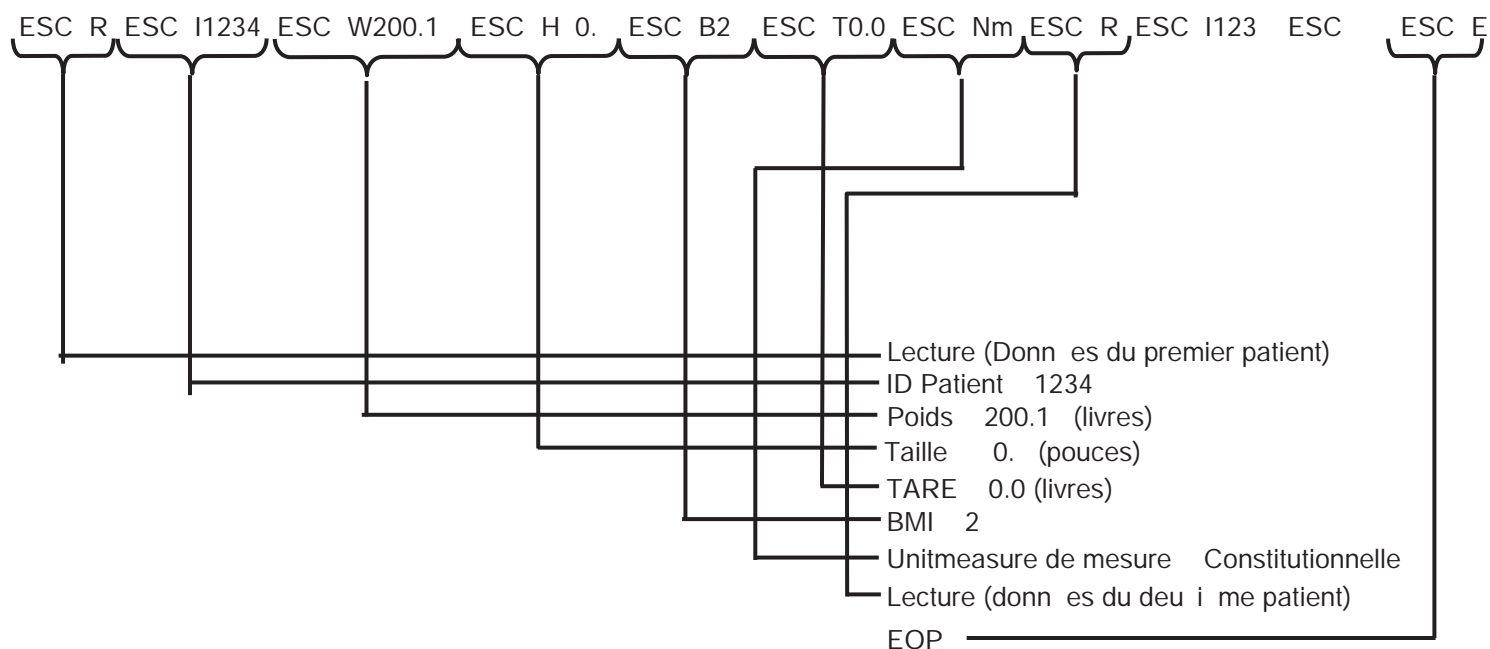BALANCE Sens de communication → PC




Si aucune donn e n'est enregistr e, le message envoy est :
ESC R ESC E


Configuration des broches pour les c bles ProPlus

Les broches des deu connecteurs se pr sentent de la fa on suivante :

R 4	Fonction	DB
4	T	2
2	R	3
1	ND	

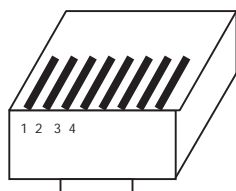

R 4

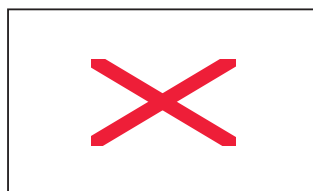

DB

REMAR UE: Branche le c ble de l'imprimante au PORT 2 de la balance

Param tres de transmission: REMAR UE

Tau de transmission	00
Parit	aucune
Bit d information	bits
Bit d arr t	1bit
Bit de d part	1 bit
Dispositif Handshake	aucun

Paramètres de l'imprimante

<BALANCE > $\xrightarrow{\text{Sens de communication}}$ <IMPRIMANTE >

Modèle d'imprimante : CT-S280

Tension de fonctionnement : 8.5 V c.c. - 2,5 A


Cette balance vous offre une possibilité d'impression en connectant l'imprimante XXXXX:

1. Branchez le câble de l'imprimante au PORT 1 de la balance.
2. Allumez l'imprimante.
3. Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet sur la plateforme de pesée.
4. Allumez la balance et attendez que l'écran affiche ZERO et 0.0 avant de monter dessus.
5. Montez sur la balance et effectuez une pesée.
6. Saisissez les informations relatives au patient telles que son ID, sa taille, les dimensions du fauteuil roulant, etc.
7. Appuyez sur la touche 3 (PRINT, impression); l'imprimante imprime alors les données du patient (ID, poids, taille, IMC, etc.)




Configuration des broches pour les câbles d'imprimante ProPlus

RJ45	Fonction	DB9
6	TX	3
7	GND	2

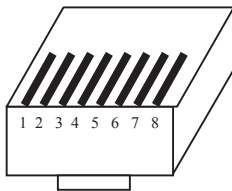

RJ45

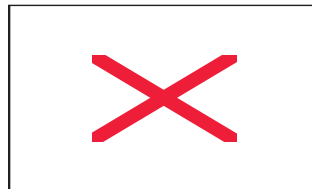

DB9

Les données imprimées sont:

1. ID
2. Poids
3. Taille
4. BMI
5. Poids de la tare

REMARQUE : Configurez d'abord l'imprimante selon les instructions du fabricant afin de garantir une bonne impression.

REMARQUE : Branchez le câble de l'imprimante au PORT1 de la balance.

GARANTIE

GARANTIE LIMITEE

Que couvre la garantie?

A compter de la date d'achat, les pèse-personnes Pelstar LLC sont garantis contre les défauts de matériel ou de fabrication pour une période de trois (3) ans. Renvoyez à Pelstar, port payé et bien emballé, le produit qui fonctionne mal. Si le fabricant constate un défaut de matériel ou de fabrication, le pèse-personne sera réparé ou changé sans aucun frais pour le client. Le remplacement se fera avec un produit ou composant neuf ou corrigé. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement se fera par un appareil similaire d'une valeur égale ou supérieure. Les frais de toutes les pièces réparées ou changées sont couvertes seulement pour la période de garantie originale.

Qui est couvert par la garantie?

Le premier acheteur du produit doit avoir les pièces justificatives de l'achat lui donnant droit au service de garantie. Les concessionnaires ou les détaillants des produits Pelstar n'ont pas le droit de modifier ou de changer les termes et conditions de cette garantie.

Ce que la garantie ne couvre pas.

Votre garantie ne couvre pas une usure normale des pièces ou un dommage résultant des éléments suivants: négligence ou mauvais usage du produit, branchement sur un courant ou un voltage non approprié, usage non conforme au mode d'emploi, abus comprenant le fait de trifouiller l'appareil, le dommage occasionné pendant le transport, les réparations alternance sans autorisation. De plus, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles comme l'incendie, l'inondation, l'ouragan et la tornade. Cette garantie vous donne des droits légitimes spécifiques. Le client peut également bénéficier de certains autres droits qui varient selon les pays, les états, les provinces ou les juridictions.

Pour obtenir un service de garantie

Assurez-vous d'avoir conservé votre reçu ou tout autre document prouvant votre achat. Appelez le 1 (800) 638-3722 ou le 1 (708) 377-0600 pour recevoir un numéro d'autorisation de renvoi. Joignez votre preuve d'achat au produit défectueux en indiquant vos nom, adresse, numéro de téléphone dans la journée, et en donnant une description du problème. Emballez soigneusement le produit et envoyez-le avec port et assurance payés d'avance à:

Pelstar LLC
Attention R/A# _____
Repair Department
11800 South Austin Avenue
Unit B
ALSIP, IL 60803, U.S.A

Si votre pèse-personne n'est pas couvert par la garantie, ou a été endommagé, une estimation des frais de réparation ou de remplacement sera soumise à votre approbation avant l'exécution de la réparation ou du remplacement.

Pelstar LLC

11800 South Austin Avenue Unit B ALSIP, IL 60803, U.S.A • 1 800 638-3722 or +1 708 377-0600

www.homscases.com

Les produits Health o meter sont fabriqués, conçus et la propriété de Pelstar LLC.

Health o meter® est une marque déposée de Sunbeam Products Inc., Boca Raton, FL 33431

© Pelstar LLC 2009

ProPlus® est une marque déposée de of Pelstar LLC

Brevet : US: D508655, D523367, Europe: 0149987/1-8, Chine: 200430004551.2

Health o meter®

P r o f e s s i o n a l

ho s ales o

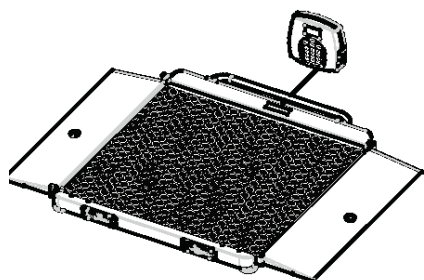
BALANZAS ELECTRÓNICAS PRO PLUS™

MODELOS 1100KL, 2650KL Y 2700KL




1100KL

BALANZA CON PASAMANO



2650KL

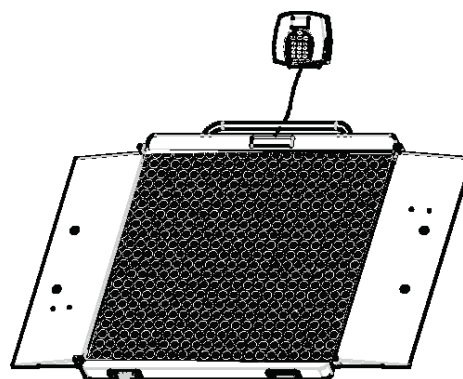BALANZA PARA SILLA DE RUEDAS



2700KL

BALANZA PARA SILLA DE RUEDAS PLEGABLE

**REGISTRE SU PRODUCTO PARA OBTENER LA CORRESPONDIENTE
GARANTÍA EN WWW.HOMSCALES.COM**

Patente N°: US: D508655, D523367, Europa: 0149984/1-8, China: 200430004551.2

MANUAL DE OPERACIÓN
www.homscales.com
BALANZAS ELECTRONICAS PROPLUS™
MODELOS 1100KL, 2650KL, Y 2700KL

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE	79
PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA	84
ESPECIFICACIONES	84
CONFIGURACIÓN	85
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	86
MANTENIMIENTO	99
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	100
TRAYECTORIA DE CALIBRACIÓN	101
VISTA DETALLADA DE LA UNIDAD DE PANTALLA	102
LISTA DE PIEZAS DE LA UNIDAD DE PANTALLA.....	102
1100KL - VISTA DETALLADA DE LA BALANZA	103
1100KL - LISTA DE PIEZAS	104
2650KL - VISTA DETALLADA DE LA BALANZA	105
2650KL - LISTA DE PIEZAS	106
2700KL - VISTA DETALLADA DE LA BALANZA	107
2700KL - LISTA DE PIEZAS	108
PROTOCOLO DE COMUNICACIONES.....	109
GARANTÍA	115

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Lista de Piezas

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| (1) Conunto principal | (1) Mango |
| (1) Unidad de pantalla | (4) Soporte de rampa |
| (4) Conunto de patas de caucho | (1) Soporte de la pantalla |
| (1) Adaptador de CA | (4) Tornillos |
| (1) Conector de cable LC | (1) Cable de alimentación |
| | (2) Ruedas |

Herramientas necesarias : Destornillador de cabeza Phillips (no incluida), llave inglesa Allen (incluida).

Saque cada unidad de su cartón y desempaquete el material cuidadosamente para evitar ralladuras en las piezas de la unidad. Recomendamos que dos personas hagan el montaje.

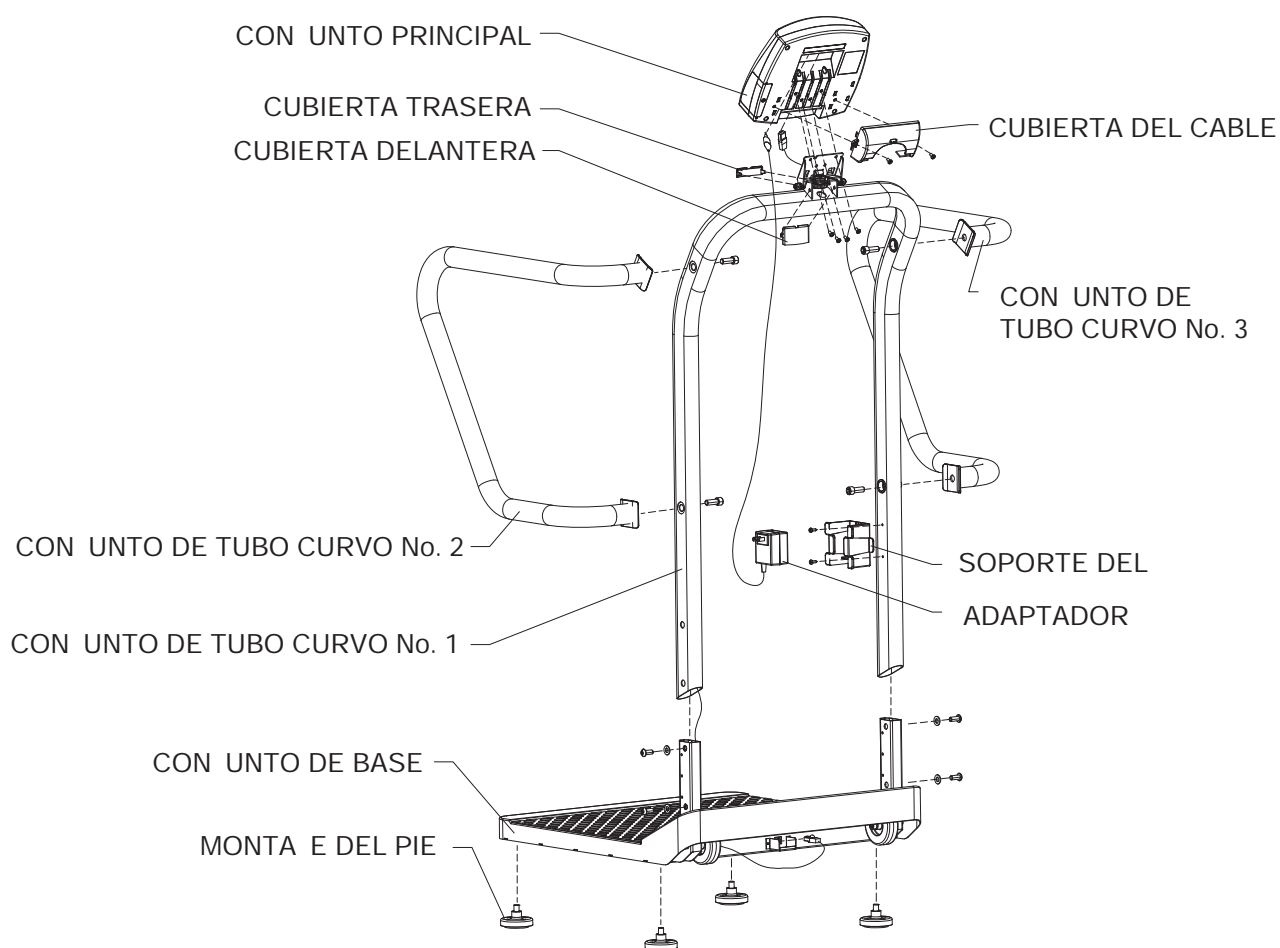


Figura 2

(consulte la Lista de Piezas en la página 104 para detalles de las piezas)

Instrucciones de montaje de 1100KL

1. Retirar la base de la escalera desde la caja y atornillar los cuatro pies de la parte inferior de la plataforma.
 2. Colocar la plataforma sobre el suelo y ajustar las patas para nivelar la plataforma. (NO APRETAR DEMASIADO).
 3. Identificar el cable del extensímetro y retirarlo del fondo del parapeto central. Colocar el parapeto sobre la plataforma y hacer pasar el cable por el soporte del parapeto.
 4. El cable del extensímetro debe pasar por el soporte del parapeto y la salida inferior.
 5. Conectar el cable del extensímetro en la base de la escalera.
 6. Deslizar el parapeto central en los soportes del parapeto e insertar los pernos del parapeto. (2 de cada lado del pasamanos) NO APRETAR DEMASIADO.
 7. Con una llave hexagonal grande, fijar los parapetos de ambos lados al parapeto central.
 8. Conectar el cable del extensímetro en el puerto del extensímetro en la parte posterior de la pantalla de visualización y deslizar la pantalla sobre el soporte de pantalla.
- Comentario:** Hacer pasar el cable del extensímetro por el canal situado en la parte posterior de la pantalla de visualización.
9. Insertar 4 tornillos en el soporte de la pantalla de visualización.
 10. Conectar el cable de alimentación al puerto de alimentación.

INSTRUCCIONES DE MONTA E 2 L 2 L

Lista de Piezas :

- | | |
|--|---------------------------|
| (1) Unidad de la Plataforma (incluye 2 Rampas) | (1) Manija |
| (1) Unidad de la pantalla | (4) Soporte de la rampa |
| (4) Unidades de Pies de goma | (1) Soporte para pantalla |
| (1) Adaptador CA | (4) Tornillos |
| (1) Conector del Cable LC | (1) Cable de Energía |
| | (2) Ruedas |

Herramienta requerida: Estornillador de cabeza Phillips (no incluida)

Saque cada unidad de su cartón y desempaquete el material cuidadosamente para evitar ralladuras en las piezas de la unidad. Recomendamos que dos personas hagan el montaje.

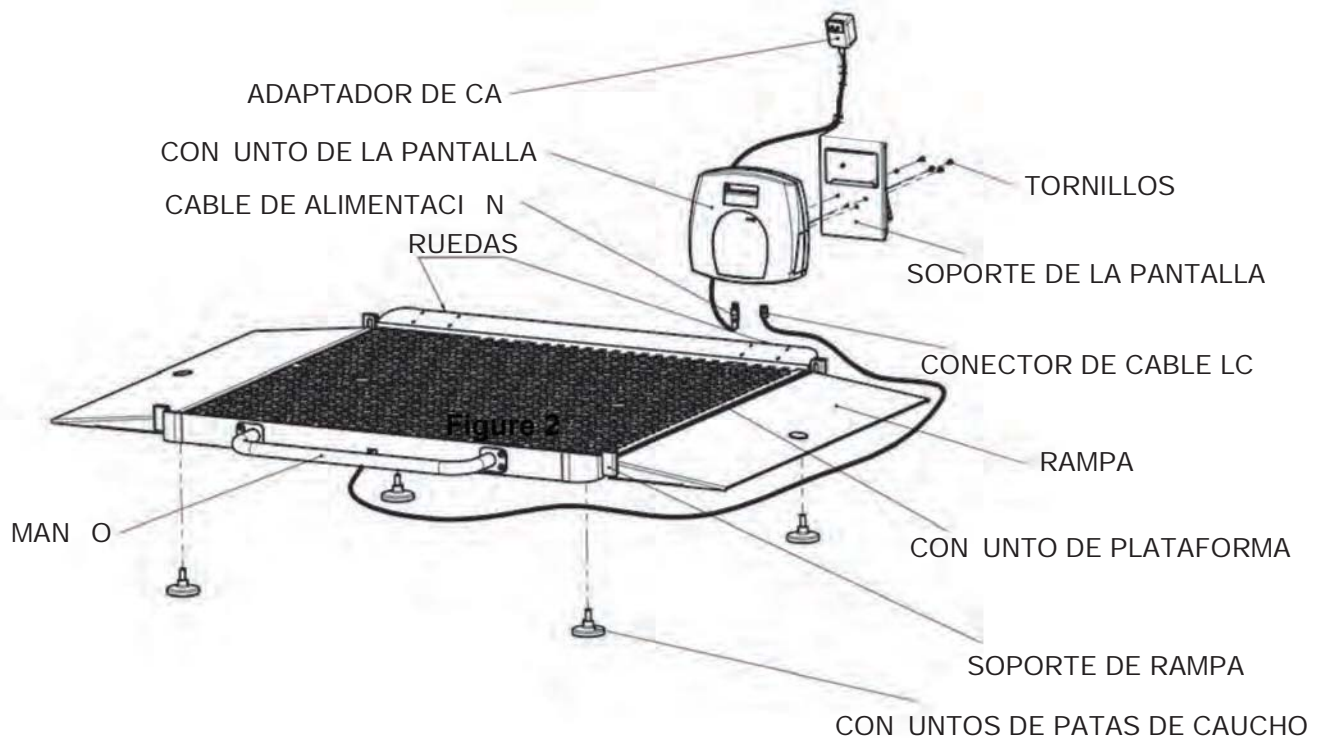


Figura 2

(refiérase a la Lista de Piezas en la página 106 y 108 para detalles de las piezas)

1. Abra la balanza para que quede en posición operacional.
2. Conecte el cable conector de la cula de carga al puerto de la cula de carga en la parte posterior de la unidad de pantalla e inserte y asegure el cable en el canal central de la pantalla.

NOTA: No una el Cable de Energía en este momento.

3. Conecte el cable de la cula de carga a la unidad de pantalla. Ver Figura 2.

NOTA : El cable de la cula de carga se debe suetar en este momento al canal, entre la unidad de pantalla y el soporte de la pantalla.

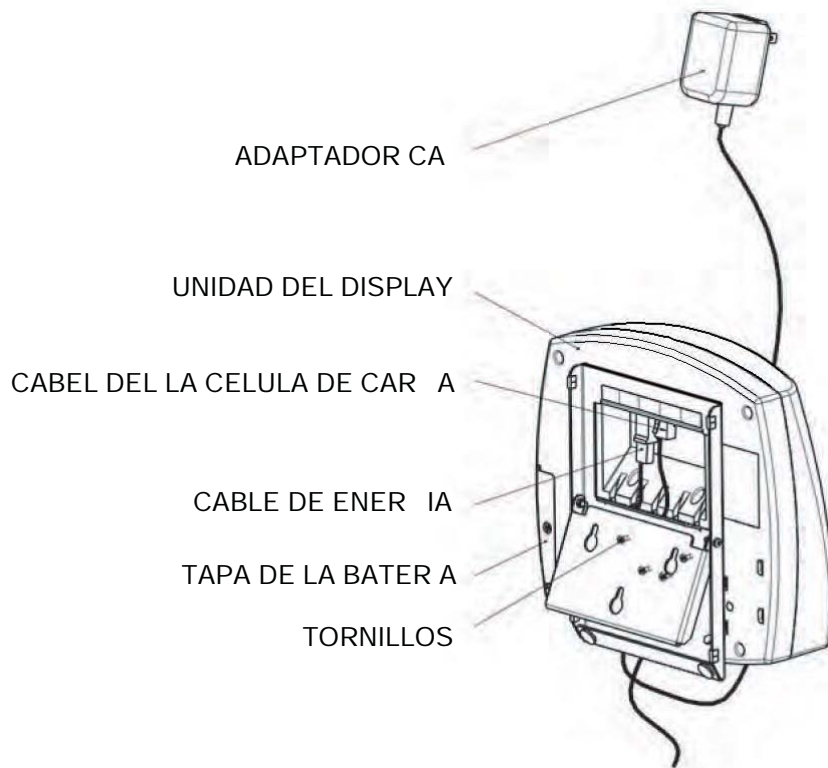


Figura 2
(refiérase a la Lista de Piezas en la página 102 para detalles)

4. Inserte el cable de alimentación en la ranura de retención. Alinee las lengüetas de la tapa trasera con las ranuras en la parte trasera de la unidad de pantalla. Sujete con 4 tornillos.
- Incline suavemente la balanza. Atornille las 4 unidades de pies de goma. No apriete.
- Retorne con cuidado la balanza a la posición vertical.

ATTENTION : No deje caer la balanza sobre sus pies. Esto puede causar daños a la celda de carga.

- Atornille / desatornille los pies de goma para nivelar la balanza.


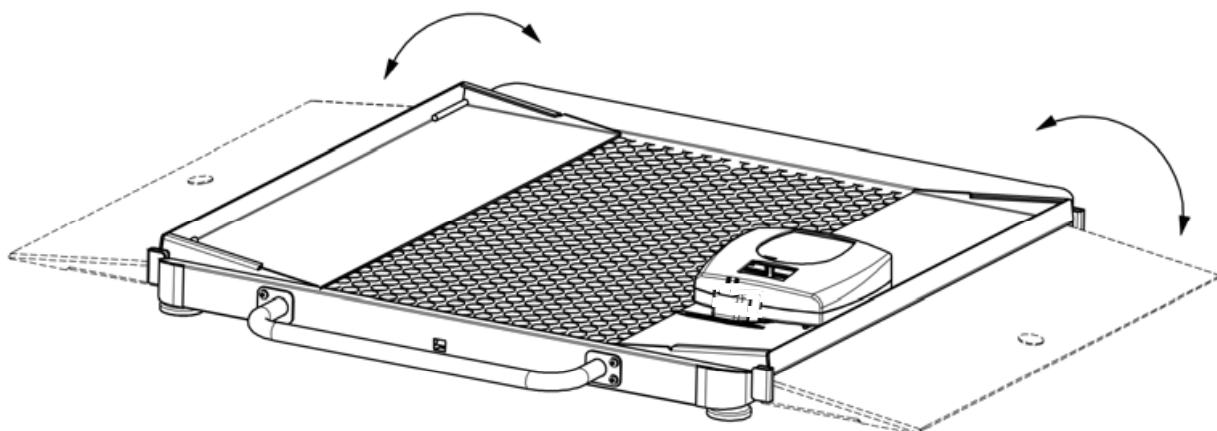


Figura C o plegar la ra pa

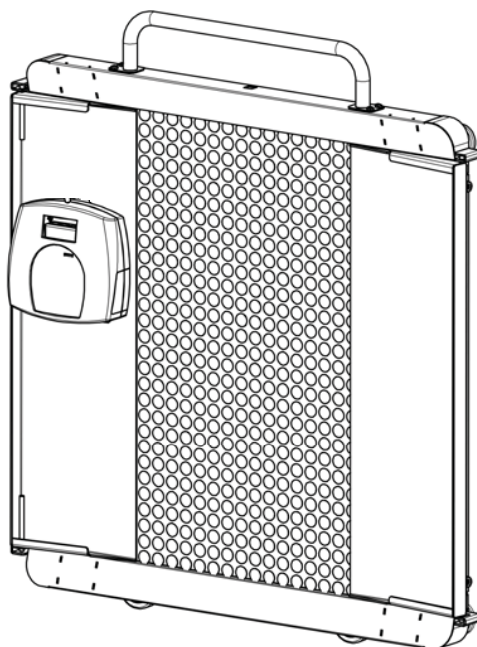1. Este la posibilidad de plegar las 2 rampas sobre la plataforma.
2. El indicador se monta en una de las rampas plegadas deslizando las ranuras de la parte posterior del indicador en los pasadores elevados.
3. Levante la plataforma de la balanza apoyándola de costado para poder transportarla sobre dos ruedas. Ver Figura 4.



PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA

Para evitar lesiones y daños a su balanza, por favor siga estas instrucciones con mucho cuidado.

- No traslade la balanza mientras la plataforma esté cargada.
- Para un pesaje exacto, la balanza debe ser colocada en una superficie plana, estable.
- Para un pesaje exacto, verifique antes de cada uso el funcionamiento correcto según los procedimientos descritos en este manual.
- No use en presencia de materiales inflamables
- El uso a voltajes y frecuencias que no sean los especificados puede dañar el equipo. Si el indicador de “LO BAT” se activa, para un pesaje exacto, cambie las baterías o conecte la balanza a una fuente de energía CA, lo más pronto posible.

ESPECIFICACIONES

GENERALIDADES

Las Balanzas Electrónicas ProPlus™ Modelos 1100KL, 2650KL y 2700KL de Health o meter usan tecnología de microprocesador altamente sofisticada. Cada instrumento de precisión se diseña para dar medidas de peso exactas, confiables, repetibles y características que hacen el proceso de pesaje simple, rápido y conveniente.

La balanza está configurada para usar tecnología de pesaje sensible a movimientos, para determinar el peso de un paciente en movimiento. También es posible modificar la balanza para medir peso vivo; ver página 94 para instrucciones de cómo cambiar la configuración de la balanza.

El peso puede ser presentado en libras (decimales, fracciones de libra o libras / onzas) o en kilogramos. La balanza tiene un pasamanos envolvente para comodidad y seguridad del paciente y un cabezal pivotante giratorio de 180° para leer de cualquier lado de la balanza. Las balanzas con plataforma también incluyen dos ruedas para facilitar su movilidad.

La unidad se puede usar con el adaptador de CA o 6 baterías de elementos D (no incluidas).

ESPECIFICACIONES DE LAS BALANZAS

Capacidad y Resolución 2650KL y 2700KL 1100KL	1,000 Lb x 0,2 Lb / ¼ lb / 4 oz (454 Kg x 0,1 Kg) 700Lb x 0,2 Lb (310 Kg x 0,1 Kg) para 1100KL
Requerimientos de Energía	Adaptador modelo ADPT31*(solo para Estados Unidos y CSA) de 120V CA – 9V CC y 60Hz (INCLUIDO) o 6 pilas D. Adaptador modelo ADPT30*(IEC) de 120-240V CA - 9V CC y 50-60Hz (NO INCLUIDO).
Ambiental	Temperaturas de funcionamiento: 50°F a 95°F (10°C a 35°C) Temperaturas de almacenamiento: 30°F a 125°F (0°C a 50°C) Humedad: 85%

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE LAS BALANZAS

Dimensiones Físicas Model 1100KL	Tamaño de la plataforma Longitud: 18" (46 cm) Ancho: 22" (56 cm) Altura: 2 ¹ / ₃ " (6cm)	Tamaño y peso del producto Longitud: 29 ¹ / ₄ " (74cm) Ancho: 31" (78.7 cm) Altura: 49 ¹ / ₂ " (126 cm) Peso: 53 Lb (24 Kg)
Dimensiones Físicas Model 2650KL	Tamaño de la plataforma Longitud: 36" (91,6 cm) Ancho: 32 ¹ / ₂ " (82,6 cm) Altura: 2 ¹ / ₂ " (6,2 cm)	Tamaño y peso del producto Longitud: 41 ³ / ₅ " (106 cm) Ancho: 56 ¹ / ₄ " (143 cm) Altura: 3 ¹ / ₈ " (8 cm) Peso: 80,5 Lb (36,5 Kg)
Dimensiones Físicas Model 2700KL	Tamaño de la plataforma Longitud: 44" (111 cm) Ancho: 42" (107 cm) Altura: 2 ¹ / ₂ " (6,2 cm)	Tamaño y peso del producto Longitud: 51 ¹ / ₈ " (130 cm) Ancho: 69" (175 cm) Altura: 3 ¹ / ₂ " (9 cm) Peso: 179 Lb (81 Kg)

Utilice solamente la fuente de energía Healthometer Professional, Adaptador modelo ADPT31 *(solo para Estados Unidos y CSA) de 120V CA – 9V CC y 60Hz (INCLUIDO) o 6 baterías de elemento D. Adaptador modelo ADPT30*(IEC) de 120-240V CA - 9V CC y 50-60Hz (NO INCLUIDO).

CONFIGURACIÓN

Esta balanza se envía con el bloqueo de menú activado. Dicha función desactiva algunos botones del teclado para impedir que los usuarios que no estén autorizados efectúen cambios en la configuración. Este bloqueo se puede obviar en forma temporal para adaptar la funcionalidad de la balanza a las necesidades del usuario. En la página 89 encontrará las instrucciones para obviar el Bloqueo de Menú.

1. Quite la película plástica protectora del teclado y de la pantalla.
2. Coloque las baterías en el soporte de las baterías (ver "Cambio de baterías").
3. Enchufe el adaptador CA de la balanza en la fuente de energía.
4. Asegúrese de que no haya ningún objeto sobre la plataforma de peso.
5. Presione la tecla ON/OFF para activar la balanza. La pantalla muestra "Health o Meter Pro Plus" y después "000Lb00oz".^(a)
6. Ponga un peso [no superior a la capacidad] en la balanza. La pantalla deberá mostrar "WEIGH I NG" hasta que el cálculo del peso sea completado y el peso exhibido.
7. Presione la tecla LBS/KG para seleccionar el modo de peso. (Lb/Kg).(b)*
8. Presione la tecla REWEIGH; la balanza deberá realizar el proceso de peso nuevamente.
9. Retire el peso de la balanza, la balanza vuelve a cero y la pantalla exhibe "ZERO" en el lado superior izquierdo de la pantalla juntamente con "000Lb00oz".

NOTE: Si el procedimiento de configuración falla, diríjase a las instrucciones de solución de problemas. Si el problema no es corregido, refiérase al personal de servicio calificado.

^(a) Para ajustar la luz de fondo y/o el contraste, por favor refiérase a la página 94.

^(b) Para cambiar el modo de presentación en libras a fracciones o decimales, por favor refiérase a la página 89.

CONFIGURACIÓN

CAMBIO DE BATERÍAS

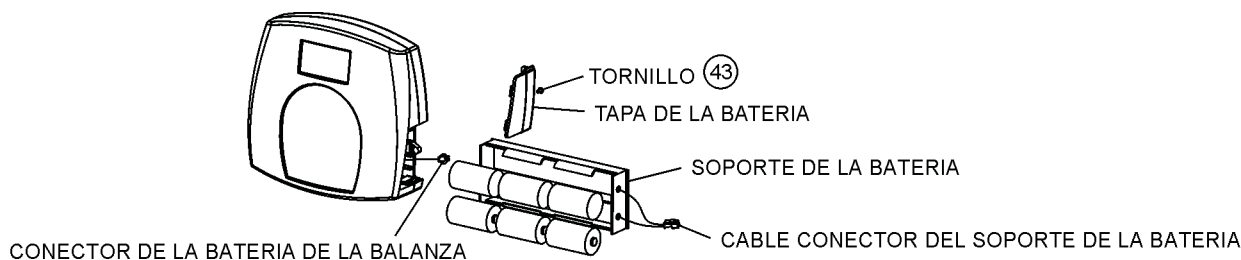


Figura 5. CAMBIO DE BATERÍAS

1. Desenchufe la balanza.
 2. Saque la tapa de la batería de la unidad de pantalla.
 3. Desconecte conector de cable del soporte de batería del conector de la batería de la balanza.
 4. Con cuidado, saque el soporte de batería de la unidad de pantalla.
 5. Substituya las baterías por baterías nuevas.**
 6. Enchufe el conector de cable del soporte de la batería al conector de batería de la balanza..
 8. Una la tapa de la batería a la unidad de pantalla e instale el tornillo.
- ** Recomendamos el uso de baterías EVEREADY Energizer® e2™.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

LA PONDERACIÓN DE UN PACIENTE

1. Asegúrese de que no haya ningún objeto sobre la plataforma de peso.
2. Presione la tecla ON/OFF para activar la balanza.

Health o Meter
Pro-Plus

3. Espere que aparezca "000Lb00oz" y "ZERO" en el lado izquierdo de la pantalla.
4. Pida al paciente que suba en la balanza. La pantalla deberá mostrar "WEIGHING" hasta que se presente el peso de la persona.
5. Si usted desea volver a pesar sin pedir al paciente que baje y suba otra vez a la balanza, presione la tecla REWEIGH.
6. Pida al paciente que baje de la balanza.

NOTA : La balanza siempre vuelve a la configuración y las unidades usadas por últi

ATENCIÓN: Si la báscula no va a ser utilizada durante un periodo prolongado de tiempo, retire las pilas para evitar cualquier problema de seguridad.

FUNCIÓN DE TARA

Al usar la báscula, el peso de un objeto como, por ejemplo, una silla de ruedas o los zapatos del paciente, se puede restar del peso total para determinar únicamente el peso del paciente. La función de tara realiza automáticamente esta resta y evita tener que hacer cálculos manuales. La báscula Pro Plus permite introducir el valor de tara automática o manualmente.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INTRODUCCIÓN DE LA TARA MANUALMENTE

1. Asegúrese de que no hay ningún objeto sobre la plataforma para pesar.
2. Pulse el botón de encendido/apagado "ON/OFF" para encender la báscula.
3. Espere hasta que aparezca "000LB00oz" y "ZERO" en el lado izquierdo de la pantalla.
4. Pulse el botón TARE (9). Se le solicitará al usuario que introduzca el valor de tara.
5. Use el teclado para introducir el peso del objeto que se quiere restar (por ejemplo, la silla de ruedas) y pulse ENTER.
6. El valor introducido se mostrará como un valor negativo.
7. Coloque en la báscula al paciente y el objeto cuyo peso se ha restado. La báscula resta de forma automática la tara al peso bruto del paciente y el objeto.
8. El peso del paciente aparece en la báscula.
9. La tara que se ha restado se almacena en la memoria hasta que se cambie o se borre.
10. Para borrar el valor de la tara, vuelva a pulsar el botón TARE (9). La palabra "TARE" desaparece de la pantalla y el valor se elimina de la memoria. La báscula reanuda el funcionamiento normal.

PARA OBTENER INSTRUCCIONES ADICIONALES SOBRE CÓMO INTRODUCIR EL VALOR DE TARA AUTOMÁTICA O MANUALMENTE, CONSULTE LA PÁGINA .

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL

1. Realice los pasos del 1 al 4 que aparecen anteriormente en el apartado sobre cómo pesar a un paciente.
2. Pulse el botón BMI (2).
3. La báscula le solicitará que introduzca la altura del paciente. Use el teclado para hacerlo.

Nota: Si introduce el peso en libras, la altura se indica en incrementos de $\frac{1}{4}$ de pulgada. Para introducir la parte fraccional de la altura, pulse 1 para $\frac{1}{4}$ de pulgada, pulse 2 para $\frac{1}{2}$ pulgada y 3 para $\frac{3}{4}$. Si introduce el peso en kilogramos, la altura se indica en incrementos de 1 cm.

4. Pulse ENTER.
5. La pantalla muestra ahora el índice de masa corporal del paciente.
6. Pulse ENTER para volver al funcionamiento normal de peso.

Nota: La báscula no calcula el índice de masa corporal en un paciente que pese 24 libras (12 kg) o menos. Si no se introduce la altura en un período de 30 segundos tras pulsar la tecla BMI, la báscula reanuda su funcionamiento normal.




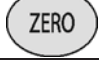










2650KL & 2700KL



1100KL

Figura 6: Teclado numérico

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
	POWER	Conecta (ON) y desconecta (OFF) la balanza.
	ZERO	Pone en cero la balanza antes del pesaje.
	HOLD/RELEASE	Mantiene el valor del objeto pesado en la pantalla hasta que se presione el botón otra vez para borrar el valor. También usado para moverse hacia abajo en el menú.
	REWEIGH	Permite varios pesajes del paciente sin salir de la balanza
	KG/LB	Alterna entre kilogramos y libras. También se utiliza para desplazarse por el menú. Para activar o desactivar únicamente el modo (bloqueo) KG o LB, presione y mantenga presionado del botón KG/LB durante 13 segundos. Ver COMENTARIO más abajo.
	MENU	Manténgalo presionado por 5 segundos para ingresar al menú de la balanza.
	BMI	Solicita la entrada de datos para calcular el Índice de Masa del Cuerpo (Body Mass Index - BMI) del paciente.
	PRINT	Imprime los datos del paciente (si la impresora está conectada a la balanza).
	ID	Muestra la entrada correspondiente al número de identificación del paciente (ID). Este ID se guardará con el peso total hasta que el mismo se elimine o bien se guarde un ID diferente.
	TARE	Solicita la entrada del valor TARA que será deducido del peso en la plataforma. También libera el peso tara (vuelve el pantalla a cero)
	EXIT	Vuelve un paso atrás en los modos del menú o de entrada de datos.
	ENTER	Usado para introducir comandos y valores en la balanza.

COMENTARIO: El modo de bloqueo evita que la balanza alterne entre KG y LB hasta desactivarse.

MENÚ

En pantalla del menú el usuario puede establecer preferencias y/o enseñar a la balanza a manejar datos almacenados. Es posible navegar por el menú con las teclas ([^]v) (arriba o abajo), o introduciendo el número del menú asociado al teclado. El menú tiene un modo de funcionamiento “roll-over”: cuando el usuario va hasta el final del menú y presiona la tecla abajo, se vuelve al inicio del menú.

MENULOCK

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

COMENTARIO: El modo predeterminado de la balanza se ajusta de manera tal que la opción de menú quede bloqueada. Si se pulsa el botón Menú antes de activar la opción de menú, Bloqueodemen aparecerá en pantalla. Para reactivar temporalmente el uso de la tecla MEN, presione y mantenga presionada durante segundos. Mientras espera acceder al menú, el mismo mostrará Bloqueodemen. Después de segundos, el menú se mostrará en pantalla y así podrá comenzar a navegar por el mismo.

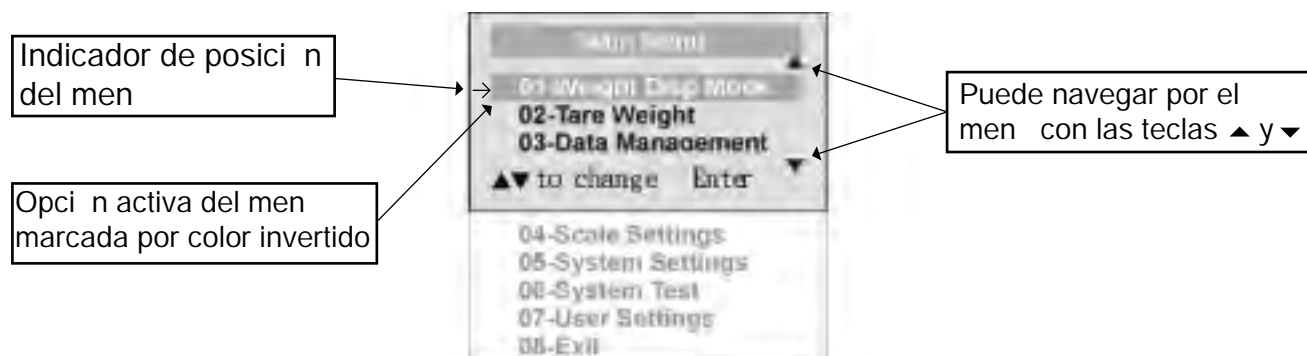


Figura 3. Menú principal

01 MODO DE PRESENTACIÓN DEL PESO

(aplicable solamente a valores en libras, NO a valores métricos)

Antes de efectuar cambios a esta configuración de la balanza, consulte las instrucciones Menú arriba para activar temporalmente la tecla Menú.

El usuario puede ajustar el valor de la pantalla en cualquier fracción de libra (, lb), en libras y en onzas (resolución de 4 onzas) o en decimales (resolución de 0,2 lb). Si se selecciona kg como unidad de uso, estos ajustes no tendrán ningún tipo de efecto. El modo seleccionado se utilizará a través de las pantallas.

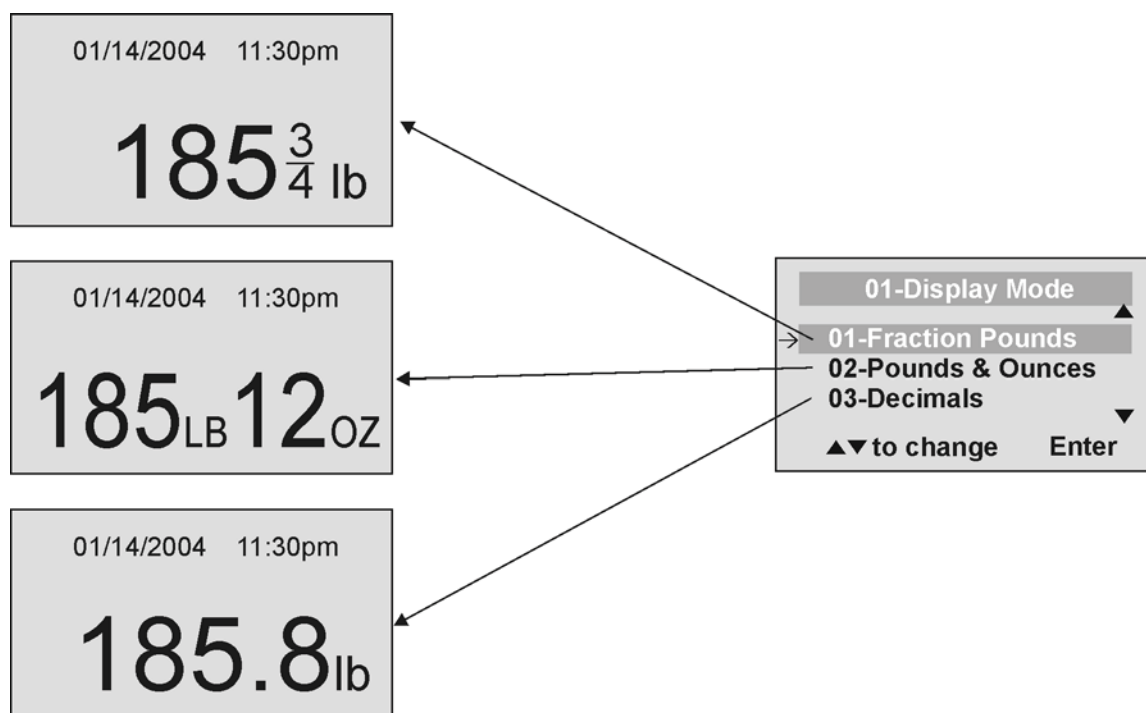


Figura 4. Modo de Presentación del Peso

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

02 PESO TARA

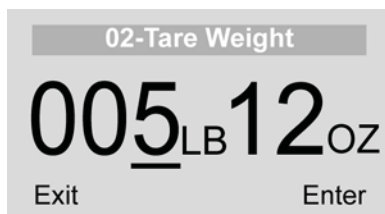
Antes de efectuar cambios a esta configuración de la balanza, consulte la página 89, "Menú" para activar temporalmente la tecla "Menú".

NOTA: Debido a la sensibilidad de la balanza, recomendamos usar la función REWEIGH (VOLVER A PESAR) antes de establecer el peso TARA, a fin de eliminar cualquier interferencia del operador en el elemento cuyo peso tara se establecerá.

Existen dos maneras de introducir manualmente un peso tara (así como el peso de una silla de ruedas, zapatos, etc.): presione MENU (1) por 5 segundos y elija la opción 02-Tare Weight o presione TARE (9). Si no hay ningún peso en la plataforma de la balanza (el valor exhibido es cero y no hay tara) y el usuario presiona el botón TARE (9), aparece la ventana del Peso Tara y solicita al usuario que introduzca el valor TARA y presione ENTER. NOTA: El peso tara debe ser introducido con los siguientes incrementos: 4oz, 0.2lb, ¼ lb. El valor introducido será exhibido en menos (-). Después de introducido el valor TARA, la balanza vuelve al funcionamiento normal. Este valor TARA se almacena en memoria hasta que se lo cambia o elimina. Si la tara no se ingresa en 30 segundos, la balanza vuelve al funcionamiento normal y se activa el Bloqueo de Menú.

Importante: El peso de TARA no puede exceder las 250 lb. (2650KL y 2700KL).
El peso de TARA no puede exceder las 250 lb (1100KL)

La pantalla de TARE indica el peso disminuido (La Figura 9 muestra la pantalla luego de retirada la tara de la plataforma de la balanza).



El número que debe ser cambiado parpadea y pasa de la izquierda a la derecha después de que el número apropiado se ha introducido o usando la tecla ▲ (izquierda) y la tecla ▼ (derecha).



Figura 9. Peso tara

Tara Automática

El usuario puede establecer un peso tara presionando el botón TARE (9) mientras hay un peso en la plataforma de la balanza. La pantalla pasa a cero y la palabra "TARE" (TARA) será exhibida para indicar que hay un valor tara en la memoria (como se ilustra en la Figura 9 arriba).

Para retirar la tara

Al pulsar una vez más el botón TARE se suprime el valor tara de la memoria, TARA desaparecerá de la pantalla y la balanza seguirá en funcionamiento normal.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

03 ADMINISTRACIÓN DE DATOS

Antes de efectuar cambios a esta configuración de la balanza, consulte la página 89, "Menú" para activar temporalmente la tecla "Menú".

La balanza administra los datos del paciente, como ID, peso, altura, tara y BMI (índice de masa corporal). El valor se almacena en la memoria o transfiere al PC. Esta función se realiza abriendo un nuevo archivo de datos.

ABRIR UN NUEVO ARCHIVO DE DATOS:

1. Presione el botón ID (7).
2. Introduzca el número de identificación con el teclado.
3. Presione ENTER.

Esta balanza calcula también el Índice de Masa del Cuerpo (Body Mass Index - BMI).

CALCULAR EL BMI:

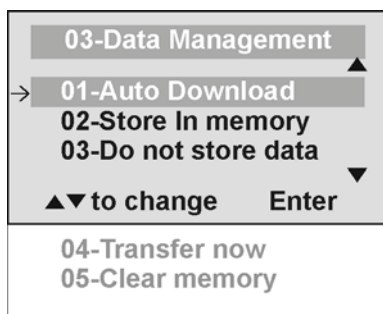
1. Coloque el paciente en la plataforma de la balanza.
2. Presione el botón BMI (2).
3. La báscula le solicitará que introduzca la altura del paciente. Use el teclado para hacerlo.

Nota: Si introduce el peso en libras, la altura se indica en incrementos de $\frac{1}{4}$ de pulgada. Para introducir la parte fraccional de la altura, pulse 1 para $\frac{1}{4}$ de pulgada, pulse 2 para $\frac{1}{2}$ pulgada y 3 para $\frac{3}{4}$. Si introduce el peso en kilogramos, la altura se indica en incrementos de 1 cm.


4. Pulse ENTER.
5. La pantalla muestra ahora el índice de masa corporal del paciente.
6. Pulse ENTER para volver al funcionamiento normal de peso.

Nota: La báscula no calcula el índice de masa corporal en un paciente que pese 24 libras (12 kg) o menos. Si no se introduce la altura en un período de 30 segundos tras pulsar la tecla BMI, la báscula reanuda su funcionamiento normal.

La balanza ofrece dos opciones para administrar la información: transferir / descargar los valores o almacenarlos. La primera opción descarga (transfiere) automáticamente los valores a su PC. La segunda opción almacena el valor en la memoria. La capacidad máxima de la balanza es de 270 archivos con datos distintos.




01 Descarga Automática

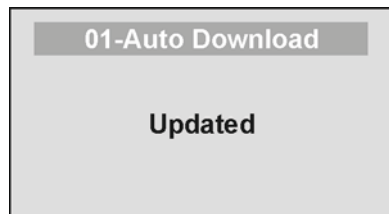


Descarga Automática es la opción predeterminada y transfiere el valor al PC en cuanto el paciente baja de la balanza o cuando el usuario presiona el botón HOLD/RELEASE si estuviera en "HOLD". Si no hay PC conectado, el valor no se transfiere ni almacena, y se pierde después de que la carga se retira de la balanza.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

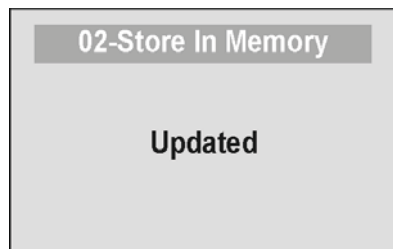
02 Almacenar en la memoria



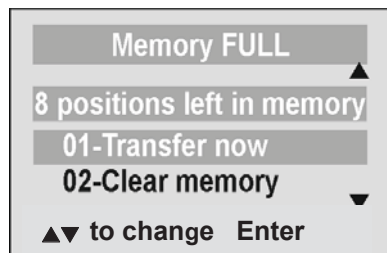El valor se almacena en memoria para ser más tarde descargado al PC. Si la memoria se está por llenar, el usuario será informado y tendrá la opción de transferir todos los valores al PC o eliminar todos los valores de la memoria.




03 No almacenar datos

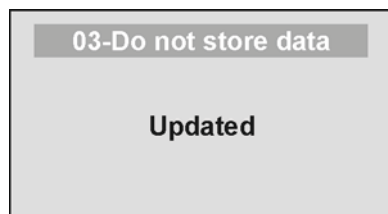


Los datos no se guardan.

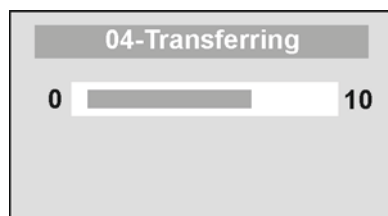04 Transferir ahora



Todos los valores almacenados en memoria se transfieren a PC y se borran todos los valores de la memoria de la balanza. Si la transferencia no tiene éxito, todos los valores se guardan en memoria hasta su transferencia satisfactoria o eliminación.

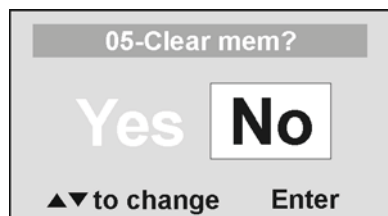
05 Borrar la memoria



Si selecciona SÍ, después presione Enter. Todos los valores guardados en memoria se borran. Si selecciona NO, entonces regresará al menú anterior.


04 CONFIGURACIONES DE LA BALANZA

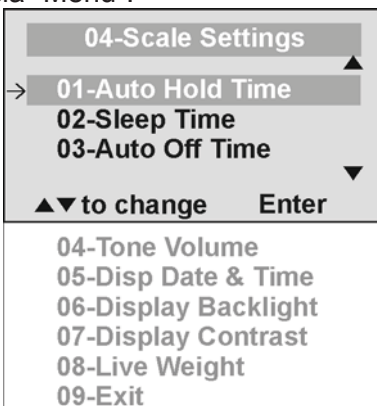Antes de efectuar cambios a esta configuración de la balanza, consulte la página 89, "Menú" para activar temporalmente la tecla "Menú".



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

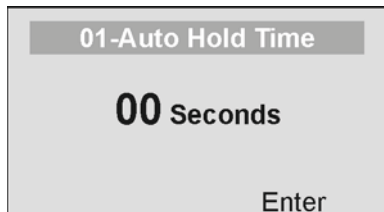01 Tiempo de Espera Automático




01-Auto Hold Time

00 Seconds

Enter

El usuario puede determinar cuanto tiempo durará la pantalla del peso una vez determinado, sin importar si el paciente permanece en la plataforma o no. El valor predeterminado de la balanza es sin Tiempo de Espera Automático. La configuración máxima de Tiempo de Espera es de 20 segundos.

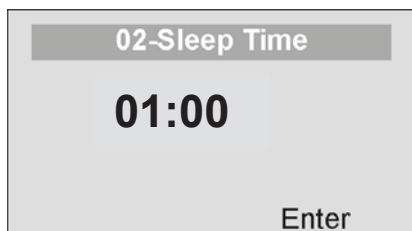02 Tiempo Inactivo



02-Sleep Time

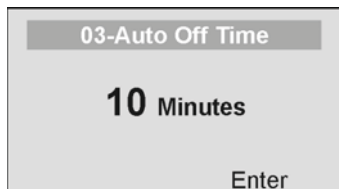
01:00

Enter

El usuario puede determinar el tiempo transcurrido antes de que la balanza pase al modo inactivo. El valor predeterminado es de 1 minuto. Cuando la balanza pasa al modo inactivo, aparece STANDBY en pantalla. El ajuste máximo para el temporizador de apagado es de 10 minutos.

STANDBY

03 Apagado Automático




03-Auto Off Time

10 Minutes

Enter

El usuario puede determinar el tiempo de funcionamiento de la balanza antes de apagarse automáticamente debido a inactividad. El tiempo predeterminado es de 10 minutos. Si el valor se establece en cero, la función Apagado Automático es desactivada. El ajuste máximo para el temporizador de apagado automático es de 60 minutos.

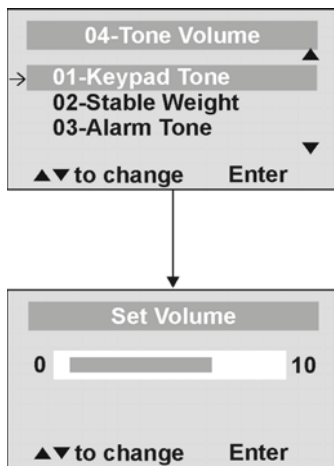04 Volumen del Tono



04-Tone Volume

→ 01-Keypad Tone

02-Stable Weight

03-Alarm Tone

▲▼ to change Enter

Set Volume

0 [Slider] 10

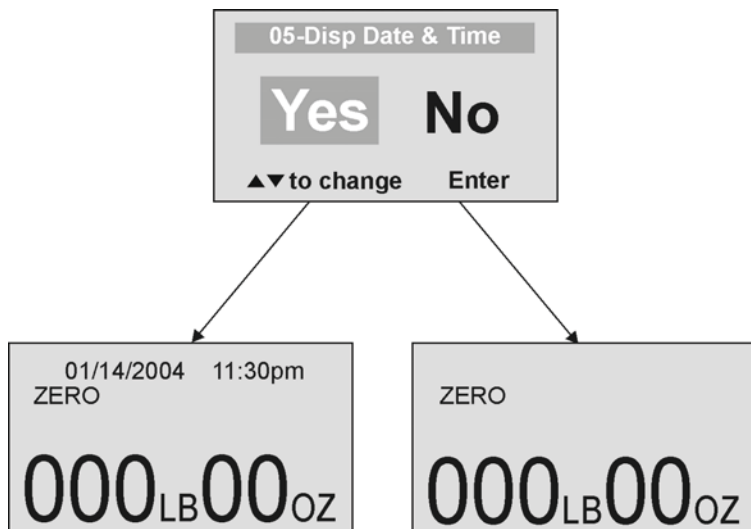
▲▼ to change Enter

Existe una opción para ajustar el tono del beep de la balanza. Este tono suena una vez que la balanza determina el peso en la plataforma, cuando se presiona una tecla, después de que la balanza es activada, al final de la auto-prueba, o en caso de fallo o advertencia.

Use las teclas ▲ y ▼ del teclado para ajustar el volumen. Cuando el usuario presiona la tecla para cambiar el volumen, suena un beep para indicar el ajuste del nivel del volumen.


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

05 Exhibir Fecha y Hora




Esta opción activa o desactiva la pantalla de la fecha y hora.

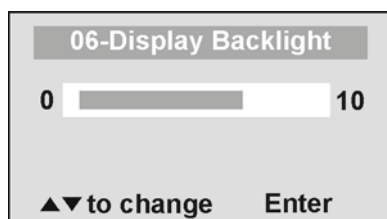06 Luz de Fondo de la pantalla




El usuario puede establecer el brillo de la luz de fondo.

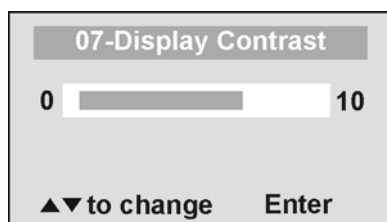07 Contraste del Display



El usuario puede ajustar el contraste de la pantalla LCD.

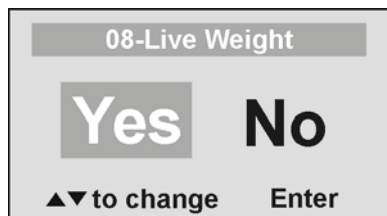08 Peso Vivo




Al seleccionar "Yes" el usuario puede establecer el modo Peso Vivo para desactivar el modo Sensible a Movimientos. En el modo Peso Vivo el peso presentado oscila con los movimientos del paciente, la balanza no se traba rápidamente en el peso como en el caso del modo de sensibilidad a movimiento.

Presione el botón REWEIGH (Volver a pesar) para usar el modo Sensible a Movimientos y determinar el peso exacto en pantalla. Para retornar al modo Sensible a Movimientos, cambie la configuración de Peso Vivo a "No".

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


05 CONFIGURACIONES DEL SISTEMA

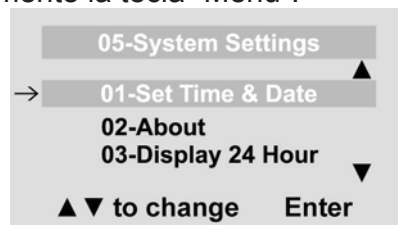Antes de efectuar cambios a esta configuración de la balanza, consulte la página 89, "Menú" para activar temporalmente la tecla "Menú".



01 Fijar Hora y Fecha

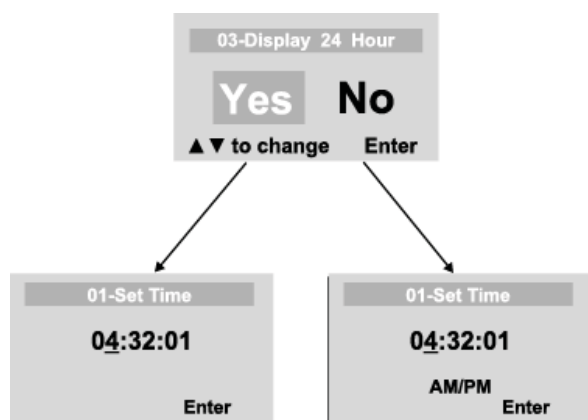El usuario puede fijar la hora y la fecha usando el teclado.




Para ajustar la hora, desplácese por las horas, los minutos y los segundos utilizando las teclas arriba y abajo ▲ y ▼ e ingrese los valores en el teclado. Si Visualización de 24 horas se ajusta en SÍ, no ajuste AM/PM. Si visualización de 24 horas se ajusta en NO, pase a la línea AM/PM y pulse el botón ENTER una sola vez.



Fije la fecha usando las teclas arriba y abajo ▲ y ▼ e introduzca los valores en el teclado.

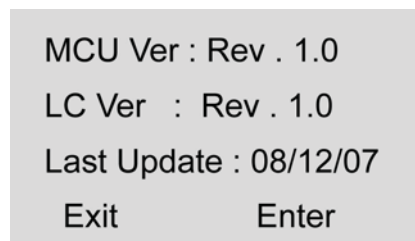
02 Acerca de



Esta pantalla muestra la versión del software de la balanza.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

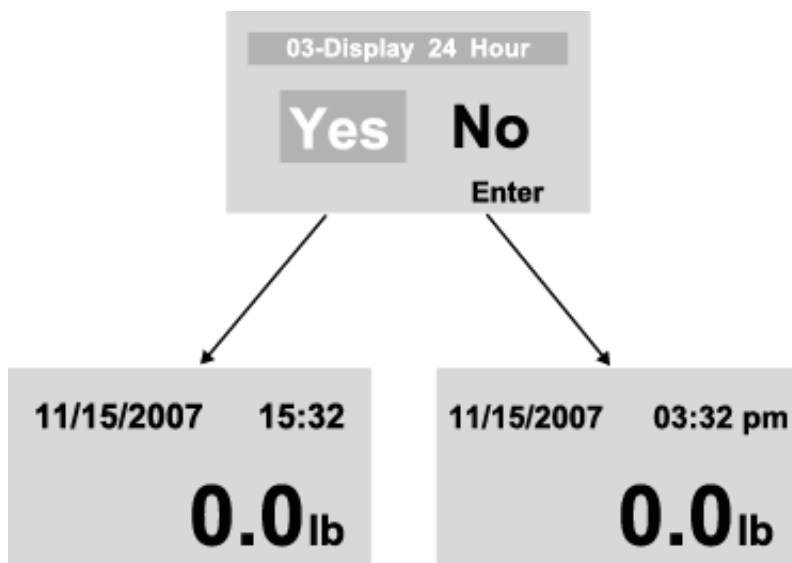
03 Visualización de 24 horas




Existen dos opciones de visualización de hora: 12 horas (AM/PM) y 24 horas.

06 PRUEBA DEL SISTEMA

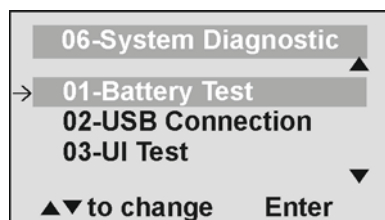Antes de efectuar cambios a esta configuración de la balanza, consulte la página 89, "Menú" para activar temporalmente la tecla "Menú".



01 Prueba de la Batería

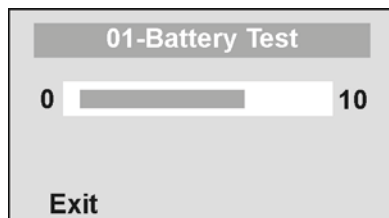

La balanza presenta la vida de servicio restante estimada de las baterías hasta que haya que reemplazarlas.

NOTA: Para completar la prueba de la batería, la balanza debe ser activada solamente por baterías. Desconecte la balanza de la fuente de energía de CA antes de la prueba de la batería.

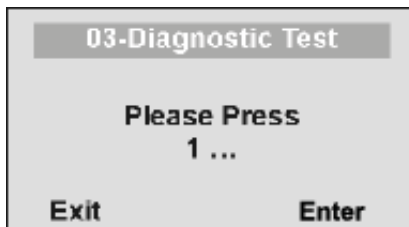
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

02 Conexión USB




La balanza prueba la conexión al PC y presenta el mensaje "Conexión OK" o "SIN conexión". En caso de visualización de "SIN conexión", verifique las conexiones USB de la balanza y del PC y vuelva a probar la conexión. Recorra a personal calificado de servicio si el problema persiste.


03 Prueba UI



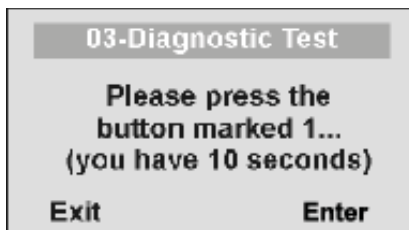La balanza tiene una rutina de diagnóstico en la que prueba la funcionalidad del hardware (LCD, teclado) de interface del usuario (UI). En caso de visualización de "SIN conexión", verifique las conexiones USB de la balanza y del PC y vuelva a probar la conexión. Recorra a personal calificado de servicio si el problema persiste.



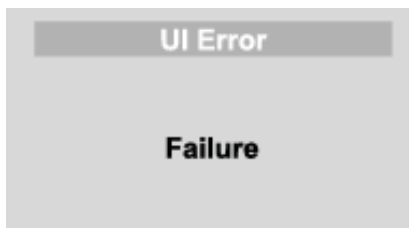
Si el comando solicitado no fue recibido o un botón equivocado fue presionado, el siguiente mensaje será presentado.



Si después 10 segundos no se ha recibido el comando solicitado, aparecerá el mensaje siguiente. Si aparece "UI Error Failure", recurra a personal de servicio calificado.

07 CONFIGURACIONES DEL USUARIO

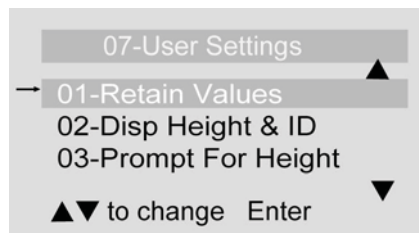
Antes de efectuar cambios a esta configuración de la balanza, consulte la página 89, "Menú" para activar temporalmente la tecla "Menú".



04-Prompt For ID
05-Exit


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

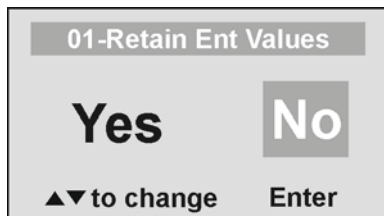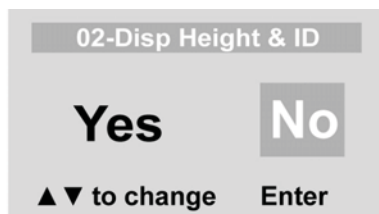01 Conservar los Valores Introducidos


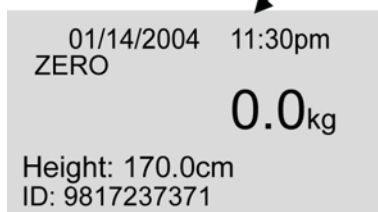


Esta opción permite al usuario usar los mismos valores de ID, altura y TARA entre pesajes. Si esta opción es desactivada, el usuario debe volver a ingresar estos valores para cada lectura. Si no se introducen los valores, solamente se almacena el peso.
NOTA: Estos valores no pueden ser conservados por el número de ID.

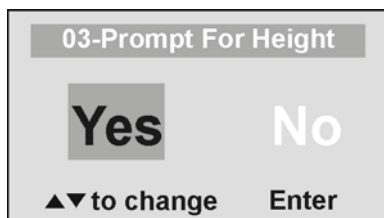
02 Exhibir Altura e ID




Cuando el usuario elige presentar la altura y la ID del paciente, se los exhibe en la parte inferior de la pantalla. Recomendamos usar esta función para asegurarse de que se ha introducido la ID y altura correctas.




03 Solicitud de Altura



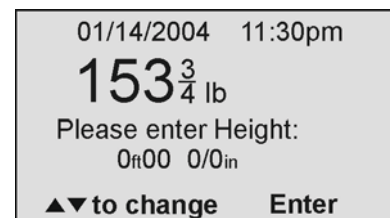
Cuando esta opción es activada, el usuario es solicitado a introducir la altura del paciente después de cada pesaje. El operador tiene 30 segundos para ingresar la altura.



04 Solicitud de ID

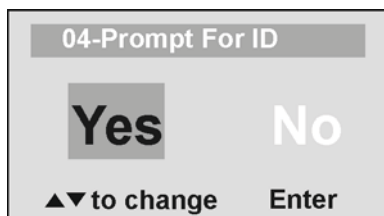

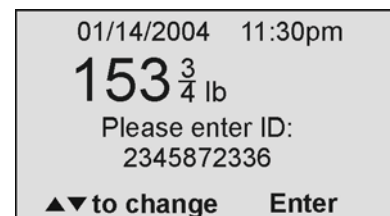Cuando esta opción es activada, el usuario es solicitado a introducir el número de ID del paciente después de cada pesaje. El operador tiene 30 segundos para ingresar el número de identificación.



MANTENIMIENTO

GENERAL

Esta sección da instrucciones de mantenimiento, limpieza, solución de problemas y piezas que el operador puede cambiar, para la Balanza Electrónica Pro Plus™. Las demás operaciones de mantenimiento, no descritas en esta sección, deben ser realizadas por el personal de servicio calificado.

MANTENIMIENTO

Antes de usarla por primera vez y después de periodos sin usarla, verifique el funcionamiento y uso apropiados de la balanza. Si la balanza no funciona correctamente, diríjase al personal de servicio calificado.

1. Verifique el aspecto total de la balanza para saber si hay daños o desgaste obvios.
2. Inspeccione el adaptador de CA para verificar que los cordones no presenten grietas ni corrosión y las puntas no estén rotas, torcidas ni desgastadas.

LIMPIEZA

El cuidado y la limpieza apropiados son esenciales para asegurar una vida de servicio prolongada y eficaz.

Desconecte la balanza de la fuente de energía CA.

1. Limpie todas las superficies externas con un paño húmedo limpio o paños de papel. Se puede usar una solución suave de jabón antibacteriano y agua. Seque con un paño suave limpio.
2. No sumerja la balanza en soluciones de limpieza u otros líquidos.
3. No use Alcohol Isopropílico u otras soluciones para limpiar la superficie de la pantalla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte las siguientes instrucciones para verificar y corregir cualquier fallo antes de contactar el personal de servicio.

SÍNTOMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN CORRECTIVA
La balanza no se prende	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batería terminada 2. Tomacorriente defectuoso 3. Fuente de energía 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambie las baterías 2. Use otro tomacorriente 3. Cambie el adaptador
Peso cuestionable o la balanza no vuelve a cero	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objeto externo interfiriendo en la balanza 2. La pantalla no antes del pesaje 3. La balanza no está sobre una superficie estable 4. La balanza no está calibrada 5. Tara inadecuada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remueva de la balanza el objeto que está interfiriendo. 2. Pida al paciente que baje de la balanza, vuelva la balanza a cero y empiece el proceso de pesaje nuevamente 3. Coloque la balanza en una superficie estable y empiece el proceso de pesaje nuevamente 4. Verifique el peso con un valor de peso conocido 5. Coloque el elemento a ser considerado peso tara en la balanza. Presione REWEIGH. Cuando el peso del elemento aparece en pantalla, presione TARE. Coloque el paciente y el elemento tara nuevamente en la balanza. Presione REWEIGH otra vez.
El pesaje es ejecutado pero pantalla muestra "weigh" y "reweigh" a cada pocos segundos; el proceso de pesaje es muy demorado y ningún peso es exhibido.	El paciente no está parado.	Pida al paciente pararse quieto o cambie a la configuración de peso vivo.
La pantalla muestra el mensaje "Overload"	La carga en la balanza supera la capacidad	Retire el peso excesivo y respete los límites de peso de la balanza
La pantalla muestra el mensaje "LOW BAT"	Las baterías están descargadas.	Cambie las baterías según las instrucciones
La pantalla exhibe el "Load Cell Error"	Existe un problema con una o de las células de carga o el de las células de carga está desconectado.	Verifique el cable de conexión de las células de carga en la pantalla y puertos de montaje de la plataforma. Si el problema no se resuelve, recurra a personal de servicio calificado para reemplazar la pila de carga defectuosa.
Se visualiza "MenuLock" (Bloqueo de Menú) en la pantalla al presionar la tecla MENÚ.	No se activó la tecla MENU.	Mantenga presionado el botón MENU 10 segundos para activarlo.

TRAYECTORIA DE CALIBRACIÓN

Este equipo ha sido calibrada en la fábrica y no requiere volver a calibrarse antes de ser usada.

La calibración se hace en kg o lb, según las unidades de medida usadas al entrar a la trayectoria de calibración.


01-Proceso de Calibración de un punto a continuación:

Acción del operador	Visualización
1. Asegúrese de que la balanza esté apagada y luego apriete y mantenga apretado el botón PRESIONAR/SOLTAR mientras presiona el botón ENCENDIDO/APAGADO.	Introducir peso de carga: 450,0LB(ó 200,0KG)
2. Introduzca el peso y luego presione ENTER.	Introducir peso de carga: 450,0LB(ó 200,0KG)
3. Asegúrese de que no haya ningún objeto sobre la plataforma y pulse la tecla ENTER.	Calibración en cero Despeje la balanza
4. Espere 1 a 3 segundos aproximadamente, hasta que finalice la Calibración en cero.	Calibración en cero Espere
5. Coloque el peso sobre la plataforma y luego presione ENTER.	Calibración del peso Colocar: XXX.X
6. Se calibra a los 1 / 3 segundos.	Calibración del peso Espere
7. Si la calibración es satisfactoria, aparece ¡Factor correcto! en pantalla. De lo contrario, se mostrará Fallo del factor.	Actualización del factor ¡Factor correcto! (o Fallo del factor)
8. Al finalizar el proceso, se borra el peso.	Reiniciando... Espere
9. La balanza se reiniciará después de 1 a 2 segundos aproximadamente.	Health o Meter Pro-Plus
10. Espere hasta que la balanza reanude su funcionamiento normal. Quite el peso de la plataforma.	Health o Meter Pro-Plus

VISTA DETALLADA

Las balanzas 1100KL, 2650KL y 2700KL ProPlus™ tienen el mismo módulo de pantalla. Consulte esta página para ver las piezas del módulo de pantalla de estas balanzas. Se incluyen vistas detalladas y listados de piezas para los demás componentes de la balanza en las páginas que siguen al listado de piezas del módulo de pantalla.

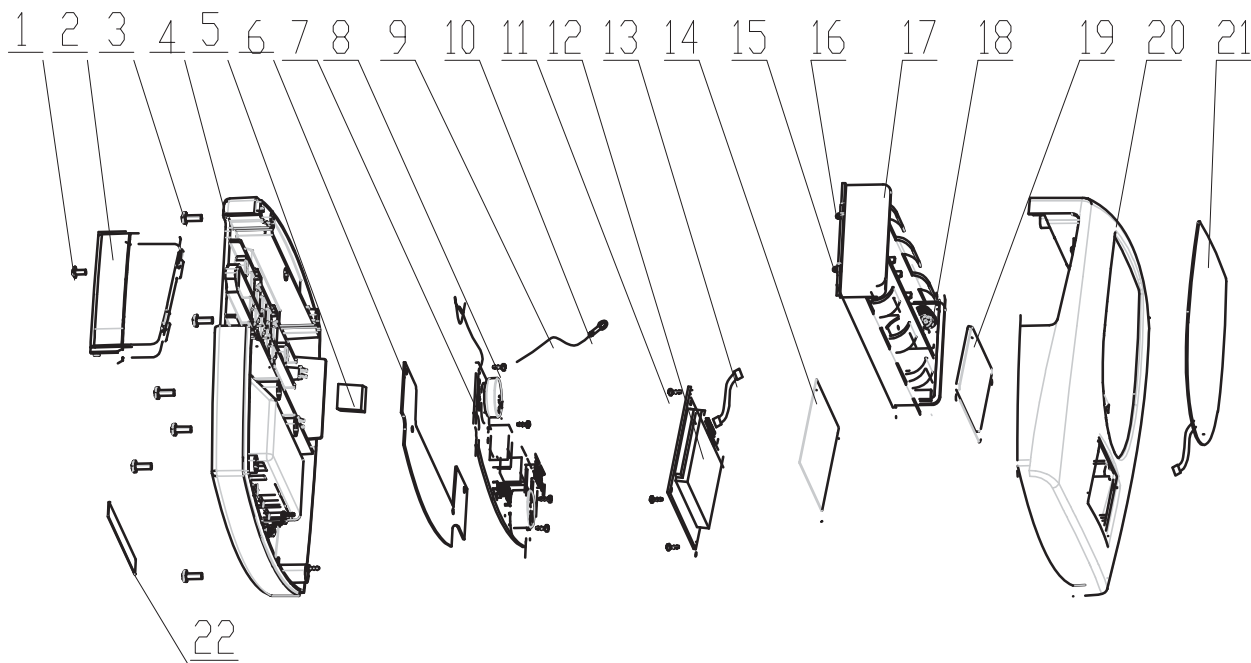
MODELOS 1100KL, 2650KL Y 2700KL VISTA DETALLADA DE LA UNIDAD DE DISPLAY DE LA BALANZA



LISTE DES PIECES DU BLOC D’AFFICHAGE – TOUS LES MODELES

N.º clave	N.º de pieza	Descripción	Cant.	Observación
1		TORNILLO M3X6	2	
2	B3822801-0	CUBIERTA DE BATERÍA, ABS (757)	1	
3		TORNILLO M3,5X8	6	
4		PARTE POSTERIOR DEL CABEZAL, ABS+Q235A	1	
5		ESPUMA DE GOMA ADHESIVA DE UN LADO	1	
6		MEMBRANA DE PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTE ESTÁTICA	1	
7		UNIDAD DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO	1	1000 LB para 2650 KL y 1100 KL
7		UNIDAD DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO	1	700 LB para 1100 KL
8		TORNILLO, Φ 3X6	4	
9		CABLE	1	
10		TERMINAL	1	
11		TORNILLO, Φ 2,3 X 8	4	
12		UNIDAD DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESO LCD	1	
13		WIRE	1	
14		STATIC PROTECTION MEMBRANE	1	
15		PLACA NEGATIVA	1	
16		PLACA POSITIVA	1	
17	B2033801-0	SOPORTE DE BATERÍA, PP	1	
18		PLACA NEGATIVA Y POSITIVA	1	
19		LENTE, PC TRANSPARENTE	1	
20		PARTE DELANTERA DEL CABEZAL, ABS+Q235-A	1	
21	B411192	PLACA DE CIRCUITO IMPRESO, ETIQUETA DE BOTONES	1	1000 LB para 2650 KL y 1100 KL
21	B3513101-0	BUTTON LABEL PCB	1	700LB para 1100KL
22	B3245801-0	ETIQUETA DE POSTES DE ENTRADA/SALIDA	1	1100KL

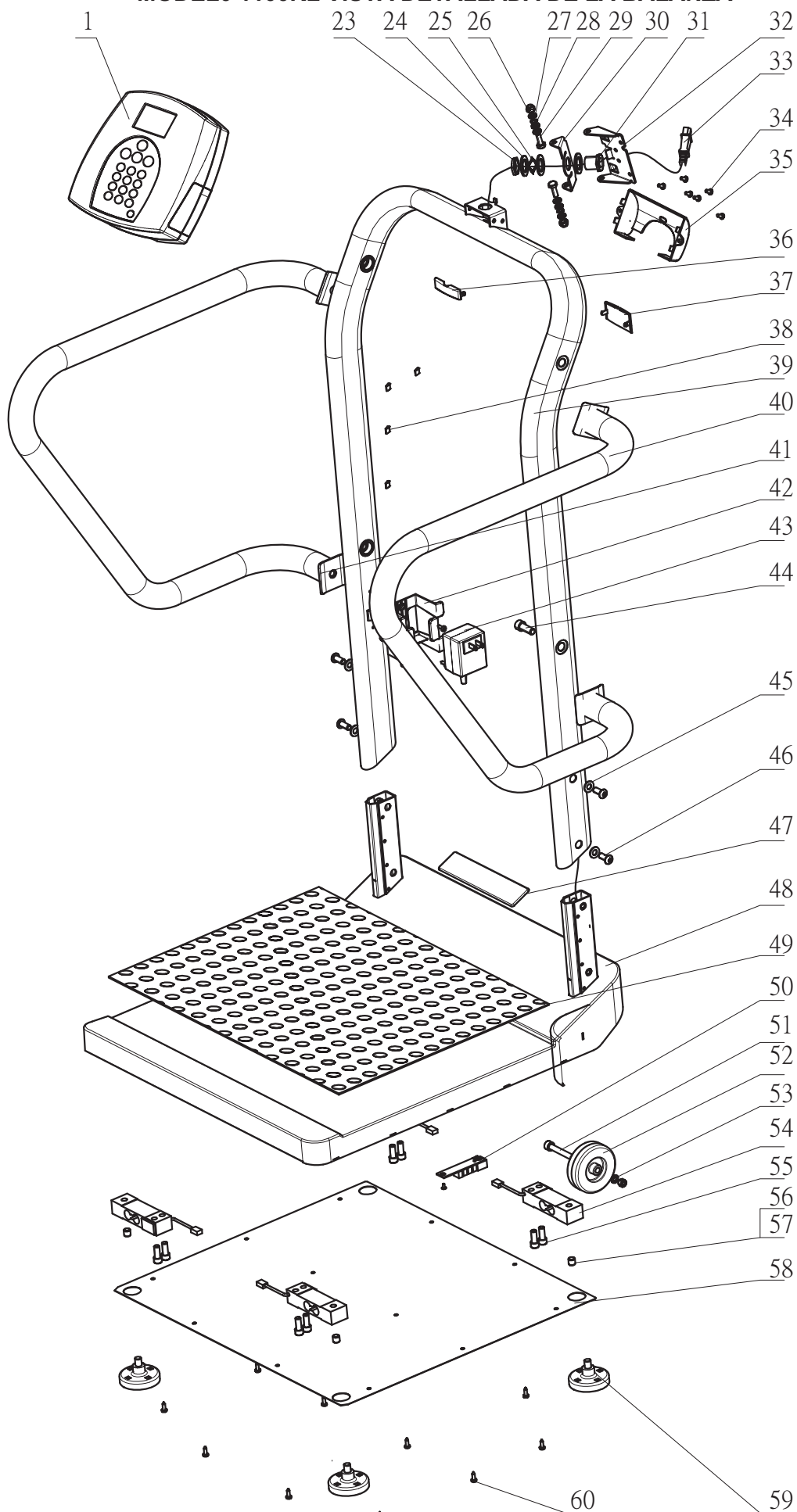
MODELO 1100KL VISTA DETALLADA DE LA BALANZA



MODEL 1100KL PARTS LIST

N.º clave	N.º de pieza	Descripción	Cant.
1	B1109401-0	MECANISMO DE PANTALLA	1
23	B2266901	TUERCA PARA TUBO, 3/4"	1
24	B2266901	ARANDELA DE PLÁSTICO, Ø 19	3
25	B2266901	ARANDELA ELÁSTICA ONDULADA, Ø 19	1
26	B2266901	TUERCA AUTOBLOQUEANTE, M6	4
27	B2266901	ARANDELA DE PLÁSTICO, Ø 6	6
28	B2266901	ARANDELA ELÁSTICA ONDULADA, Ø 6	2
29	B2266901	PERNO, M6X20	2
30	B2266901	PLACA GIRATORIA 1#	1
31	B2266901	PERNO PARA TUBO, 3/4"	1
32	B2266901	PLACA GIRATORIA 2#	1
33	B2033701-0	CABLE DE RED	1
34		TORNILLO, M4X10	6
35	B3822701-0	CUBIERTA DE CABLE	1
36	B3822601-0	CUBIERTA POSTERIOR	1
37	B3822501-0	CUBIERTA DELANTERA	1
38	B401305	ABRAZADERA DE CABLE	4
39		TUBO CURVADO 1#	1
40		TUBO CURVADO 2#	1
41		TUBO CURVADO 3#	1
42	B3817001-0	SOPORTE PARA ADAPTADOR	1
43	ADPT31	ADAPTADOR	1
44		PERNO, M10X40	4
45		ARANDELA, Ø 8	4
46		PERNO, M8X19mm	4
47		MARCA COMERCIAL	1
48	B3822001-0	UNIDAD DE CAJA INFERIOR	1
49		ALFOMBRILLA PARA PIES	1
50	B2138901-0	PLACA DE CIRCUITO IMPRESO, SENSOR	1
51	B2267201-0	PERNO DE UBICACIÓN	2
52	B2267201-0	RUEDA	2
53	B2267201-0	ARANDELA, Ø 6	4
54	B1304202-0	SENSOR	4
55		PERNO, 5/16"X19mm	8
56		TORNILLO, M10X10	4
57		PEGAMENTO, LOCTITE 248	0,2g
58	B3822401-01	CUBIERTA INFERIOR	1
59	B2267201-0	PATAS	4
60		TORNILLO, Ø 4,2X13	14

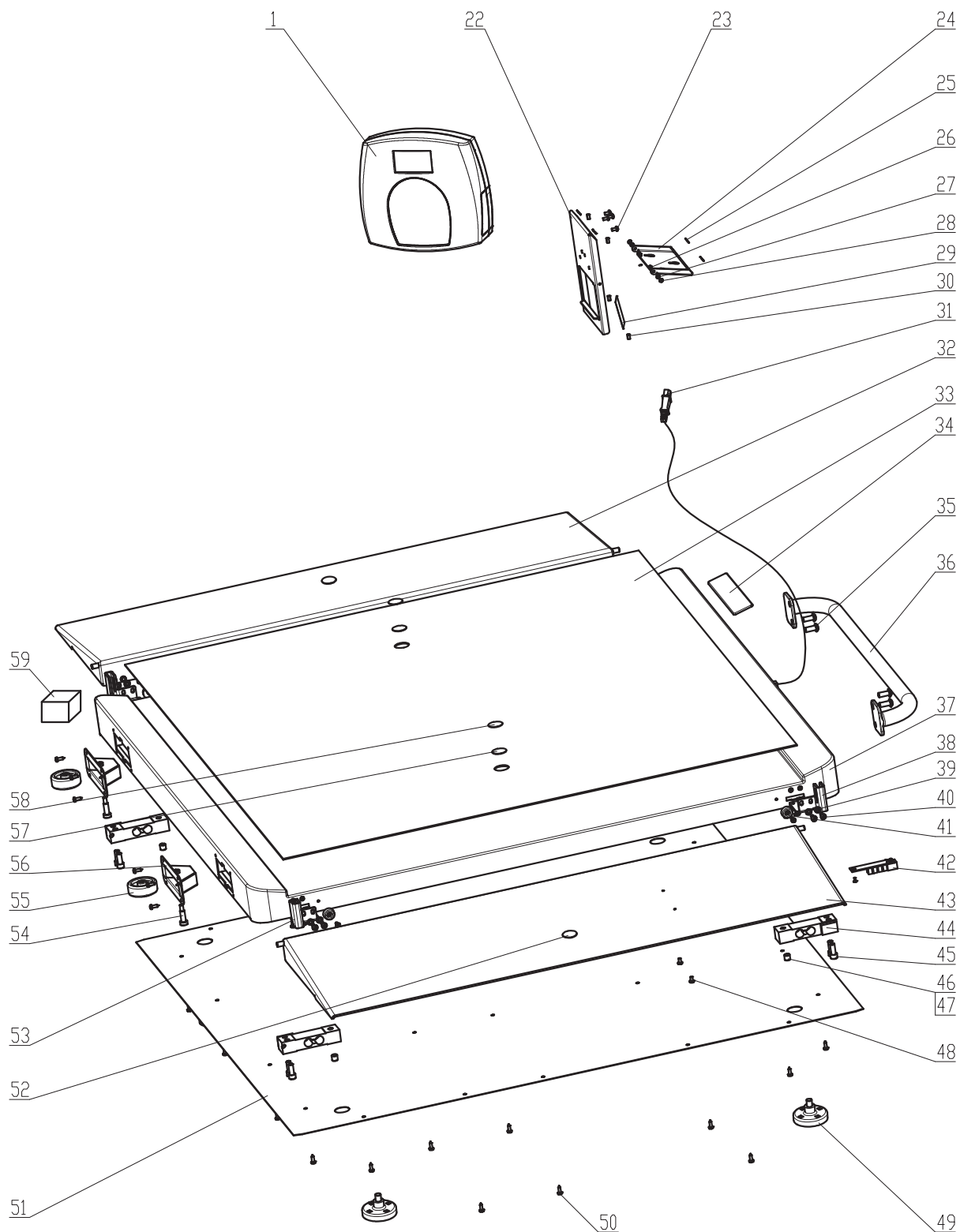MODELO 2650KL VISTA DETALLADA DE LA BALANZA




MODELO 2650KL LISTA DE PARTES

N.º clave	N.º de pieza	Descripción	Cant.	Observación
1	B1109401-0	DISPLAY ASSEMBLY	1	
22		ABRAZADERA DE CABEZAL 1# 1,5mmT SPCC	1	
23	B2266901	TORNILLO, M4X10	4	
24		ABRAZADERA DE CABEZAL 2# 1,5mmT SPCC	1	
25		ALFOMBRILLA	4	
26		TUERCA AUTOBLOQUEANTE, M3	2	
27		ARANDELA DE PLÁSTICO, Φ13	2	
28		TORNILLO, M3X10	2	
29	B3245801-0	INPUT/OUTPUT POSTS LABEL	1	
30		BLOQUEO ANTIDESLIZANTE	4	
31		WIRE	1	
32	B3827401-0	RAMPA 1#	1	
33	B3827101-0	FOOT MAT	1	
34		TRADEMARK	1	
35		TORNILLO, M8X19	4	
36		TUBO	1	
37		BOTTOM CASE ASM	1	
38	B3823601-0	ABRAZADERA DE RAMPA 1#	2	
39		ARANDELA, Φ5	16	
40		TORNILLO, M5X10	16	
41	B401308	ALFOMBRILLA DE RAMPA	4	
42	B2138901-0	PLACA DE CIRCUITO IMPRESO, CELDA DE CARGA	1	
43	B3827401-0	RAMPA 2#	1	
44	B1304202-0	SENSOR	4	
45		PERNO, 5/16"X19mm	8	
46		SCREW,M10X10	4	
47		PEGAMENTO PARA TORNILLOS, LOCTITE 248	0,2g	
48	B3822001-0	TORNILLO, M4X6	2	
49	B2266701-0	FEET	4	
50		TORNILLO, Φ4,2X13	26	
51		CUBIERTA INFERIOR, 0,6mmT SPCC	1	
52	B401327	SUJETADOR (MACHO)	2	
53	B3823701-0	ABRAZADERA DE RAMPA 2#	2	
54		PERNO	2	
55		WHEEL	2	
56		UNIDAD DE ABRAZADERA DE RUEDA	2	
57		ESPUMA DE GOMA ADHESIVA DE AMBOS LADOS	2	
58	B401328	SUJETADOR (HEMBRA)	2	
59	ADPT31	ADAPTADOR, 9VCC 200mA	1	

MODELO 2700KL VISTA DETALLADA DE LA BALANZA

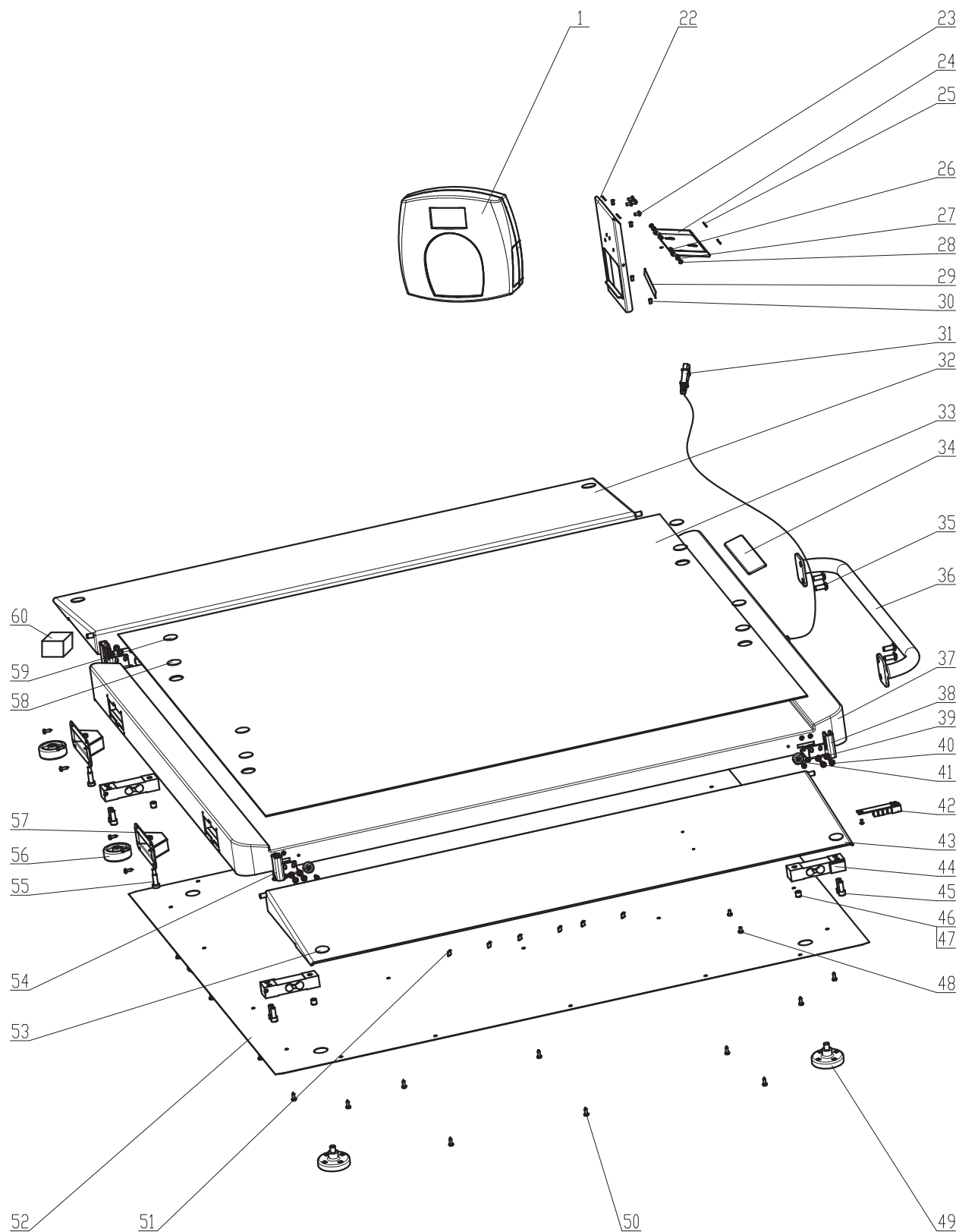Vista de la Balanza en Posición Plegada



MODELO 2700KL LISTA DE PARTES

N.º clave	N.º de pieza	Descripción	Cant.	Observación
1	B1109401-0	DISPLAY ASSEMBLY	1	
22		HEAD CLIP 1# 1.5mmT SPCC	1	
23	B2266901	TORNILLO, M4X10	4	
24		HEAD CLIP 2# 1.5mmT SPCC	1	
25		MAT	4	
26		SELF-LOCK NUT,M3	2	
27		PLASTIC WASHER, Φ3	2	
28		SCREW,M3X10	2	
29	B3245801-0	INPUT/OUTPUT POSTS LABEL	1	
30		ANTI-SLIP BLOCK	4	
31		WIRE	1	
32		RAMP 1#	1	
33		FOOT MAT	1	
34		TRADEMARK	1	
35		SCREW,M8X19	4	
36		PIPE	1	
37		BOTTOM CASE ASM	1	
38	B3823601-0	RAMP CLIP 1#	2	
39		WASHER, Φ5	16	
40		SCREW,M5X10	16	
41	B401308	RAMP MAT	4	
42	B2138901-0	LOAD CELL PCB	1	
43 (32)		RAMP 2#	1	
44	B1304202-0	SENSOR	4	
45		BOLT,5/16"X19mm	8	
46		SCREW,M10X10	4	
47		SCREW GLUE,LOCTITE 248	0.2g	
48	B3822001-0	SCREW,M4X6	2	
49	B2266701-0	FEET	4	
50		SCREW, Φ4.2X13	36	
51		WIRE CLIP	6	
52		BOTTOM COVER	1	
53	B401327	FASTNER (MALE)	2	
54	B3823701-0	RAMP CLIP 2#	2	
55		BOLT	2	
56		WHEEL	2	
57		WHEEL CLIP ASM	2	
58		DOUBLE-FACE GLUE FOAM	2	
59	B401328	FASTNER (FEMALE)	2	
60	ADPT31	ADAPTER,9VDC 200mA	1	

Protocolo de comunicación de PC

Esta balanza utiliza un protocolo de escape para comunicarse con un PC a través de los puertos serial 2 y USB (puerto serial 1: conexión a la impresora). En el protocolo de escape, la función de escape (<esc> o ASCII 27) se utiliza para indicar que sigue un comando y no datos.

Se han definido dos escenarios: Comunicación iniciada por la balanza y comunicación iniciada por el PC. A continuación se muestra una tabla de los elementos que pueden enviarse a través de la línea de comunicación.

Iniciado por la balanza	Valor ESC	Iniciado por el PC	Valor ESC
Enviar lectura individual	R	Actualizar firmware	U
Enviar lectura continua	R	Solicitar valores/ajustes actuales	Q
Enviar lecturas masivas	R	Diagnóstico	A
Enviar diagnóstico	A	Enviar mensajes de control de la balanza	C
		Solicitar datos almacenados	R
		Ajustar datos almacenados	S
		Eliminar datos almacenados	X

A continuación se muestra una lista completa de caracteres ESC que se usará:

Nombre	Carácter	Valor ESC con parámetros	Descripción
Lectura	R	R	Indica al PC que la balanza está enviando una lectura. Inmediatamente después aparece el valor enviado (por ejemplo, <ESC>R<ESC>I 1 234567890<ESC>W200.00<ESC>Nm<ESC>... <ESC>E
Identificación	I	Icccccccc ¹	Corresponde a la identificación del paciente (10 caracteres)
Peso	W	Wnnn.nn	Corresponde al peso del paciente (por ejemplo, W200,05 significa 200,5)
Altura	H	Hnnn.nn	Corresponde a la altura del paciente
TARA	T	Tnnn.nn	Corresponde al peso de TARA que indica la balanza
IMC	B	Bnnn.n	Corresponde al IMC del paciente
Final de paquete (EOP, por sus siglas en inglés)	E	E	Indica que se ha llegado al final del paquete de comandos/datos
Unidades	N	Nc	Indica el valor en el que se tomaron las unidades (m = métrico, c = constitucional)
Estado de carga	J	J	Solicita el estado de carga de la balanza. La respuesta será <ESC>O<ESC>E, <ESC>F<ESC>E o <ESC>L<ESC>E
Encendido	O	O	Cuando se desee saber el estado de carga, esto indicará que la balanza se encuentra encendida
Apagado	F	F	Cuando se desee saber el estado de carga, esto indicará que la balanza se encuentra apagada (o en modo de carga baja/temporizador de apagado). Si se encuentra en modo de carga baja, la balanza mostrará el carácter L
Fecha/Hora	D	Dnnnnnnnnnnnn	Corresponde a la fecha y a la hora (MMDDAAAhmmss)
Actualización	U	Uc	Este comando cuenta con un parámetro c que ayudará a llevar a cabo la actualización del firmware. En primer lugar, el PC iniciará la actualización mediante el envío de una Ur (solicitud de actualización). La balanza responderá con los caracteres Uc(Eliminar para enviar) o Ue (error, no enviar). Posteriormente, la balanza envía U127K o U127B (la longitud de los datos que siguen en kilobytes o bytes) y luego envía los datos.
Solicitud	Q	Qccc	Consiste en una solicitud de recepción de valores globales de la balanza, por ejemplo, brillo de la pantalla LCD, tiempo de espera automático, volumen del pitido del teclado, etc. (Ver Tabla A) (por ejemplo, <ESC>QAHT indicará que el tiempo de espera automático equivale a 10 segundos de la siguiente manera: <ESC>PAHT=10<ESC>E)

¹ Se usaron caracteres descriptivos para mostrar el tipo de parámetro. Se trata de: c = carácter, n = numérico. El número de parámetros indica el número predeterminado de marcadores de posición para estos caracteres y números (por ejemplo, Zccc indica que se proporcionará un valor de 3 caracteres).

Nombre	Carácter ESC	Valor ESC con parámetros	Descripción
Respuesta	P	Pccc=ccccccc	Se trata de la respuesta de la balanza a la solicitud mencionada anteriormente
Diagnóstico(1)	A	Accc	Corresponde a la solicitud de una prueba de diagnóstico para ciertas piezas de la balanza (por ejemplo, vida útil de las pilas, células de carga, teclado, pantalla LCD, etc.). (Ver Tabla B)
Diagnóstico(2)	Z	Zccc	Se trata de la respuesta del diagnóstico efectuado en la balanza. Los valores incluirán códigos de error para indicar lo que ocurre con la balanza, o bien todos ceros para indicar que todo está OK.
Control (ajustar un valor)	C	Cccc=ccccccc	Se trata del ajuste del valor correspondiente a los ajustes globales de la balanza, por ejemplo, retroiluminación, tiempo de espera automático, volumen del pitido del teclado, etc. (Ver Tabla A) (por ejemplo, <ESC>CAHT=20<ESC>E ajusta el tiempo de espera automático a 20 segundos)
Obtener datos y lecturas del registro de personas	G	G	Proporciona toda la información correspondiente tanto a los datos del registro de personas como a las lecturas guardadas en la tabla de lecturas.
Ajustar datos del registro de personas	S	S	Ajusta los datos del registro de personas para un paciente específico. Inmediatamente después, éste será el valor ajustado (por ejemplo, <ESC>S<ESC>I1234<ESC>T200<ESC>Um<ESC>E ajustará la TARA para el paciente con identificación 1234 a 200kg)
Eliminar lecturas	X	X	Elimina todos los valores guardados en la tabla de lecturas de la balanza. Sólo se conservan los datos del registro de personas.
Eliminar datos del registro de personas	Y	Y	Elimina los datos del registro de personas para un paciente específico. La identificación del paciente sigue inmediatamente después de la Y (<ESC>Icccccccccc). Si no se proporciona identificación, se eliminan TODOS los datos.

Nombre del control	Identificador	Unidad
Tiempo de espera automático	AHT	nn (Segundos)
Tiempo de apagado automático	AOT	nn (Minutos)
Temporizador de apagado	STM	nn (Segundos)
Volumen del teclado	VKE	nn (01..10)
Volumen de peso estable	VSW	nn (01..10)
Volumen de la alarma	VAL	nn (01..10)
Visualización de fecha/hora	DAT	nn (01 ó 10)
Luz posterior	BAC	nn (01..10)
Contraste	CON	nn (01..10)
Modo de visualización de peso en fracciones (f), decimales (d) o libras y onzas (p)	WDM	c (f,d,p)
Peso de tara	TAR	nnn.nn (Kg)
Unidad de medición (métrica o constitucional)	UOM	c (m ó c)
Posiciones restantes en memoria RAM	RAM	nnnn (0..máx.)

Tabla A – Identificadores y lista de valores globales de la balanza

Nombre de los componentes por	Identificador	Código de error
Celda de carga A	LCA	E3A
Celda de carga B	LCB	E3B
Celda de carga C	LCC	E3C
Celda de carga D	LCD	E3D
Batería	BAT	E4L (Batería baja pero utilizable) o E4U (Batería baja e inestable)
Comunicación por PC (USB)	PCC	E05
Transcribir a memoria RAM	WRM	E08
Leer de memoria RAM	RRM	E09

Tabla B – Componentes por evaluar

Las diferentes tablas de la balanza:

Se ven dos tablas de datos en la balanza. La primera almacena los datos del registro de personas (datos del paciente que no cambian) y la segunda almacena los datos obtenidos durante las lecturas realizadas.

Datos del registro de personas

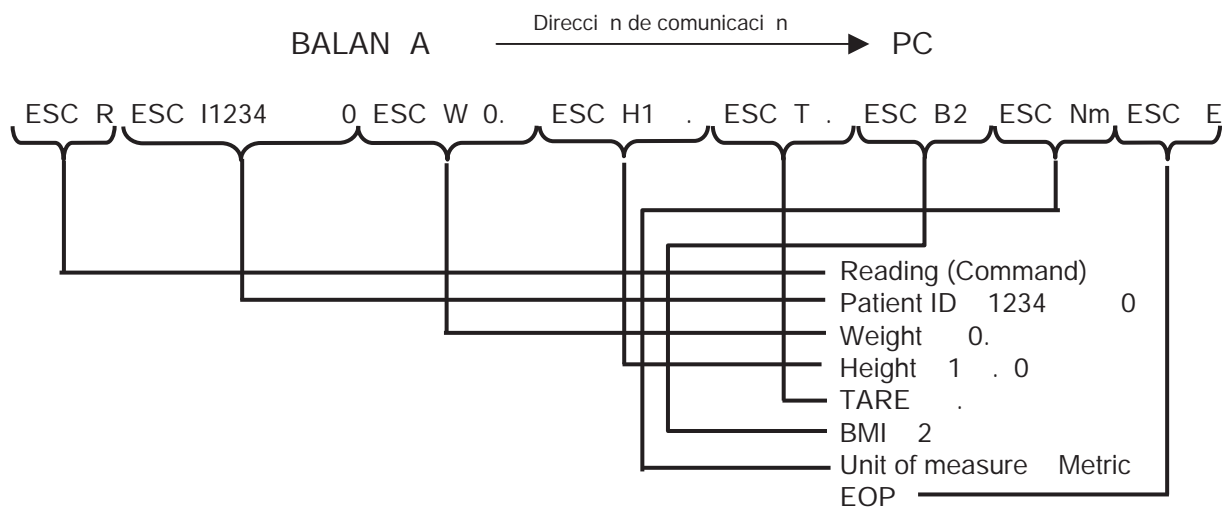
Campos: IDENTIFICACIÓN, TARA, ALTURA

Lecturas

Campos: Índice (desde Identificación hasta Tabla del registro de personas), Peso, Fecha/hora


Ejemplo y explicación del protocolo de escape

1. Cuando la balanza mide el peso de un paciente y lo envía a través de la línea de comunicaciones al PC, se ve del siguiente modo:




2. Cuando el PC solicita los valores correspondientes a los pesos almacenados, se ve del siguiente modo:

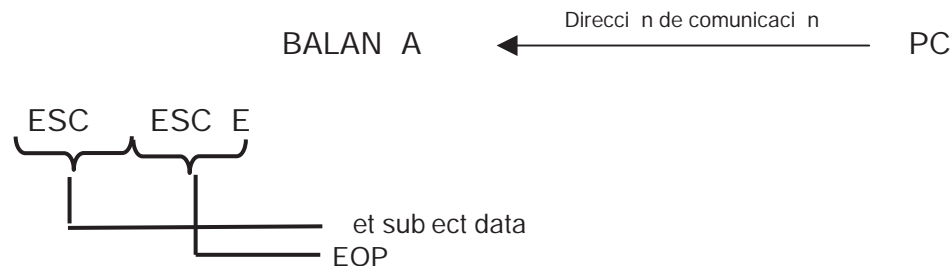En primer lugar, el PC solicita que la balanza envíe los datos. Esto se efectúa a través del comando 'Obtener lecturas y datos del registro de personas'.



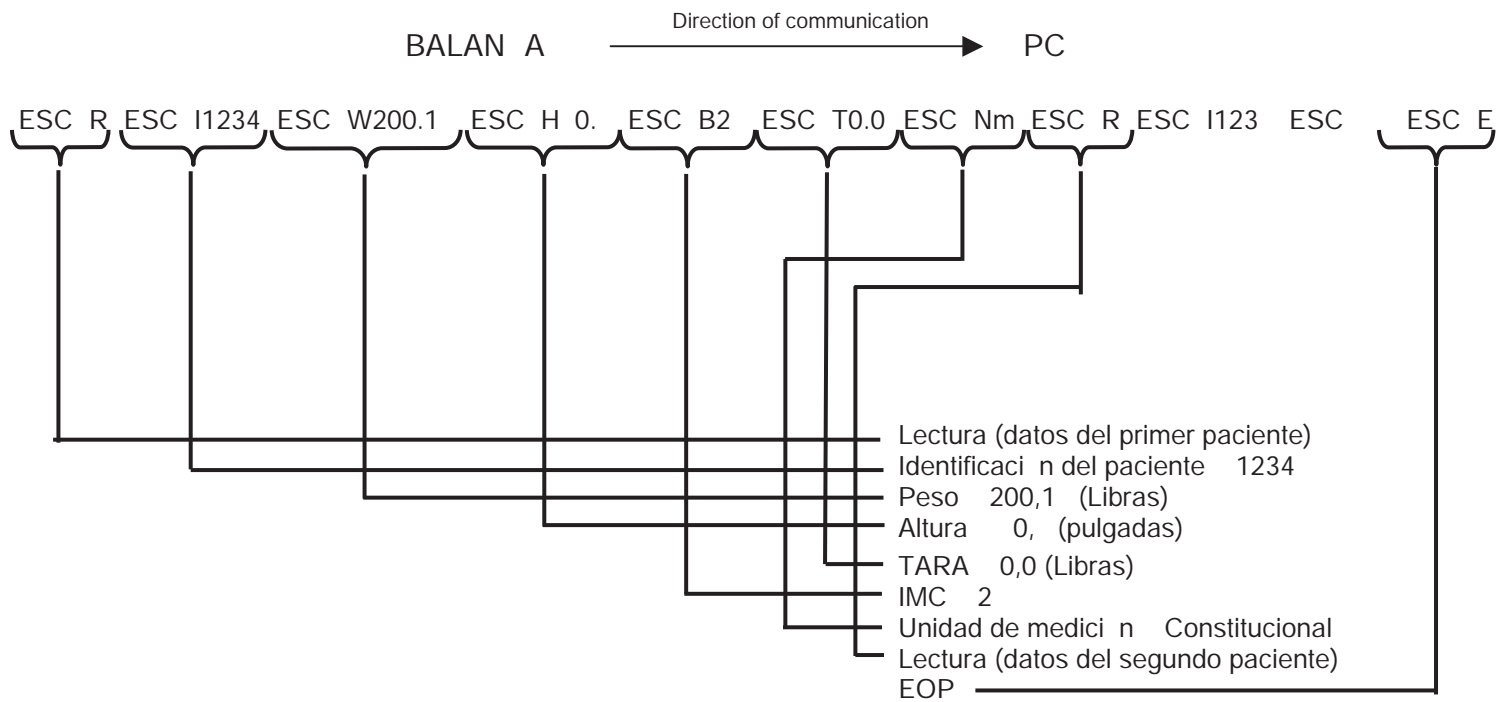Posteriormente, la balanza envía los datos almacenados.





Si no se almacenan datos en la balanza, sólo envía

ESC R ESC E

Configuración de las clavijas para los cables ProPlus

Las clavijas de los dos conectores se conectan de la siguiente manera:

R 4	Función	DB
4	T	2
2	R	3
1	Toma de tierra	

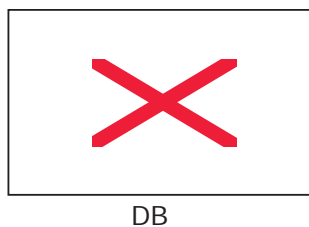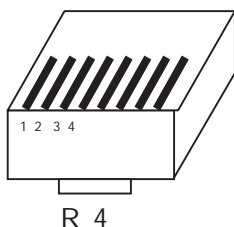


COMENTARIO: Conecte el cable de la impresora al PUERTO 2 de la balanza

TEN EN CUENTA los parámetros de transmisión

Velocidad de transmisión	00
Paridad	Ninguno
Bits de datos	bits
Bits de retenida	1 bit
Bits de inicio	1 bit
Hardware activo	Ninguno

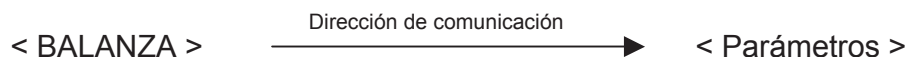Parámetros de la impresora



Modelo de la impresora: CT-S280
Voltaje de trabajo: CC8.5V-2.5A


Esta balanza incluye una función de impresión que se activa al conectar la impresora XXXXX:

1. Conecte el cable de la impresora al PUERTO 1 de la balanza.
2. Encienda la impresora.
3. Asegúrese de que no haya ningún objeto sobre la plataforma de peso.
4. Encienda la balanza y espere hasta que aparezca CERO y 0,0 para pararse sobre la misma.
5. Pérese sobre la balanza y pésese.
6. Introduzca los datos del paciente: identificación, altura, peso de la silla de ruedas, etc.
7. Presione la tecla 3 (IMPRIMIR) para que la impresora imprima los datos del paciente, es decir, identificación, peso, altura, IMC, etc.




Configuración de las clavijas para los cables de la impresora de la balanza ProPlus

RJ45	Función	DB9
6	TX	3
7	Toma de tierra	2

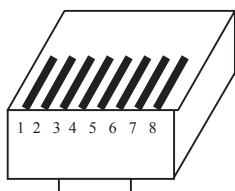

RJ45

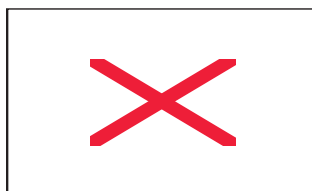

DB9

1. Identificación
2. Peso
3. Altura
4. IMC
5. Peso de tara

NOTA: Primero, configure la impresora de acuerdo con las instrucciones del fabricante para garantizar que imprima de manera adecuada.

NOTA: Conecte el cable de la impresora al PORT1 (PUERTO1) de la balanza.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA

¿Qué Cubre la Garantía?

Las balanzas de Pelstar LLC están garantizadas a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de tres (3) años. Si el funcionamiento del producto no fuese adecuado, regrese el producto a Pelstar con fletes prepagados y en un embalaje adecuado. Vea 'Para Obtener Servicio de Garantía' abajo para de instrucciones. Si el fabricante determinase la existencia de un defecto de fabricación o mano de obra, el remedio único será la reparación o reemplazo de la balanza sin cargo alguno para el cliente. El reemplazo se realizará con un equipo o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto se encontrase fuera de producción se le reemplazará con un producto similar del mismo o mayor valor. Todas las partes, incluyendo las partes separadas o reemplazadas, están cubiertas únicamente durante el periodo original de la garantía.

¿Quién Está Cubierto?

El comprador original del producto debe poder comprobar la compra para hacer válida la garantía. Los distribuidores o minoristas de Pelstar no tienen derechos para alterar, modificar, o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

¿Quién Está Excluido?

La garantía no cubre el desgaste normal de las partes o daños como resultado de: Uso negligente o mal uso del equipo, uso de voltajes o corrientes inapropiadas, utilización contraria a las instrucciones de operación, abuso incluyendo modificaciones, daños en transporte, reparaciones o alteraciones no autorizadas. Más aún, la garantía no cubre sucesos naturales como fuego, inundaciones, huracanes o tornados. Esta garantía le da a Ud. derechos legales específicos, puede tener además otros derechos que varían de país a país, estado a estado, provincia a provincia o jurisdicción a jurisdicción.

Para obtener Servicio de Garantía

Asegúrese de conservar su recibo de venta o un documento que demuestre prueba de la compra. Llame 1 (800) 638-3722 or 1 (708) 377-0600 para recibir un número de autorización para retorno. Adjunte prueba de la compra al producto con defecto junto con su nombre, dirección, número de teléfono de día y descripción del problema. Empaque el producto cuidadosamente y envíelo con transporte y seguro pagados por adelantado a:

Pelstar LLC
Attention R/A# _____
Repair Department
11800 South Austin Avenue
Unit B
ALSIP, IL 60803. U.S.A

Si su balanza no está cubierta por garantía, o ha sido danificada, un presupuesto de los costos de reparación o reemplazo será proveído a usted para aprobación antes del mantenimiento o reemplazo.

Pelstar LLC

11800 South Austin Avenue Unit B ALSIP, IL 60803, U.S.A • 1 800 638-3722 or +1 708 377-0600.
www.homscales.com

Los productos Health o meter ProPlus son fabricados, proyectados y de propiedad de Pelstar LLC. Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products Inc., Boca Raton, FL 33431

© Pelstar LLC 2009

ProPlus® es una marca registrada de Pelstar LLC

Patente No. US: D508655, D523367, Europa: 0149984/1-8, China: 200430004551.2

Rev. 20090713